KORSNIČKE UPUTE
Ručni aspirator
Šifra proizvoda: 7B-1

1. Značajke


Ručni aspirator 7B-1 namijenjen je za pobačaj i druge kirurške zahvate s aspiracijom. Prijenosan je, siguran i prikladan za transport i uporabu. Može se koristiti bez napajanja. Uglavnom se koristi u bolnicama za aspiraciju krvi, sluzi i drugih gustih tekućina tijekom kirurških zahvata.

Pribor

Naziv	količina
usisna pumpa	1 kom.
spremnik za prikupljanje 200 ml	1 kom.
kateteri: 2,67 mm i 4,0 mm	2x 1 kom.
kateter 8,00 mm	1 kom.

2. Struktura i načelo rada

- Struktura proizvoda uglavnom se sastoji od cilindara klipa, boce za
- pohranu tekućine i potpornog okvira.
- Pritiskom na ručku stvara se negativni tlak pomoću
- povratnog gibanja klipa u cilindru. U sustavu za aspiraciju neće se
- stvarati nikakav pozitivni tlak zahvaljujući uporabi jednosmjernog
- ventila, što omogućuje siguran i pouzdan rad.
- Kompaktna struktura, jednostavno rukovanje, prikladno za transport.
- Shematski dijagram:

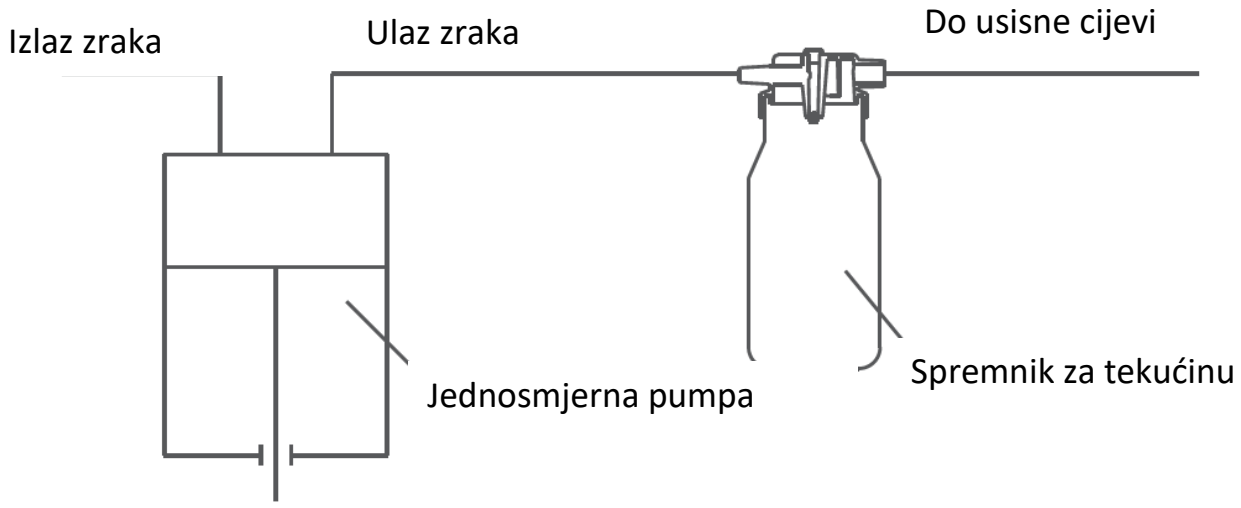

3. Napomene i preporuke

- Nakon 15 sekundi aspiracije (kod dojenčadi i djece to je vrijeme kraće) potrebno je 2 minute ventilirati pacijenta.
- Ručni aspirator trebaju koristiti osobe osposobljene za tehnike aspiracije.
- Spremnik za prikupljanje i kateter namijenjeni su za jednokratnu uporabu. Pumpa se može višekratno koristiti samo za pružanje pomoći jednom pacijentu.
- Ručni aspirator treba čuvati dalje od izvora topline i sunčeve svjetlosti.
- Uporaba proizvoda koja nije u skladu s uputama može dovesti do tjelesne ozljede pacijenta.
- Ne smije se koristiti proizvod ako se utvrde bilo kakva vidljiva ili opipljiva oštećenja.
- Ne smiju se samostalno izvoditi popravci ili konstrukcijske preinake.

Timago International Group ne snosi odgovornost za nepravilno održavanje proizvoda, nepoštivanje sigurnosnih pravila i uporabu koja nije u skladu s namjenom.

4. Struktura



5. Način uporabe

Korak 1. Provjerite rad aspiratora tako da prstom pokrijete usisni priključak pumpe i pritisnete okidač.

Korak 2. Provjerite je li spremnik za prikupljanje pravilno pričvršćen na pumpu, a zatim postavite kateter za aspiraciju na usisni priključak (set sadrži dva katetera: uži i širi).
Korak 3. Nježno uvedite kateter za aspiraciju u usni dio ždrijela ili nosni otvor i pritisnite okidač za početak aspiracije.
Korak 4. Aspiracija se nastavlja dok se spremnik maksimalno ne napuni tekućinom.
Korak 5. Nakon pružanja pomoći pacijentu, spremnik za prikupljanje i kateter treba staviti u vreću za medicinski otpad kako bi se izbjegla infekcija.

6. Tehnička specifikacija

Maksimalni negativni tlak	> 0,04 MPa
Kapacitet spremnika za prikupljanje	200 ml
Maksimalni protok	>20 L/min
Težina	202 g
Dimenzije	17x5x18 cm
Temperatura uporabe	5 °C - +35 °C
Temperatura skladištenja	-40 °C - +55 °C

7. Čišćenje i održavanje

Ručni aspirator namijenjen je za višekratnu uporabu, dok su spremnik za prikupljanje i kateter namijenjeni za jednokratnu uporabu i trebaju se baciti nakon svake uporabe. Za ponovnu uporabu aspiratora potrebno ga je očistiti vlažnom krpom i blagim deterdžentom.

8. Uvjeti skladištenja i transporta

Proizvod se ne smije izlagati izravnom djelovanju sunčevih zraka, vode i vlage.

9. Podaci o jamstvu

Proizvod je obuhvaćen jamstvom, čiji su uvjeti opisani u jamstvenom listu koji ste primili. Za potrebe jamstva potrebno je sačuvati dokaz o kupnji (račun ili fakturu).

10. Oznake

REF	Referentni broj		Proizvođač
LOT	LOT broj	UDI	UDI kod
SN	Serijski broj	MD	Medicinski proizvod
	Napomena		Molimo pročitajte upute
CE	Proizvod ispunjava zakonske zahtjeve Europske unije za medicinske proizvode (MDR 2017/745).		

Cjelokupna linija naših proizvoda dostupna je kod naših distributera. Više informacija potražite na stranici: **www.timago.com.** Hvala što ste odabrali Timago!



Timago International Group
Ossowski Sp. k.
ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland
T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com

CE MD

06/2026(I)