UPUTE ZA UPORABU
Aluminijska invalidska kolica za tuš i komodu
Šifra proizvoda: COMPLEX-TIM

1. Karakteristike

Invalidska kolica za tuš i komodu izrađena su od aluminijskog okvira presvučenog prahom. Sadrži preklopne naslone za ruke za lak ulazak i izlazak osobama smanjene pokretljivosti. Opremljena je sjedalom s klinom od PU, prednjim okretnim 5" kotačima s kočnicama, stražnjim 24" punim kotačima, nagibnim i uklonjivim osloncima za noge, sigurnosnim trakama, ručkom za osobu u pratnji i sanitarnom kutijom. Konstrukcija invalidskih kolica omogućuje klizanje preko WC daske.

Set uključuje: okvir invalidskih kolica s kotačima, sjedalo s klinom, dvije ručke za montažu, desnu i lijevu nogu sa sigurnosnim trakama, sanitarnu posudu s poklopcem.

Elementi stolice:




1. Ručka
2. Naslon za leđa
3. zasun oslonca za noge
4. sjedalo s klinom
5. sanitarni kontejner
6. stražnji kotači 24"
7. nasloni za ruke
8. oslonci za noge sa sigurnosnim trakama
9. prednji kotači 5" s kočnicama
10. parkirne kočnice

2. Primjena

Invalidska kolica s tuš kabinom i komodom namijenjena su osobama koje imaju problema s kretanjem bez pomoći te pacijentima s disfunkcijama i smanjenom pokretljivošću. Invalidska kolica su prikladna samo za unutarnju upotrebu. Invalidska kolica funkcioniraju kao stolica za tuširanje i komoda zahvaljujući sanitarnoj posudi ispod sjedala i aluminijskom okviru otpornom na vlagu. Olakšava svakodnevne higijenske aktivnosti. Invalidska kolica posebno se preporučuju osobama koje imaju problema s kretanjem uzrokovanih: paralizom, pretilošću ili abnormalnom nedovoljnom tjelesnom težinom, degeneracijama ili deformacijama udova, degeneracijama ili ozljedama zglobova, ozljedama udova ili amputacijama, bolestima srca i krvnih žila te poremećajima cirkulacije.

3. Skupština

1. Kako biste spriječili pomicanje okvira invalidskih kolica tijekom sastavljanja, zaključajte kočnice pritiskanjem crvenih poluga kočnice prema dolje (slika 1).
2. Montirajte stražnje kotače umetanjem u rupe na stražnjoj strani okvira.
3. Gurnite parkirnu kočnicu na cijev na prednjem dijelu okvira, zatim je zategnite šesterokutnim ključem. Ispravno montirana kočnica treba biti postavljena 4 cm od kraja cijevi (slika 2). Ponovite to s druge strane. Provjerite ispravnost rada povlačenjem poluge ručne kočnice.

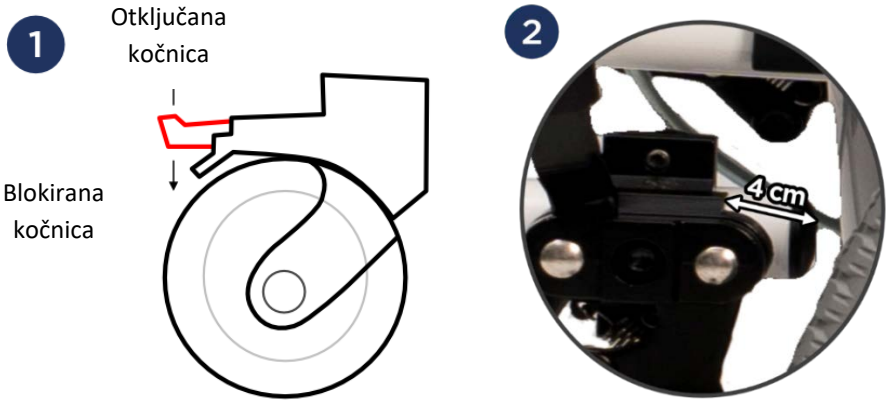

4. Odvijte pričvrsne gumbe sa stražnjeg okvira i stavite cijevi naslona u okvir invalidskih kolica. Zategnite ga gumbima i spustite naslone za ruke.
5. Pričvrstite sjedalo na okvir stolca pritiskom dok ne sjedne na svoje mjesto (prednji dio sjedala označen je klinom).
6. Pričvrstite sanitarnu kutiju tako da je pomaknete sa naslona sjedala.

7. Umetnite oslonce za noge u glavni okvir sa strane, a zatim ih okrenite prema naprijed dok zasuni oslonca za noge ne sjednu na mjesto. Za uklanjanje oslonaca za noge povucite ručicu zasuna prema gore i okrenite oslonce za noge prema van.
8. Pričvrstite sigurnosne trake za telad oko oslonaca za noge.

RUKOVANJE INVALIDSKIM KOLICIMA

- Provjerite stanje kočnica, konstrukcije i kotačića. Provjerite pravilnu montažu komponenti i njihovo podešavanje.
- Prije uporabe provjerite odgovara li širina stolice korisnikovoj, jer stolica nije opremljena podešavanjem širine.
- Stolica je dizajnirana za korištenje na kratkim udaljenostima i samo unutra. Stolica nema amortizer pa se ne preporučuje dugotrajno korištenje.

BILJEŠKA! Ne koristite stolicu ako se uoče bilo kakvi nedostaci ili nedostaci.

FUNKCIJA PREKLOPANJA NASLONCA ZA RUKE

- Laganim pokretom podignite naslon za ruku prema gore.
- **Ne** koristite naslon za ruke kao oslonac dok stojite. Ako je potrebna pomoć – zatražite pomoć.

KOČNICE

- Za zaključavanje prednjih kotačića pritisnite crvene pedale nogom. Za otključavanje kotača nogom pritisnite crne poluge unutar crvenih pedala.
- Za zaključavanje stražnjeg kotača povucite ručicu parkirne kočnice unatrag. Za otključavanje kotača povucite ručicu kočnice u suprotnom smjeru.

OSLONCI ZA NOGE



- Ploče za noge trebaju biti u okomitom položaju kada ulazite u stolac ili izlazite iz njega. **Ne koristite podloge za noge kao oslonac dok ulazite u stolac ili izlazite iz njega zbog opasnosti od pada.**
- Oslonci za noge imaju podešavanje visine. Odvijte pričvrsni vijak na stražnjoj strani oslonaca za noge (slika 3) kako biste podesili visinu. Nakon toga zategnite.

USPJETI SE NA STOLICU

- Bitno je blokirati kočnice dok ulazite u stolac ili izlazite iz njega, mijenjate položaj korisnika ili silazite.
- Dok mijenjate mjesto, stolac treba biti smješten što je moguće bliže mjestu prijenosa. Stolica treba dodirivati krevet ili drugo sjedalo koje se koristi. Ako korisnik ne može samostalno promijeniti svoje sjedalo, prebacite ga na stolicu.
- Korisnik treba sjediti što dublje u sredini sjedala kako bi se izbjegla nestabilnost sjedala.

4. Tehnički podaci

Ukupna širina	63,5 cm
Unutarnja širina	45 cm
Ukupna dubina	102 cm
Visina sjedala od tla	53 cm
Ukupna visina	93 cm
Dimenzije sjedala	44 x 42 cm
Težina	17 kg
Maksimalni kapacitet	150 kg
Boja okvira	bijela

5. Bilješke

Timago International Group ne snosi odgovornost za nepravilno korištenje stolice i nepoštivanje sigurnosnih propisa.

6. Čišćenje i održavanje

Redovito održavajte komponente stolice:

- Sjedalo se može čistiti vlažnom krpom i hladnom ili toplom vodom, bez upotrebe deterdženata. Teške mrlje možete očistiti spužvom.
- Plastične elemente treba čistiti vlažnom krpom uz korištenje odgovarajućih deterdženata za plastične elemente. U tom slučaju slijedite upute proizvođača i sigurnosne mjere.
- Ispraznite i dezinficirajte WC kantu i WC školjku nakon svake uporabe. Koristite proizvode za čišćenje u skladu s preporukama proizvođača.


7. Uvjeti skladištenja i transporta

Uređaj ne smije biti izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti, vodi ili vlazi.

8. Informacije o jamstvu

Svi proizvodi koje distribuira naša tvrtka pokriveni su jamstvom, čiji su uvjeti opisani u jamstvenom listu dostupnom na našoj web stranici. Obratite se prodavaču od kojeg ste kupili proizvod. Imajte na umu da u svrhu jamstva treba sačuvati dokaz o kupnji (račun ili račun).

9. Oznake

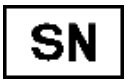	Referentni broj		Proizvođač
	Broj serije		Datum proizvodnje
	Serijski broj		Medicinski proizvod
	Pozor		Pročitajte korisničke upute
	Proizvođač je izvršio ocjenu usklađenosti s glavnim zahtjevima vezanim za medicinske proizvode.		

Cijela ponuda je dostupna za Vas kod naših distributera.
Saznajte više na **www.timago.com**
Hvala što ste odabrali Timago!



Timago International Group Ossowski Sp.k.
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Poland

Tlf.: +48 33 499 50 00
Telefax: +48 33 499 50 11
E-mail: info@timago.com

CE MD

03/2025(I)