KORSNIČKE UPUTE


Hodalica na 4 kotača s kočnicama i sjedalom

Šifra proizvoda: DEFENDER

1. Karakteristike

S 4 kotača izrađena je od poprečno ojačanog aluminijskog okvira. Hodalica je opremljena sjedalom, naslonom za leđa, kočnicama s parkirnom funkcijom, prednjim 8” okretnim kotačima sa sustavom zaključavanja i stražnjim 8” kotačima. Čvrste ručke pružaju pravilnu stabilizaciju i udobnost korištenja. Visina hodalice se može prilagoditi potrebama korisnika. Kada je sklopljena, hodalica zauzima malo prostora, što olakšava pohranu i transport.

Elementi hodalice:

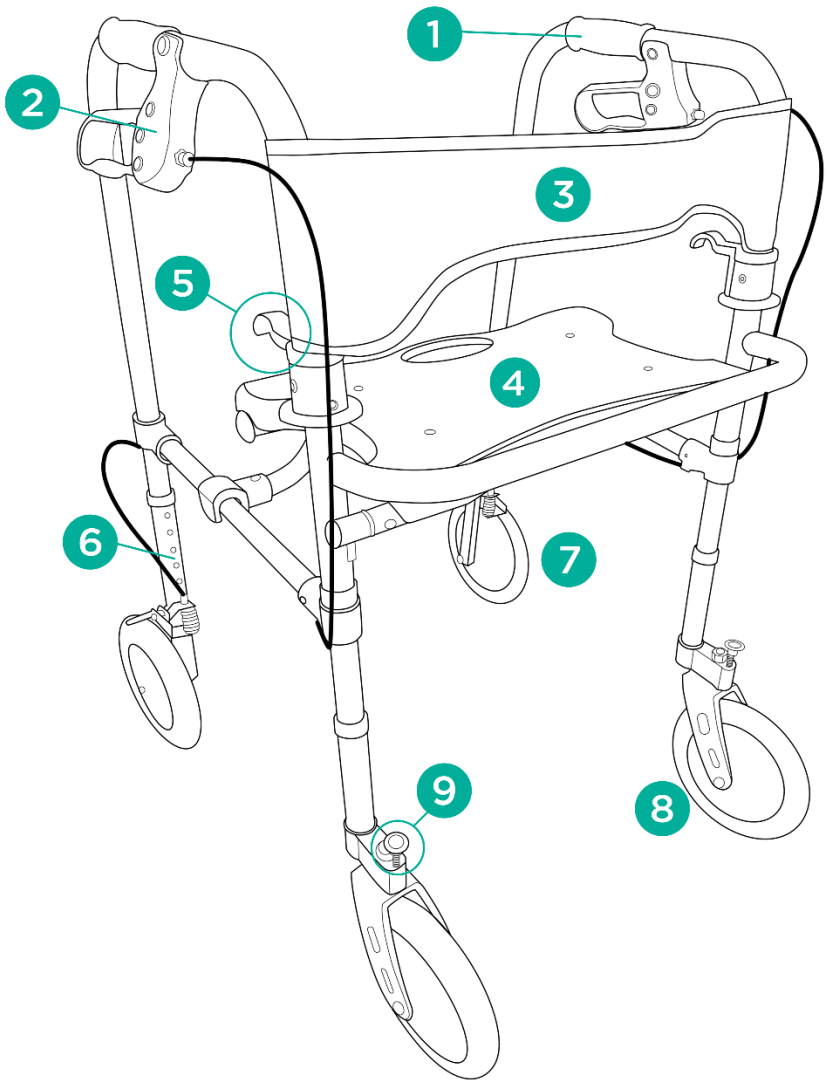

1. Ručna kočnica s parkirnom funkcijom
2. Naslon za leđa
3. Sjedalo
4. Preklapanje okvira
5. Sustav
6. Podešavanje visine
7. Stražnji kotač 8"
8. Prednji kotač 8"
9. Poluga za zaključavanje okretnog kotača

2. Primjena

Hodalica s 4 kotača potporna je oprema namijenjena osobama smanjene pokretljivosti kojima je potrebna stabilna potpora i pomoć tijekom hodanja. Preporučuje se i starijim osobama kao pomoć pri održavanju ravnoteže,

poboljšanju udobnosti hodanja i sigurnosti od pada. Korištenje hodalice ima pozitivan učinak na povratak aktivnosti kod osoba s problemima donjih udova i s problemima lokomocije ili vertikalizacije.

3. Skupština

OTKLAPANJE I SKLAPANJE

- Kako biste rasklopili hodalicu, razdvojite strane do maksimalne pozicije dok se ručke ne zaključaju (karakteristični zvuk "klik").
- Kako biste sklopili hodalicu, povucite poluge sustava za preklapanje okvira koje se nalaze sa strane i preklopite ih prema unutra.

PODEŠAVANJE VISINE

- Visina treba biti postavljena tako da korisnik, koji se oslanja na rukohvate, stoji uspravno s ramenima u položaju odmora i blago savijenim laktovima. Nije preporučljivo visi na hodalici cijelom težinom tijela.
- Za podešavanje visine nogu pritisnite metalnu iglu, odaberite odgovarajuću visinu i zaključajte položaj sve četiri noge. Noge su podesive u koracima od 2,5 cm.

BILJEŠKA! Igle moraju biti postavljene na istoj razini na svakoj nozi.

FUNKCIJA KOČNICE

- Kako biste zaustavili rolator, povucite ručicu kočnice prema gore, a zatim držite.
- Kada nije u pokretu ili ne koristite sjedalo, zaključajte parkirnu kočnicu povlačenjem ručke kočnice prema dolje.
- Za otpuštanje parkirne kočnice povucite ručku prema gore **.**


FUNKCIJA SJEDALA

- Walker je opremljen 48 cm širokim sjedalom koje korisniku omogućuje odmor.
- Kako biste podigli sjedalo, uhvatite ručku sjedala i povucite ga prema gore.

ZAKLJUČAVANJE OKRETNIH KOTAČA

- Prednji, okretni kotači mogu se zaključati u ravno naprijed.
- Za zaključavanje kotača povucite poluge za zaključavanje prema gore i zakrenite ih u stranu (slika 1) i nakon toga pustite poluge. Provjerite jesu li oba kotača poravnata u ravnom položaju. Trebao bi se čuti zvuk "klik". Ponovite na drugom kotaču.
- Za otključavanje zakretnih kotača, povucite poluge prema gore i vratite ih u prethodni položaj (slika 1).

BILJEŠKA! Prije korištenja hodalice provjerite jesu li oba kotača otključana ili zaključana.

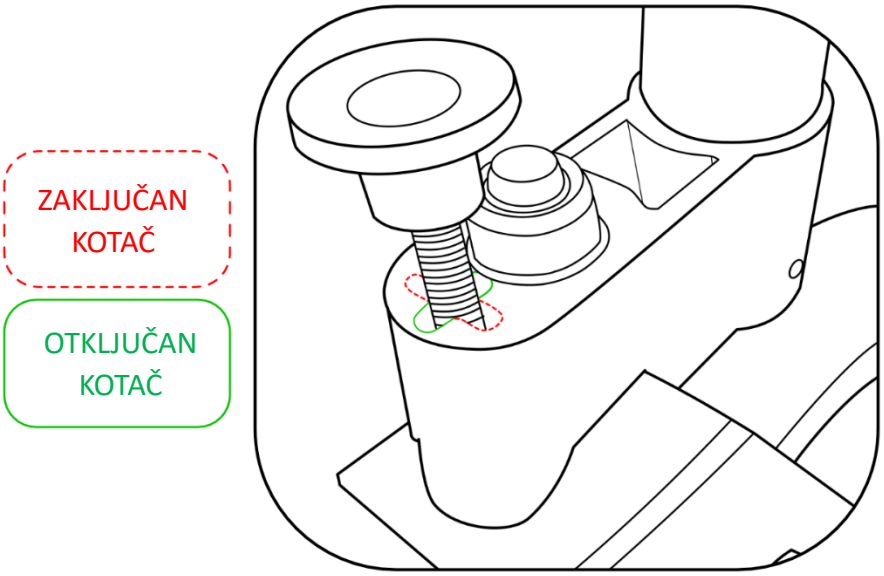

Slika 1

4. Tehnički podaci

Sve u svemu širina	67 cm
Unutarnja širina	49 cm
Ukupna dubina	64 cm
Dimenzije sjedala	48 x 29 cm
Visina podešavanje	90-101 cm
Težina	7,80 kg
Maksimalni kapacitet	136 kg

5. Bilješke

Timago International Group ne snosi odgovornost za nepravilno korištenje hodalice, nepridržavanje sigurnosnih propisa i zlouporabu.

6. Održavanje

- Očistite okvir hodalice vlažnom krpom koristeći samo vodu i blagi deterdžent.
  Temeljito osušite.
- Ne koristite za čišćenje: jaka sredstva za poliranje i abrazivna sredstva, jake deterdžente, izbjeljivač, benzin ili otapala (može uzrokovati oštećenje okvira, vidljive nedostatke i kao posljedicu - gubitak prava na jamstvo).

- Redovito uklanjajte prljavštinu s pokretnih dijelova hodalice (šarke, stezne vijke, brave).


7. Uvjeti skladištenja i transporta

Proizvod ne smije biti izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti, vodi ili vlazi.

8. Jamstvene informacije

Svi proizvodi koje distribuira naša tvrtka pokriveni su jamstvom, čiji su uvjeti opisani u jamstvenom listu dostupnom na našoj web stranici. Molimo kontaktirajte trgovca od kojeg ste kupili proizvod. Imajte na umu da za potrebe jamstva trebate zadržati dokaz o kupnji (račun ili faktura).

9. Oznake

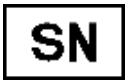	Referentni broj		Proizvođač
	LOT broj		UDI kod
	Serijski broj		Medicinski uređaj
	Napomena		Molimo pročitajte upute
	Proizvođač je provjerio usklađenost s osnovnim zahtjevima za medicinske uređaje.		

Naša cjelokupna linija proizvoda dostupna je kod naših distributera. Saznajte više na: **www.timago.com**. Hvala što ste odabrali Timago!



Timago International Group
Ossowski Sp. k.
ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland
T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com



11/2025 (II)