UPUTE ZA UPORABU
Posuda za pranje kose s tušem
Šifra proizvoda: EASY SHOWER

1. Uvod

Prije uporabe proizvoda provjerite ima li opreme oštećenja nastalih tijekom transporta. Ako primijetite bilo kakva oštećenja, obratite se prodajnom mjestu. Važno je pročitati sadržaj ovog priručnika koji sadrži relevantne informacije za korisnika. Ako imate pitanja u vezi s korištenjem uređaja, kontaktirajte nas. Naše osoblje će vam stalno pružati potrebne informacije. Također napominjemo da, ako imate pitanja koja nisu povezana s korištenjem proizvoda, kontaktirajte svog liječnika, medicinsku sestru ili fizioterapeuta.

2. Konstrukcija

Prijenosna, napuhavajuća posuda izrađena od PVC-a za pranje kose s odvodom vode mekana je i ugodna za uporabu. Dvije zračne komore sprječavaju prolijevanje vode i sapunice.


Set sadrži: posudu, spremnik za vodu, tuš, odvodno crijevo, pumpu, nosač spremnika.

3. Primjena


Set za pranje kose omogućuje pranje glave pacijenta u ležećem položaju. Posebno se preporučuje za uporabu u zatvorenom prostoru tijekom njege nepokretnih i starijih osoba koje imaju poteškoće s naginjanjem glave i savijanjem.

4. Način uporabe


1. Najprije napušite posudu pomoću pumpe i zatvorite ventil za odvod vode na dnu posude. Posudu možete napuniti toplom vodom temperature ispod 50°C.

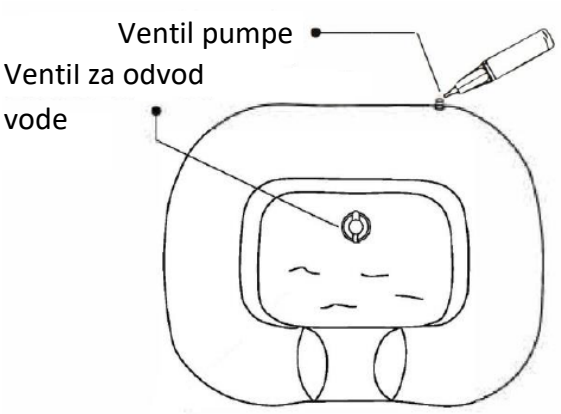

2. Spojite spremnik za vodu na tuš.

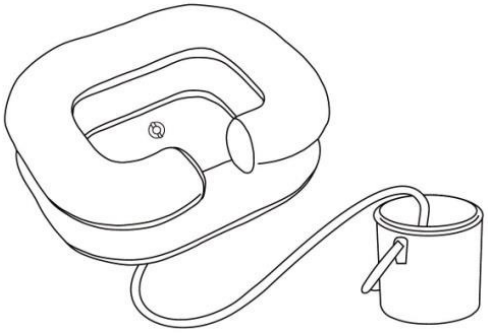

3. Napunjite spremnik toplom vodom temperature koja ne prelazi 50 °C. Spremnik se može objesiti na stalak ili zid pomoću nosača spremnika.

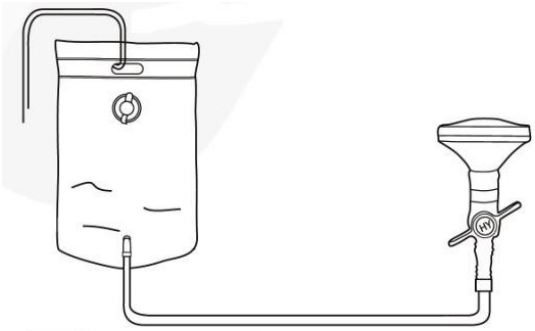


4. Pripremite kantu i stavite odvodno crijevo u nju. Kako biste osigurali ispravan odvod vode, provjerite da crijevo nije savijeno.

5. Postavite pacijentovu glavu u udubljenje za vrat i odvijte ventil tuša kako biste podesili protok vode.



6. Nakon pranja pacijentove glave otvorite ventil za odvod kako bi voda mogla otjecati u kantu kroz odvodno crijevo.

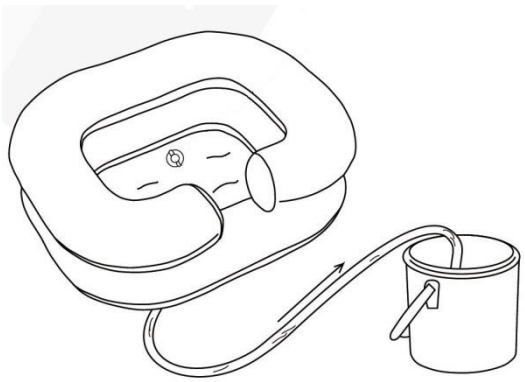

5. Tehnički podaci

Dimenzije posude	65 x 50 x 25 cm
Težina	0,8 kg
Volumen posude	10 litara

Volumen spremnika za vodu	8 litara

6. Napomene

Timago International Group ne snosi odgovornost za nepravilnu uporabu posude, nepoštivanje sigurnosnih propisa i zloupotrebu.

7. Uvjeti skladištenja i transporta

Proizvod ne smije biti izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti, vodi ili vlazi.

8. Jamstvene informacije

Svi proizvodi koje distribuira naša tvrtka pokriveni su jamstvom, čiji su uvjeti opisani u jamstvenom listu dostupnom na našoj web stranici. Molimo kontaktirajte trgovca od kojeg ste kupili proizvod. Imajte na umu da za potrebe jamstva trebate zadržati dokaz o kupnji (račun ili faktura).

9. Oznake

REF	Referentni broj		Proizvođač
LOT	LOT broj	UDI	UDI kod
SN	Serijski broj	MD	Medicinski uređaj
	Napomena		Molimo pročitajte upute
CE	Proizvođač je provjerio usklađenost s osnovnim zahtjevima za medicinske uređaje.		

Naša cjelokupna linija proizvoda dostupna je kod naših distributera. Saznajte više na: **www.timago.com**. Hvala što ste odabrali Timago!

Timago International Group
Ossowski Sp. k.
ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland
T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com

CE MD

10/2025(II)