UPUTE ZA UPORABU
Ortoza za koljeno
Šifra proizvoda: GenuStrap

1. Značajke

Ortoza za koljeno izrađena je od elastičnog materijala s izvrsnim svojstvima prozračnosti i uklanjanja vlage. U središnjem dijelu ortoze nalazi se otvor s pjenastim prstenom koji pravilno pozicionira ortozu i rasterećuje iver. Otvorena konstrukcija i tri kružne trake s čičak zatvaračima omogućuju udobno stavljanje i skidanje te precizno prilagođavanje korisniku.

2. Primjena

Ortoza za koljeno može se koristiti u preventivnom liječenju i u rehabilitaciji nakon ozljede kako bi se ograničio opseg pokreta u zglobu koljena i poboljšale funkcionalne aktivnosti. Ortoza rasterećuje iver, stabilizira koljeno i ograničava bočne pokrete u nestabilnom zglobu.

Indikacije za uporabu:

- Patološke promjene ivera
- Reumatoidne upale zgloba koljena
- Sindrom vrha ivera
- Iščašenje ivera
- Manje oštećenje ligamenata
- Preventivno liječenje prekomjernog opterećenja i ozljeda
- Reumatizam

3. Kontraindikacije:

Ne smije se koristiti u sljedećim slučajevima:

- Ogrebotine kože
- Ekcem
- Rane i druga oštećenja kože
- Nakon primjene zagrijavajućeg gela ili masti
- Pojedinačne kontraindikacije koje je utvrdio liječnik tijekom anamneze i fizičkog pregleda

4. Napomene

Timago International Group ne preuzima odgovornost za nepravilno korištenje

proizvoda, nepoštivanje sigurnosnih pravila i zlouporabu.

5. Upute za postavljanje

- Otpustite kružne trake i postavite ortozu na zglob koljena tako da je otvor s pjenastim prstenom smješten na središnjem dijelu koljena.
- Pričvrstite gornju i donju traku čičak zatvaračem uz tijelo. Zatim ponovite postupak s srednjom trakom.
- Provjerite ispravnost pričvršćenih traka i pravilan položaj ojačanja i prstena u stojećem položaju.

Upozorenje! Samo pravilno prilagođena ortoza jamči ispravnu stabilizaciju zgloba koljena i rasterećenje ivera.
Upozorenje! Dugotrajna uporaba može dovesti do smanjenog mišićnog tonusa i disfunkcije donjeg uda.

6. Tehnički podaci

VELIČINA	UNIVERZALNA VELIČINA

7. Održavanje

- Ručno pranje u mlakoj vodi. Ne centrifugirati, ne klorirati, ne glačati, ne izbjeljivati, ne čistiti kemijski, ne sušiti u sušilici.
- Provjerite da su čičak-trake pričvršćene kako ne bi oštetile materijal.
- Sušiti na sobnoj temperaturi, dalje od jakih izvora topline.

Upozorenje! Informacije o održavanju nalaze se na tekstilnoj etiketi.

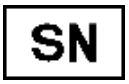
8. Uvjeti skladištenja i transporta

Proizvod ne smije biti izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti, vodi ili vlazi.

9. Jamstvene informacije

Svi proizvodi koje distribuira naša tvrtka pokriveni su jamstvom, čiji su uvjeti opisani u jamstvenom listu dostupnom na našoj web stranici. Molimo kontaktirajte trgovca od kojeg ste kupili proizvod. Imajte na umu da za potrebe jamstva trebate zadržati dokaz o kupnji (račun ili faktura).

10. Oznake

	Referentni broj		Proizvođač
	LOT broj		UDI kod
	Serijski broj		Medicinski uređaj
	Napomena		Molimo pročitajte upute
	Proizvođač je provjerio usklađenost s osnovnim zahtjevima za medicinske uređaje.		

Naša cjelokupna linija proizvoda dostupna je kod naših distributera. Saznajte više na: **www.timago.com**. Hvala što ste odabrali Timago!

Timago International Group
Ossowski Sp. k.
ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland
T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com

CE MD

10/2025(I)