Upute za uporabu
Podlakti štaka
Šifra proizvoda: JMC-C 2040-2046

1. Karakteristike
Podlakti štaka izrađena je s ergonomskom, izdržljivom ručkom i anodiziranom aluminijskom cijevi s visokokvalitetnim gumenim vrhom. Ergonomski oblik osmišljen je tako da pravilno odgovara kutu lakta, što omogućuje ravnomjernu raspodjelu pritiska na ručku.



Dijelovi štake:
- **A.** ručka
- **B.** narukvica
- **C.** podešavanje visine – blokirajući klin
- **D.** gumeni vrh

2. Primjena
Podlakti štaka pomoćno je pomagalo koje se koristi za povećanje površine oslonca kod pacijenata sa smanjenom pokretljivošću. Preporučuje se i pacijentima kojima je potrebna pomoć i potpora pri hodu te se može koristiti za reedukaciju hoda kao pomoć pri održavanju ravnoteže nakon ozljeda donjih ekstremiteta ili trupa.
Kontraindikacije: poremećaji koordinacije i ravnoteže, uznapredovale reumatske promjene, ozljede i disfunkcije gornjih udova koje mogu onemogućiti oslanjanje na štaku.

3. Podešavanje
Za podešavanje štake pritisnite metalni klin i odaberite odgovarajući položaj unutarnje cijevi. Zaključajte cijevi pomoću metalnog klina. Štaka se podešava u koracima od 2,5 cm.

- Za pravilnu duljinu štake, stanite uspravno i savijte ruku u laktu pod kutom od oko 20°.
- Štaka se treba individualno podesiti tako da je ručka u razini zgloba kuka, a narukvica u visini gornjeg dijela podlaktice.
- Prije uporabe provjerite je li štaka stabilna i izlazi li blokirajući klin u potpunosti kroz otvor za podešavanje.

- Preporučuje se istodobna uporaba dviju štaka.

NAPOMENA! U slučaju nedoumica o tehnici kretanja uz pomoć štaka, posavjetujte se s osobom koja ima odgovarajuće znanje ili kvalifikacije.

4. Tehnički podaci

Noga	aluminij s anodizacijom
Podešavanje visine	94-116 cm
Visina od tla do ručka	67-89 cm
Maksimalno opterećenje	115 kg
Težina	0,55 kg
Boje	JMC-C 2040 – bijelo-srebrna JMC-C 2041 – rozo-srebrna JMC-C 2042 – plavo-srebrna JMC-C 2043 – roza JMC-C 2044 – zelena JMC-C 2045 – plava JMC-C 2046 – svijetlo roza

5. Napomene

Timago International Group ne snosi odgovornost za nepravilnu uporabu proizvoda, nepoštivanje sigurnosnih propisa i zlouporabu.

6. Čišćenje i održavanje

- Štaku čistite samo vodom i blagim deterdžentima te je temeljito osušite.
- **Ne koristit**i: jaka sredstva za čišćenje, abrazivne tvari, izbjeljivač, benzin ni otapala (mogu uzrokovati oštećenje okvira, vidljive nedostatke i, posljedično, gubitak prava na jamstvo).
- Preporučuje se redovito provjeravati gumeni vrh. Istrošeni vrh odmah zamijenite.

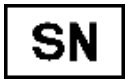
7. Uvjeti skladištenja i transporta

Proizvod ne smije biti izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti, vodi ili vlazi.

8. Jamstvene informacije

Svi proizvodi koje distribuira naša tvrtka pokriveni su jamstvom, čiji su uvjeti opisani u jamstvenom listu dostupnom na našoj web stranici. Molimo kontaktirajte trgovca od kojeg ste kupili proizvod. Imajte na umu da za potrebe jamstva trebate zadržati dokaz o kupnji (račun ili faktura).

9. Oznake

	Referentni broj		Proizvođač
	LOT broj		UDI kod
	Serijski broj		Medicinski uređaj
	Napomena		Molimo pročitajte upute
	Proizvođač je provjerio usklađenost s osnovnim zahtjevima za medicinske uređaje.		

Naša cjelokupna linija proizvoda dostupna je kod naših distributera. Saznajte više na: **www.timago.com**. Hvala što ste odabrali Timago!

Timago International Group
Ossowski Sp. k.
ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland
T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com

CE MD

08/2025(I)