
PRIRUČNIK ZA UPOTREBU
Hodalica na 4 kotača s kočnicama
Šifra proizvoda: JMC-C 3224

1. Karakteristike

na 4 kotača s kočnicama izrađena je od poprečno ojačanog aluminijskog okvira. Hodalica je opremljena čvrstim prednjim okretnim kotačima od 5'', stražnjim kotačima od 5'' i ručnim kočnicama. Čvrste ručke pružaju pravilnu stabilizaciju i udobnost korištenja. Visina hodalice se može prilagoditi visini korisnika. Kada je sklopljena, hodalica zauzima malo prostora, što olakšava pohranu i transport.

Elementi hodalice:

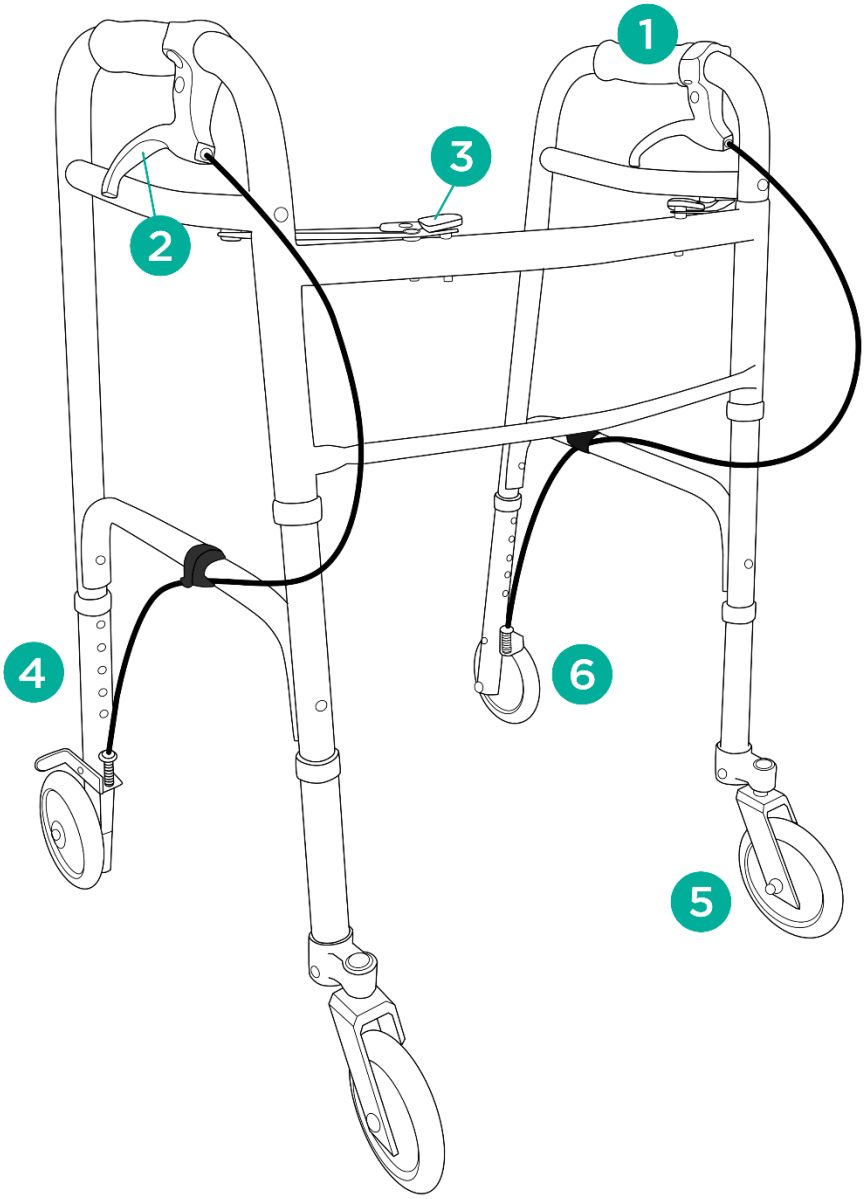

1. H i rukohvat
2. Ručna kočnica
3. Sustav preklapanja okvira
4. Podešavanje visine
5. Prednji 5” okretni kotač
6. Stražnji kotač od 5”.

2. Primjena

na 4 kotača s kočnicama potporna je oprema namijenjena osobama smanjene pokretljivosti kojima je potrebna stabilna podrška i pomoć pri hodu. Preporučuje se i starijim osobama kao pomoć pri održavanju ravnoteže, poboljšanju udobnosti hodanja i sigurnosti od pada. Korištenje hodalice ima pozitivan učinak na povratak aktivnosti kod osoba s problemima donjih udova i s problemima lokomocije ili vertikalizacije.

3. Montaža

Rasklapanje i preklapanje

- Kako biste rasklopili hodalicu, razdvojite strane do maksimalne pozicije dok se ručke ne zaključaju (karakteristični zvuk "klik").
- Kako biste sklopili hodalicu, pritisnite gumb sustava za preklapanje okvira koji se nalazi na vrhu poprečnog okvira i preklopite stranice prema unutra.

Podešavanje visine

- Visina treba biti postavljena tako da korisnik, koji se oslanja na rukohvate, stoji uspravno s ramenima u položaju odmora i blago savijenim laktovima. Nije preporučljivo visi na hodalici cijelom težinom tijela.
- Za podešavanje visine nogu, pritisnite zatik za zaključavanje, odaberite odgovarajuću visinu i zaključajte položaj sve četiri noge. Noge su podesive u koracima od 2,5 cm .

Bilješka! Igle moraju biti postavljene na istoj razini na svakoj nozi.

4. Tehnički podaci

Ukupna širina	64,5 cm
Unutarnja širina	46,5 cm
Ukupna dubina	52 cm

Podešavanje visine	82-92 cm
Težina	3,77 kg
Maksimalni kapacitet	158 kg

5. Bilješke

Timago International Group ne snosi odgovornost za nepravilno korištenje hodalice, nepridržavanje sigurnosnih propisa i zlouporabu.

6. Održavanje

- Očistite okvir hodalice vlažnom krpom koristeći samo vodu i blagi deterdžent. Temeljito osušite.
- **Ne koristite** za čišćenje: jaka sredstva za poliranje i abrazivna sredstva, jake deterdžente, izbjeljivač, benzin ili otapala (može uzrokovati oštećenje okvira, vidljive nedostatke i kao posljedicu - gubitak prava na jamstvo).
- Redovito uklanjajte prljavštinu s pokretnih dijelova hodalice (šarke, stezne vijke, brave).

7. Uvjeti skladištenja i transporta

Proizvod ne smije biti izložen izravnom djelovanju sunčeve svjetlosti, vode ili vlage.

8. Podaci o jamstvu

Proizvod je pokriven jamstvom čiji su uvjeti opisani u jamstvenom listu. Za potrebe jamstva, čuvajte svoj dokaz o kupnji (račun ili fakturu).

9. Oznake

REF	Referentni broj		Proizvođač
LOT	Broj serije	UDI	UDI kod

SN	Serijski broj	MD	Medicinski proizvod
	Pažnja		Proučite upute
CE	Ocijena proizvođača u pogledu sukladnosti s bitnim zahtjevima za medicinske proizvode.		

Kompletna ponuda dostupna je kod naših distributera.
Saznajte više na **www.timago.com.**
Hvala Vam što ste odabrali Timago!

Timago International Group
Ossowski Sp. k.
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com

CE MD
10/2025(II)