
PRIRUČNIK ZA UPOTREBU
Sigurnosna ograda za WC
Šifra proizvoda: JMC-C 5300KD

1. Karakteristike
Sigurnosna ograda WC školjke izrađena je od ultra laganog anodiziranog aluminija. Podesiv je po visini i širini kako bi zadovoljio potrebe korisnika.

Set uključuje:
- Bočne ograde (2 kom.)
- Spojna šipka (2 kom.)
- Noge podesive po visini s vrhovima protiv klizanja (2 kom.)
- Montažni element - konektor

Elementi sigurnosne ograde:

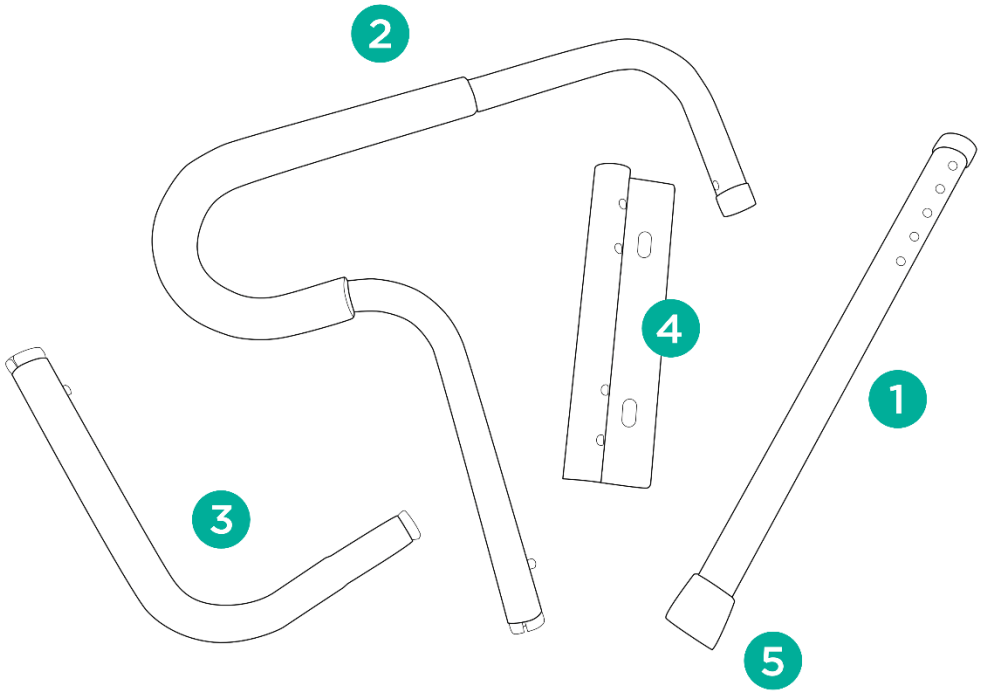


1. Noge podesive po visini (2 kom.)
2. Bočna ograda (2 kom.)
3. Spojna šipka (2 kom.)
4. Priključak
5. Vrh protiv klizanja

2. Primjena
Sigurnosna ograda za WC je pomoćna oprema koja pomaže korisniku u obavljanju fizioloških aktivnosti. Šila se preporučuje osobama s disfunkcijom i onima koji su izgubili sposobnost samostalnog sjedenja i ustajanja. Zahvaljujući podešavanju visine i širine, okvir se može prilagoditi veličini WC školjke.

3. Skupština
Korak 1. Uklonite WC dasku; odvrnuti pričvrsne vijke na WC školjci.

Korak 2. Sastavite okvir spajanjem dijelova pomoću zatika za zaključavanje (slika 1).

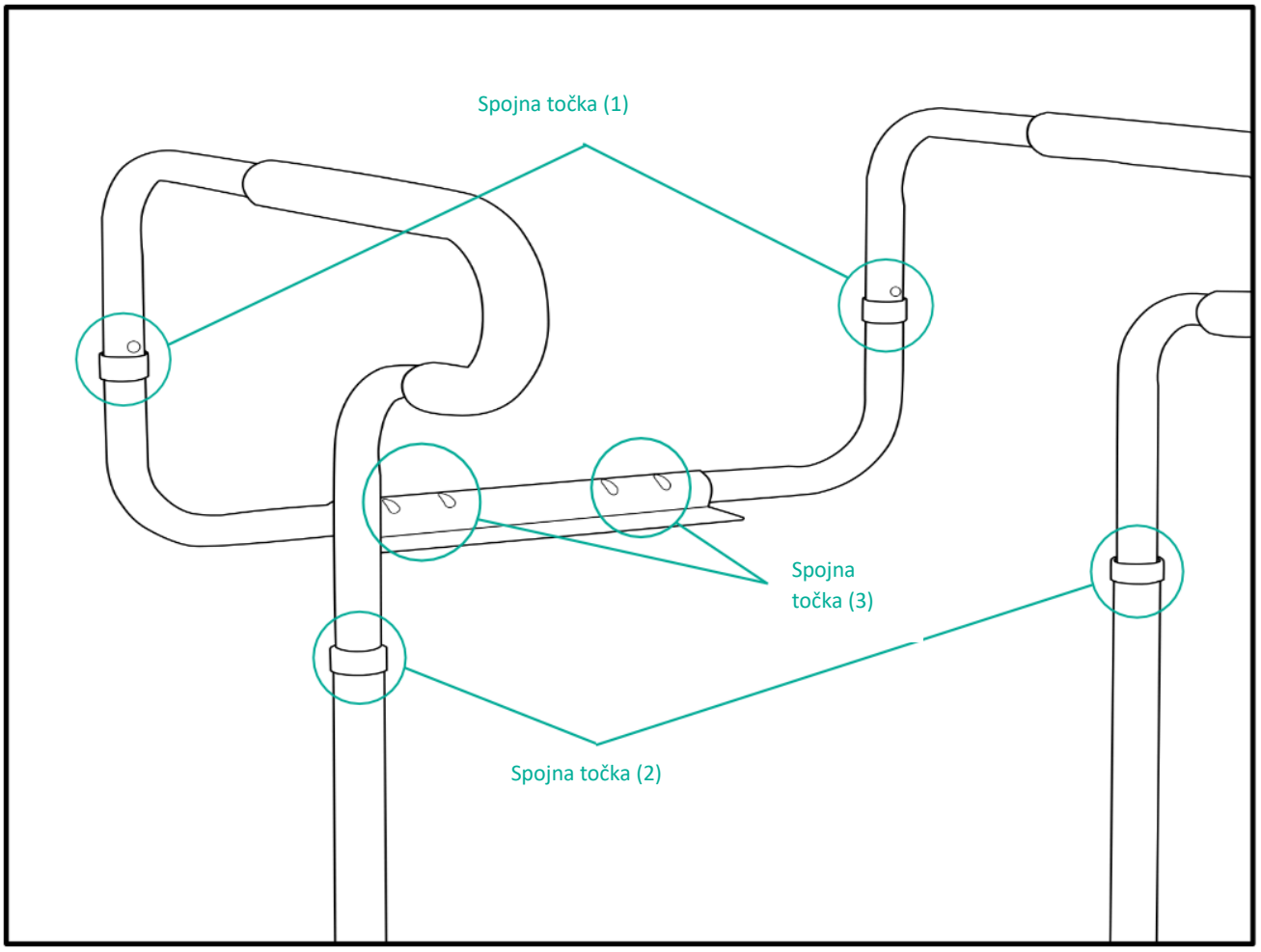

Slika 1

Korak 3. Postavite konektor na montažne otvore WC školjke.
Korak 4. Podesite visinu pritiskom na zatik koji se nalazi na nogama, odaberite odgovarajuću visinu i zaključajte položaj cijevi jedna u odnosu na drugu. Za podešavanje širine bočnih okvira koristite igle koje se nalaze na konektoru.
Bilješka! Igle moraju biti postavljene na istoj razini na svakoj nozi. Noge trebaju stajati stabilno na tlu.
Korak 5. Ponovno postavite WC dasku.

4. Tehnički podaci

Ukupna širina	57-65 cm
Ukupna dubina	47 cm
Visina	73-83 cm
Težina	1,4 kg

Maksimalni kapacitet	136 kg
Boja okvira	srebro

5. Bilješke

Timago International Group ne snosi odgovornost za nepravilno korištenje WC sigurnosne ograde, nepoštivanje sigurnosnih propisa i zlouporabu.

6. Održavanje

Recenzije

Sustavno provodite vizualni pregled svih spojnih elemenata (stezaljke, šarke) uključujući:

- stanje zatika za zaključavanje
- stabilnost i izgled okvira

Čišćenje

Redovito kontrolirajte tehničko stanje WC sigurnosne ograde:

- Redovito čistite šinu samo vodom i blagim deterdžentima. Temeljito osušite.
- Ne koristite za čišćenje: jaka sredstva za poliranje i deterdžente, abrazivna sredstva, izbjeljivač, benzin ili otapala (može uzrokovati oštećenje okvira, vidljive nedostatke i kao posljedicu - gubitak prava na jamstvo).

7. Uvjeti skladištenja i transporta

Proizvod ne smije biti izložen izravnom djelovanju sunčeve svjetlosti, vode ili vlage.

8. Podaci o jamstvu

Proizvod je pokriven jamstvom čiji su uvjeti opisani u jamstvenom listu.
Za potrebe jamstva, čuvajte svoj dokaz o kupnji (račun ili fakturu).

9. Oznake

REF	Referentni broj		Proizvođač
LOT	Broj serije		Datum proizvodnje

SN	Serijski broj	MD	Medicinski proizvod
	Pažnja		Proučite upute
CE	Ocijena proizvođača u pogledu sukladnosti s bitnim zahtjevima za medicinske proizvode.		

Kompletna ponuda dostupna je kod naših distributera.
Saznajte više na **www.timago.com.**
Hvala Vam što ste odabrali Timago!

Timago International Group
Ossowski Sp. k.
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com

CE MD

05/2025(I)