
UPUTE ZA UPORABU
Naslon za leđa
Šifra proizvoda: JMC-C 7000

1. Značajke

Naslon za leđa izrađen je od čeličnog okvira s praškastim premazom. Ima postolje s čegrtaljkom i naslon izrađen od prozračnog platnenog materijala, uz dodatni jastuk za veću udobnost tijekom ležanja. Zahvaljujući mehanizmu s čegrtaljkom, naslon se može prilagoditi individualnim potrebama pacijenta.

Elementi naslona za leđa:

- **A.** mehanizam s čegrtaljkom
- **B.** naslon za leđa
- **C.** jastuk

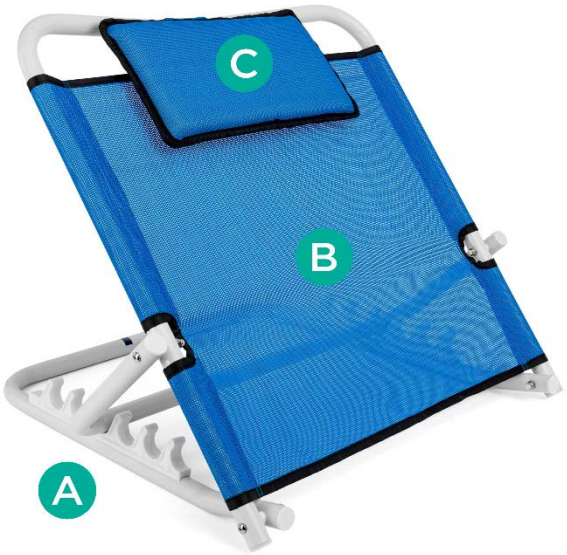

2. Primjena

Naslon za leđa je pomoćna oprema namijenjena pacijentima sa smanjenom pokretljivošću koji trajno borave u ležećem položaju, što onemogućuje ili otežava samostalno obavljanje svakodnevnih aktivnosti. Naslon pomaže održavati polusjedeći položaj bez potrebe za potporom druge osobe. Također se koristi za postupno podizanje pacijenta u uspravni položaj, čime se kardiovaskularni sustav postupno privikava na sjedeći položaj. Naslon za leđa preporučuje se za uporabu kod kuće i u bolnicama.

3. Podešavanje

Naslon za leđa može se podešavati u rasponu od 25 do 27 cm.

4. Tehnički podaci

Ukupna širina	54,5 cm
Unutarnja širina	50 cm
Ukupna dubina	50 cm

Podešavanje kuta nagiba	25-57 cm
Težina	2,7 kg
Maksimalna nosivost	100 kg
Boja okvira	bijela

5. Napomene

Timago International Group ne preuzima odgovornost za nepravilno korištenje proizvoda, nepoštivanje sigurnosnih propisa i zlouporabu.

6. Čišćenje i održavanje

Pregled

Provedite vizualni pregled svih spojnih elemenata (stezaljki, šarki) naslona za leđa najmanje jednom svaka tri mjeseca, uključujući:

- stanje mehanizma s čegrtaljkom
- stabilnost i izgled okvira

Čišćenje

Redovito provjeravajte tehničko stanje naslona za leđa:

- Okvir čistite samo vodom i blagim deterdžentima. Dobro osušite.
- Nemojte koristiti jaka sredstva za poliranje i deterdžente, abrazivna sredstva, izbjeljivače, benzin ili otapala (mogu uzrokovati oštećenje okvira, vidljive nedostatke i posljedično gubitak prava na jamstvo).

7. Uvjeti skladištenja i transporta

Proizvod ne smije biti izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti, vodi ili vlazi.

8. Jamstvene informacije

Svi proizvodi koje distribuira naša tvrtka pokriveni su jamstvom, čiji su uvjeti opisani u jamstvenom listu dostupnom na našoj web stranici. Molimo kontaktirajte trgovca od kojeg ste kupili proizvod. Imajte na umu da za potrebe jamstva trebate zadržati dokaz o kupnji (račun ili faktura).

9. Oznake

REF	Referentni broj		Proizvođač

LOT	LOT broj	UDI	UDI kod
SN	Serijski broj	MD	Medicinski uređaj
	Napomena		Molimo pročitajte upute
CE	Proizvođač je provjerio usklađenost s osnovnim zahtjevima za medicinske uređaje.		

Naša cjelokupna linija proizvoda dostupna je kod naših distributera. Saznajte više na: **www.timago.com**. Hvala što ste odabrali Timago!

Timago International Group
Ossowski Sp. k.
ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland
T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com

CE MD

10/2025(I)