
UPUTE ZA UPORABU
Čelična invalidska kolica
Šifra proizvoda: K7

1. Karakteristike

Invalidska kolica izrađena su od čeličnog okvira obloženog prahom. Posjeduje izdržljivo sjedalo izrađeno od plastičnog materijala otpornog na prljavštinu i vodu. Okvir invalidskih kolica posebno je ojačan kako bi se osigurao maksimalni kapacitet do 225 kg. Zahvaljujući kratkim rastavljivim naslonima za ruke, moguće je dovoziti se što bliže stolu. Invalidska kolica se isporučuju sa plastičnim stražnjim kotačima (24'') i čvrstim gumenim prednjim gumama (8'').

Set uključuje:

- Okvir sa sjedalom
- Oslonci za noge s pločama za noge
- Ključ za montažu

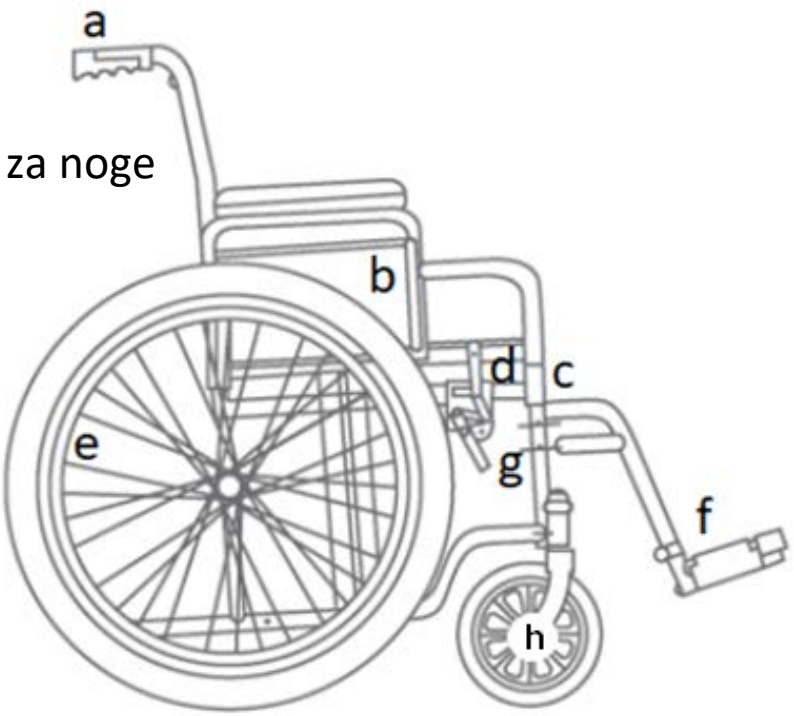

Elementi invalidskih kolica:

a. Stisak ruke
b. Naslon za ruke
c. Zatik za zaključavanje
d. Blokada kotača
e. Handrim
f. Oslonac za noge
g. Montažni klin oslonca za noge
h. Podešavanje težišta

2. Primjena

Invalidska kolica namijenjena su osobama koje imaju problema s kretanjem bez pomoći te osobama s disfunkcijama i smanjenom pokretljivošću. Ova samohodna invalidska kolica može gurati i osoba u pratnji. Pogodan je za unutarnju i vanjsku upotrebu.

3. Skupština

Korak 1. Rasklapanje invalidskih kolica

Postavite invalidska kolica na tlo. Uhvatite ručke koje se nalaze na stražnjoj strani naslona i rasklopite invalidska kolica. Zatim pritisnite prednji i stražnji rub sjedala tako da svi elementi pristaju.

Bilješka! Nemojte snažno povlačiti naslone za ruke i poprečnu stabilizaciju.

Korak 2. Montaža oslonaca za noge

Sastavite desni i lijevi oslonac za noge u prednjem dijelu okvira tako da ih postavite na dva klina i okrenete ih prema unutra dok se ne zabrave. Pričvrstite zaštitne trake.

Korak 3. Sastavljanje i podešavanje nožnih ploča

Kako biste podesili visinu oslonca za noge, odvrnite krilni vijak i zategnite zatik za zaključavanje. Produžite ili skratite duljinu oslonca za noge povlačenjem njegovog donjeg dijela dok zatik za zaključavanje ne klikne. Nakon postavljanja odgovarajuće visine, zategnite krilni vijak. Treba ostaviti odgovarajući prostor između podnožja i tla jer prenisko postavljeni podnožci mogu uzrokovati poteškoće u svladavanju prepreka poput rubnjaka. Namjestite podnožja tako da kut između trupa i bedara bude 90^{0} (korisniku je tada osiguran optimalan sjedeći položaj).

Po završetku gore navedenih aktivnosti, invalidska kolica su spremna za korištenje.

PREKLOPNI

- Presavijte desnu i lijevu podlogu tako da uhvatite njen donji dio i povučete je prema gore. Zatim zgrabite i povucite polugu za zaključavanje, istovremeno okrećući oslonac za noge prema van, i uklonite oslonac za noge iz otvora za montažu.
- Povucite sjedalo prema gore držeći prednji i stražnji rub u sredini, tako da okvir iskoči iz spojnih elemenata.

FUNKCIJA DEMONTAŽE NASLONCA ZA RUKE

- Kako biste rastavili naslon za ruku, pritisnite zatik za zaključavanje koji se nalazi na prednjem dijelu naslona za ruku i uklonite cijeli naslon za ruku iz otvora za montažu.
- Kako biste ponovno sastavili naslon za ruku, stavite stražnji dio naslona za ruku u otvor za montažu i zatvorite naslon za ruku dok zatik za zaključavanje ne klikne.

BRAVE KOTAČA

Invalidska kolica su bila opremljena bravama za blokiranje kotača.

- Za zaključavanje kotača, gurnite polugu za zaključavanje kotača prema naprijed dok se kotač potpuno ne blokira (odvojeno za lijevi i desni kotač). Imajte na umu da blokada kotača služi samo za zaključavanje kotača kada su invalidska kolica potpuno zaustavljena.

PODEŠAVANJE BRAVA KOTAČA

Ispravno zaključavanje blokade kotača ovisi o njegovoj prilagodbi i položaju. Ručka blokade kotača treba biti postavljena tako da papučica blokade kotača čvrsto blokira kotač i da se poluga ne suočava s pretjeranim otporom.

- U slučaju prevelikog otpora, lagano povucite ručicu prema naprijed tako da odvrnete vijak za zaključavanje koji se nalazi s druge strane blokade kotača (s unutarnje strane kolica). Postavite papučicu za zaključavanje kotača u takav položaj da blokada kotača lako blokira kotač bez otpora.
- Ako papučica za zaključavanje kotača ne dodiruje ili ne blokira kotač u dovoljnoj mjeri, slijedite gornje upute pomicanjem ručke u suprotnom smjeru.

PRILAGODBA ZA PACIJENTA NAKON AMPUTACIJE U PODRUČJU DONJIH UDOVA

Bilješka! Za profesionalnu prilagodbu pitajte svog trgovca ili drugu osobu koja ima odgovarajuće znanje i kvalifikacije. Nemojte sami podešavati kut nagiba sjedala.

- Za podešavanje težišta, odvrnite pričvrsne vijke na desnom i lijevom kotaču. Zatim namjestite nagib sjedala pomicanjem pričvrsne osi kotača prema gore ili dolje, jednako u oba kotača.
- Nagib sjedala treba postaviti tako da korisnik ne sklizne s kolica i da može slobodno koristiti rukohvate.

4. Tehnički podaci

Ukupna širina	80 cm - 85 cm
Unutarnja širina u veličini 56 cm Unutarnja širina u veličini 61 cm	57 cm 62 cm
Ukupna dubina	123 cm
Visina sjedala od tla	52 cm
Ukupna visina	93 cm
Dimenzije sjedala	56, 61 x 47 cm
Težina: veličina 56 cm Težina: veličina 61 cm	23,5 kg 24,5 kg
Maksimalni kapacitet	225 kg
Sklopljena širina	45 cm
Boja okvira	crno-srebrna

5. Bilješke

Timago International Group ne snosi odgovornost za nepravilno kretanje u invalidskim kolicima, nepridržavanje sigurnosnih propisa i zlouporabu.

6. Čišćenje i održavanje

Redovito održavajte komponente invalidskih kolica:

- Presvlake i jastuk se mogu čistiti vlažnom (ne mokrom) krpom i hladnom ili toplom vodom, bez upotrebe deterdženata. Teške mrlje možete očistiti spužvom. Ne natapajte presvlake previše. Sušiti dalje od izvora topline.
- Plastične elemente treba čistiti vlažnom krpom uz eventualno korištenje odgovarajućih deterdženata za plastične elemente. U tom slučaju slijedite upute proizvođača i sigurnosne mjere.


7. Uvjeti skladištenja i transporta

Uređaj ne smije biti izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti, vodi ili vlazi.

8. Informacije o jamstvu

Svi proizvodi koje distribuira naša tvrtka pokriveni su jamstvom, čiji su uvjeti opisani u jamstvenom listu dostupnom na našoj web stranici. Obratite se prodavaču od kojeg ste kupili proizvod. Imajte na umu da u svrhu jamstva treba sačuvati dokaz o kupnji (račun ili račun).

9. Oznake

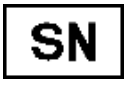	Referentni broj		Proizvođač
	Broj serije		Datum proizvodnje
	Serijski broj		Medicinski proizvod
	Pozor		Pročitajte korisničke upute
	Proizvođač je izvršio ocjenu usklađenosti s glavnim zahtjevima vezanim za medicinske proizvode.		

Cijela ponuda je dostupna za Vas kod naših distributera.
Saznajte više na **www.timago.com**
Hvala što ste odabrali Timago!



Timago International Group Ossowski Sp.k.
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Poland

Tlf.: +48 33 499 50 00
Telefax: +48 33 499 50 11
E-mail: info@timago.com

CE MD

03/2025(I)