
PRIRUČNIK ZA UPOTREBU
Aluminijski rolator s 4 kotača
Šifra proizvoda: LORENZA

1. Karakteristike

Rolator na četiri kotača izrađen je od visokokvalitetnog aluminija. Ima čvrste prednje kotače promjera 10'' i stražnje 7,5'', ručke podesive po visini s anatomskim rukohvatima, kočnice s parkirnom funkcijom, sjedalo s naslonom i torbu. Konstrukcija se temelji na poprečnom okviru i ovalnom presjeku cijevi, zahvaljujući čemu je značajno povećana otpornost na aksijalni pritisak. Skrivena sajla kočnice pruža estetski ugodan izgled.

Set uključuje : okvir sa sjedalom, prednje i stražnje kotače, naslon za leđa, torbu za kupovinu.

Elementi rolatora:

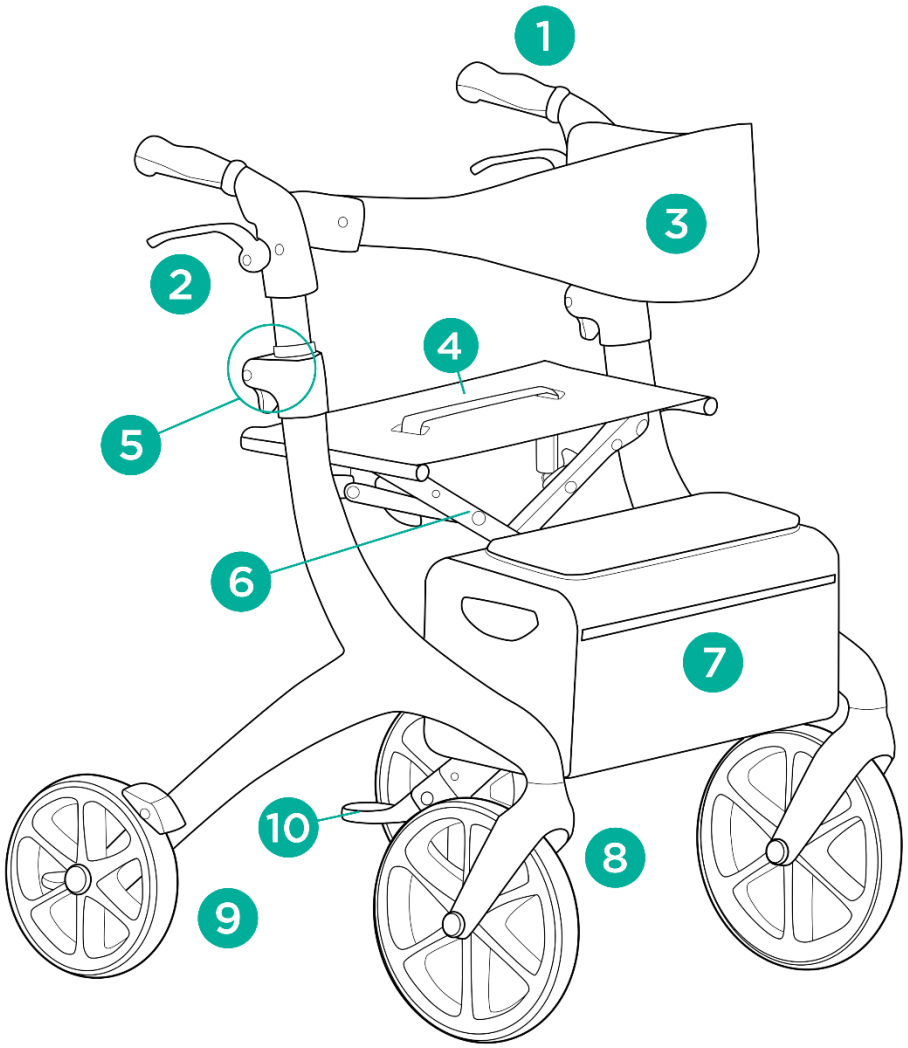

1. Rukohvat
2. Kočnica s ručkom za parkiranje
3. Naslon za leđa
4. Sjedalo
5. Zaključavanje za podešavanje visine
6. Prečka
7. torba
8. Prednji kotač od 10”.
9. Stražnji kotač od 7,5”.
10. Potporna pedala / penjač za rubnjake

2. Primjena

Rolator je namijenjen osobama smanjene pokretljivosti kojima je potrebna stabilna potpora i pomoć pri hodu. Preporučuje se i starijim osobama kao pomoć pri održavanju ravnoteže radi poboljšanja udobnosti hodanja i sigurnosti od pada. Korištenje hodalice ima pozitivan učinak na povratak aktivnosti osoba s problemima lokomocije i naginjanja u uspravni položaj. Jamči bolju stabilizaciju, potporu i sigurnost tijekom hodanja.

3. Sastavljanje

Rasklapanje

- Kako biste rasklopili rolator, uhvatite obje ručke i povucite ih prema van. Lagano pritisnite sjedalo s obje strane kako biste potpuno rasklopili rolator (karakterističnizvuk "klik").

Preklapanje

- Za sklapanje rotora povucite sjedalo prema gore.
- Uvjerite se da je rolator pravilno sklopljen.

Podešavanje visine rukohvata

Za podešavanje visine ručke:

- Pritisnite kočnicu prema dolje kako biste aktivirali parkirnu kočnicu i imobilizirali rolator.
- Podignite stezaljku za podešavanje.
- Podesite visinu ručke.
- Zategnite stezaljku kako biste zaključali podešenu visinu ručki. Povucite ručku gore-dolje nekoliko puta kako biste provjerili je li pravilno zaključana.
- Podesite visinu druge ručke na sličan način.

BILJEŠKA! Oba rukohvata trebaju biti postavljena na istoj visini.

Funkcija kočnice

- Kako biste zaustavili rolator, povucite ručicu kočnice prema gore, a zatim držite.

- Kada nije u pokretu ili ne koristite sjedalo, zaključajte parkirnu kočnicu parkirnom stezaljkom povlačenjem ručke kočnice prema dolje.
- Za otpuštanje parkirne kočnice, povucite ručku prema gore **.**

Skidanje i pričvršćivanje naslona i torbe

Torba i naslon se mogu demontirati.

- Za uklanjanje naslona pritisnite tipku koja se nalazi na gornjem, unutarnjem dijelu okvira i povucite naslon prema gore.
- Za uklanjanje vrećice, povucite je prema gore iz otvora za montažu koji se nalaze na donjem, unutarnjem dijelu okvira.
- Za pričvršćivanje torbe i naslona, ponovite korake unatrag.

Potporna pedala

- Papučica za potporu koristi se za pomoć u svladavanju prepreka, poput rubnjaka. Pritisnite papučicu nogom kako biste podigli rolator.

4. Tehnički podaci

Dimenzije nakon sklapanja	70 x 15 x 86,5 cm
Ukupna širina nakon rasklapanja	58 cm
Ukupna duljina	87 cm
Širina sjedala	45 cm
Visina sjedala od tla	55 cm
Podešavanje visine ručke	86,5-96,5 cm
Težina rolatora	7,50 kg
Maksimalni kapacitet	136 kg
Boja okvira	tamnoplava

5. Napomene i preporuke

Timago International Group ne snosi odgovornost za nepravilno

korištenje rolatora, nepoštivanje sigurnosnih pravila kao i za neprikladnu, protivnu namjeni uporabu.

6. Održavanje

- Očistite okvir vlažnom krpom i temeljito osušite.
- Nemojte koristiti jaka sredstva za poliranje zbog opasnosti od oštećenja zaštitnih premaza.
- Redovito čistite od prljavštine pokretne dijelove rolatora (šarke, stezne vijke, brave).


7. Uvjeti skladištenja i transporta

Proizvod ne smije biti izložen izravnom djelovanju sunčeve svjetlosti, vode ili vlage.

8. Podaci o jamstvu

Proizvod je pokriven jamstvom čiji su uvjeti opisani u jamstvenom listu. Za potrebe jamstva, čuvajte svoj dokaz o kupnji (račun ili fakturu).

9. Oznake

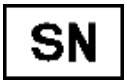	Referentni broj		Proizvođač
	Broj serije		Datum proizvodnje
	Serijski broj		Medicinski proizvod
	Pažnja		Proučite upute
	Ocijena proizvođača u pogledu sukladnosti s bitnim zahtjevima za medicinske proizvode.		

Kompletna ponuda dostupna je kod naših distributera.
Saznajte više na **www.timago.com.**
Hvala Vam što ste odabrali Timago!

Timago International Group
Ossowski Sp. k.
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com

CE MD

03/2025(I)