
PRIRUČNIK ZA UPOTREBU
Barijatrijska komoda stolica
Šifra proizvoda: MAXIMUS

1. Karakteristike
Barijatrijska stolica je izrađena od čeličnog okvira presvučenog prahom. Ima noge podesive visine s gumenim vrhovima protiv klizanja. Stolica je opremljena WC daskom i plastičnom WC kantom koje se lako sastavljaju. Može se prilagoditi potrebama pacijenta zahvaljujući podešavanju visine. Nasloni za ruke pružaju stabilnost i sigurnost.

Set uključuje: glavni okvir sa bočni nasloni za ruke i vrhovi protiv klizanja, cijev naslona, prednja cijev, t uljno sjedalo i kanta s poklopcem.

Elementi stolice komoda:

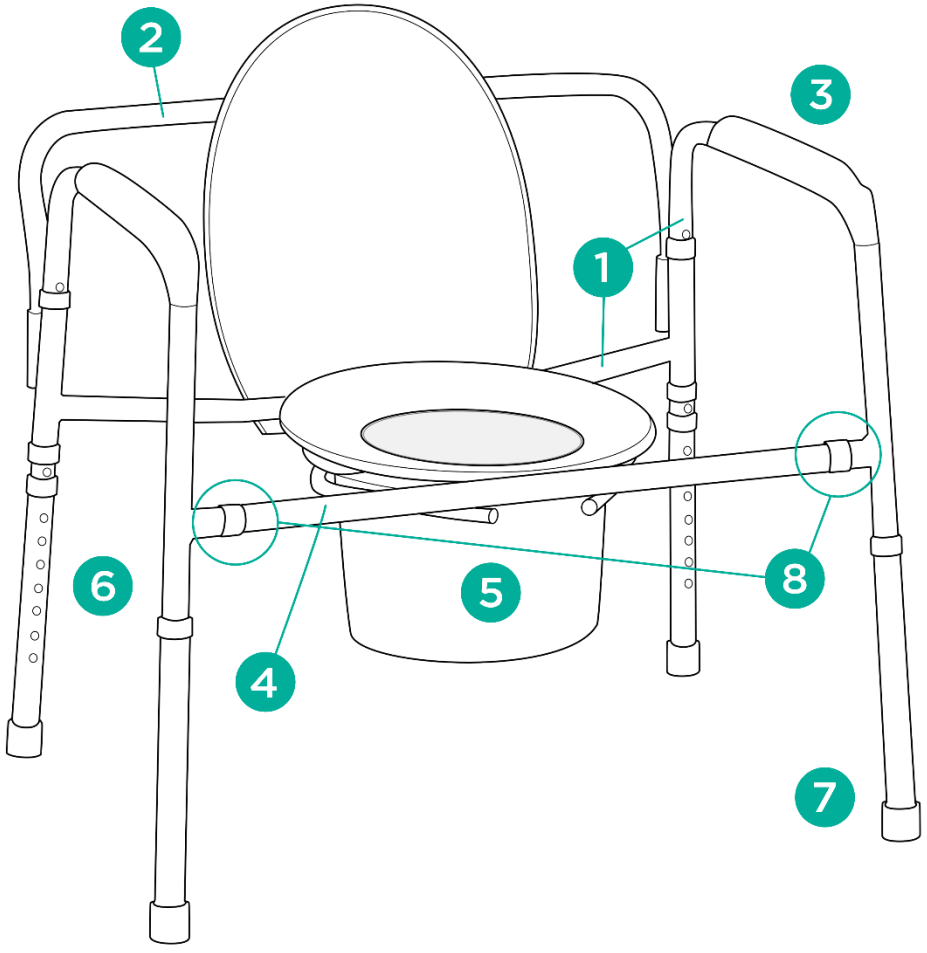

1. glavni okvir s bočnim dijelovima
2. cijev naslona
3. naslon za ruke
4. prednja cijev
5. WC kanta
6. podešavanje visine
7. vrh protiv klizanja
8. spojne točke

2. Primjena
Stolica komoda je pomoćna oprema koja korisniku pomaže u obavljanju higijenskih radnji. Stolica se preporučuje osobama s disfunkcijom i smanjenom pokretljivošću koje imaju problema s hodanjem bez pomoći te osobama koje su

izgubile sposobnost samostalnog sjedenja i ustajanja. Stolica funkcionira kao WC školjka zahvaljujući WC kanti koja se nalazi ispod sjedala. Stolica olakšava obavljanje fizioloških aktivnosti i brigu o korisniku.

3. Skupština

Rasklapanje i preklapanje

Korak 1. Otklopite bočne dijelove okvira. Provjerite jesu li otvori za montažu cijevi naslona na stražnjoj strani.
Korak 2. Pričvrstite prednju cijev u otvore za montažu (spojne točke) koji se nalaze na prednjoj strani bočnih dijelova. Upotrijebite iglu za zaključavanje da ih osigurate.
Korak 3. Pričvrstite cijev naslona u otvore na stražnjoj strani okvira.
Korak 4. Sastavite WC sjedalo na donju šinu glavnog okvira dok plastične ručke ne kliknu.
Korak 5. Podignite sjedalo i montirajte WC školjku.

Podešavanje visine

- Kako biste podesili visinu stolca, pritisnite metalnu iglu, odaberite odgovarajuću visinu noge, a zatim zaključajte položaj nogu jedna u odnosu na drugu iglom za zaključavanje. Noge su podesive u koracima od 2,5 cm.

Bilješka! Igle moraju biti postavljene na istoj razini na svakoj nozi. Noge uvijek moraju biti stabilno na podu.

4. Tehnički podaci

Ukupna širina	77 cm
Unutarnja širina	67 cm
Ukupna dubina	54 cm
Visina sjedala od tla	42,5-58 cm
Ukupna visina od tla	66-81,5 cm
Dimenzije sjedala	42 x 35 cm
Težina stolice	9,1 kg
Maksimalni kapacitet	294 kg
Boja okvira	siva

5. Bilješke

Timago International Group ne snosi odgovornost za nepravilno korištenje stolice, nepridržavanje sigurnosnih propisa i zlouporabu.

6. Održavanje

Redovito održavati tehničko stanje stolice:

- Redovito čistite stolicu samo vodom i blagim deterdžentima. Temeljito osušite.
- Ne koristite za čišćenje: jaka sredstva za poliranje i deterdžente, abrazivna sredstva za izbjeljivanje, benzin ili otapala (može uzrokovati oštećenje okvira, vidljive nedostatke i kao posljedicu - gubitak prava na jamstvo).
- Ispraznite i dezinficirajte WC kantu i WC školjku nakon svake uporabe. Koristite sredstva za čišćenje WC-a prema uputama proizvođača.


7. Uvjeti skladištenja i transporta

Proizvod ne smije biti izložen izravnom djelovanju sunčeve svjetlosti, vode ili vlage.

8. Podaci o jamstvu

Proizvod je pokriven jamstvom čiji su uvjeti opisani u jamstvenom listu.
Za potrebe jamstva, čuvajte svoj dokaz o kupnji (račun ili fakturu).

9. Oznake

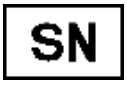	Referentni broj		Proizvođač
	Broj serije		Datum proizvodnje
	Serijski broj		Medicinski proizvod
	Pažnja		Proučite upute
	Ocijena proizvođača u pogledu sukladnosti s bitnim zahtjevima za medicinske proizvode.		

Kompletna ponuda dostupna je kod naših distributera.
Saznajte više na **www.timago.com.**
Hvala Vam što ste odabrali Timago!

Timago International Group
Ossowski Sp. k.
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com

03/2025(I)