

Maya

ELEKTRIČNA INVALIDSKA KOLICA

KORISNIČKE UPUTE

1. OPIS PROIZVODA I PRIMJENA

Električna invalidska kolica namijenjena su osobama s poteškoćama u kretanju, pomažući osobama s invaliditetom u njihovim svakodnevnim zadacima. Može zamijeniti standardna invalidska kolica.

Električna invalidska kolica prikladna su za pacijente sa:

- s invaliditetom, koji imaju problema s kretanjem bez pomoći.
- disfunkcije i smanjeno kretanje.
- bolesti srca i kardiovaskularnog sustava.
- slabljenje tijela zbog starije dobi.

2. SIGURNOSNE INFORMACIJE

- Pročitajte upute prije korištenja invalidskih kolica.
- Ne koristite invalidska kolica prije nego što ih rasklopite i sastavite.
- Osobama s invaliditetom, jer ih onemogućuje samostalno korištenje, ne preporučuje se korištenje invalidskih kolica.
- Maksimalni kapacitet ne smije premašiti 115 kg.
- Invalidska kolica može koristiti samo jedna osoba istovremeno.
- Tijekom vožnje preporuča se držati noge na osloncima za noge, a podlaktice na naslonima za ruke.
- Prije vožnje provjerite razinu baterije na upravljačkoj ploči.
- Električna invalidska kolica treba koristiti samo na ravnoj površini ili niskim visinama. Ne vozite po površini koja je nagnuta više od 6 stupnjeva.
- Ne vozite invalidska kolica maksimalnom brzinom dok vozite uzbrdo ili nizbrdo.
- Nemojte voziti invalidska kolica na mekim i skliskim površinama kao što su blato, pijesak itd.
- Ne vozite invalidska kolica bočno na visoko uzdignutoj površini
- Ne stavljajte dodatni teret na invalidska kolica u obliku kamp prikolice i sl.
- Ne radite nikakve popravke ili prerade na konstrukciji invalidskih kolica samostalno. Koristite samo originalne rezervne dijelove proizvođača.
- Nemojte ustajati ili sjesti na invalidska kolica dok je upravljački modul uključen.
- Nemojte koristiti invalidska kolica bez kotača protiv prevrtanja.

- Nemojte se penjati ili silaziti s invalidskih kolica bez pomoći treće osobe kada je ručni način rada uključen.
- Nemojte se naginjati naprijed kako biste zgrabili predmete koji leže ispred, sa strane ili iza invalidskih kolica. To može rezultirati prevrtanjem invalidskih kolica.
- Nemojte stajati na osloncu za noge. To može rezultirati prevrtanjem invalidskih kolica.
- Izbjegavajte brze promjene smjera tijekom vožnje na uzvisinama.
- Smanjite brzinu invalidskih kolica tijekom vožnje nizbrdo ili skretanja.
- Provjerite jesu li kotači pravilno montirani/sastavljeni.
- Nemojte raditi nagle pokrete dok koristite joystick. Umjesto toga koristite nježne pokrete.
- Tijekom kiše skladištenje invalidskih kolica u natkrivenoj zgradi.
- Prije uključivanja invalidskih kolica provjerite je li poluga na desnom i lijevom motoru postavljena na električni način rada.
- Ni u kojem slučaju ne pristupajte mjestima s vodoravnim prazninama.
- Izvadite bateriju ako ne planirate koristiti invalidska kolica duže vrijeme.
- Ne koristite invalidska kolica na cesti. To bi moglo dovesti do prometne nesreće.
- Nemojte skladištiti invalidska kolica na mjestima s visokim temperaturama i vlagom.

INCIDENTI S MEDICINSKIM UREĐAJIMA

Svaki ozbiljni incident koji uključuje medicinski proizvod mora se prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države članice Europske unije u kojoj korisnik ili pacijent boravi.

3. OPĆI PODACI



Nemojte upravljati invalidskim kolicima bez prethodnog čitanja i razumijevanja uputa za upotrebu. Ručna uputa pruža korisniku potrebne informacije o sigurnosnim propisima, održavanju i radu vozila.



NEMOJTE sami mijenjati, dodavati, uklanjati ili rastavljati bilo koji dio invalidskih kolica niti onemogućavati funkcije. Obratite se ovlaštenom servisu uvoznika za popravke.

SIGURNOSNA PROVJERA PRIJE VOŽNJE

Svaki put prije korištenja invalidskih kolica provjerite potrošne dijelove kao što su kočnice, kotači itd.

OGRANIČENJA TEŽINE



NEMOJTE prekoračiti težinski kapacitet (115 kg) invalidskih kolica jer to može dovesti do oštećenja koja nisu pokrivena jamstvom.

NEMOJTE voziti druge putnike u invalidskim kolicima, to može dovesti do nestabilnosti invalidskih kolica i/ili nesreće.

VOŽNJA NA KOSINIMA



NEMOJTE voziti invalidska kolica preko uzbrdice ili dijagonalno uzbrdo ili nizbrdo.

NEMOJTE voziti uz ili niz potencijalno opasne uzbrdice (npr. područja prekrivena snijegom, ledom, pokošenom travom ili mokrim lišćem).

VOŽNJA PO RAZLIČITIM PODLOGAMA

Konstrukcija invalidskih kolica omogućuje vožnju i po vanjskim i po unutarnjim vrstama podloga (beton, asfalt, pod i sl.). Međutim, važno je zapamtiti nekoliko pravila kako biste izbjegli nepotreban rizik od oštećenja invalidskih kolica.

- Smanjite brzinu tijekom vožnje na neravnim površinama,
- Izbjegavajte vožnju po travi, blatu ili slabo nabijenom šljunku ili pijesku,
- NEMOJTE voziti na skliskim površinama kao što je led jer to može rezultirati nesrećom,
- NEMOJTE voziti po površinama koje su nestabilne,
- Izbjegavajte rupe i jarke,
- Nemojte voziti javnim cestama jer to može rezultirati prometnom nesrećom. Vozite samo nogostupima ili posebnim stazama za bicikliste.

STUBIŠTA I POKRETNE STUPNJE

Invalidska kolica nisu dizajnirana za vožnju uz ili niz stepenice ili pokretne stepenice. Može se transportirati dizalom.

MJERE OPREZA U VEZI S VREMENSKIM UVJETIMA

Izbjegavajte izlaganje invalidskih kolica lošim vremenskim uvjetima kao što su ekstremna vrućina ili hladnoća, kiša ili snijeg. Ako se tijekom vožnje nađete u takvim uvjetima, potražite sklonište i ostavite invalidska kolica da se potpuno osuše prije nego što nastavite ili prije nego što ih spremite ili napunite.



Temperatura površine može se povećati kada je izložena vanjskom izvoru topline (npr. sunčeva svjetlost).

ZAŠTITA BATERIJE



Bateriju uvijek zaštitite od smrzavanja. NEMOJTE puniti bateriju koja je bila zamrznuta. Ako je baterija oštećena ili napukla, odmah kontaktirajte servis uvoznika i nemojte koristiti bateriju.



NEMOJTE mijenjati veze strujnog kruga. Bilo kakvi **samostalni popravci su zabranjeni i mogu dovesti do oštećenja koja nisu pokrivena jamstvom.**

SIMBOL	ZNAČENJE
	Sigurnosna klasifikacija tipa B
	Upozorenje! Označava potencijalno opasno stanje/situaciju.
	**Zabranjeno!** Izvođenje zabranjene radnje može uzrokovati osobne ozljede i/ili oštećenje opreme. **Oštećenja uzrokovana zabranjenim radnjama nisu pokrivena jamstvom.**
	Obavezno! Ove radnje moraju se izvršiti prije uporabe. Ako korisnik ne izvrši obavezne radnje, to može dovesti do osobne ozljede i/ili oštećenja opreme
IP24	Zaštita od čvrstih predmeta većih od 12,5 mm; zaštita od prskanja vode iz bilo kojeg smjera.
	Prije rada pročitajte upute za priručnik
	Pažljivo pazite na pješake
	NEMOJTE uklanjati bilo kakve dijelove ili oznake upozorenja s invalidskih kolica

	NE stavljajte prste ili udove ispod pokrivača ili između pokretnih dijelova. To može dovesti do ozljeda
	Nemojte preopteretiti invalidska kolica. Maksimalna nosivost skutera ne smije prelaziti 115 kg
	NEMOJTE koristiti invalidska kolica na stepenicama
	Nemojte koristiti invalidska kolica u ekstremnim vremenskim uvjetima kao što su jaka kiša, ekstremna vlaga, poledica itd.
	Upozorenje! Temperature površine invalidskih kolica mogu biti visoke
	Koristite samo ovlašteni servis uvoznika za popravak u slučaju nezgode i/ili oštećenja dijelova
	Baterija sadrži kaustične tvari. Odložite je u skladu s lokalnim propisima o okolišu
	Prije vožnje provjerite je li naslon za leđa u uspravnom položaju
	Koristite samo litijeve zapečaćene baterije proizvođača koje ne zahtijevaju održavanje
	Držite alate i druge metalne predmete dalje od terminala baterije. Kontakt s metalnim predmetima može izazvati strujni udar
 	Odlaganje i recikliranje Upotrijebite u skladu sa zakonima lokalne samouprave.

	Punjač baterija je samo za unutarnju upotrebu
	Zapaljive materijale Ne izlažite otvorenom plamenu
	MR Nesiguran
	Posavjetujte se sa stručnjacima prije korištenja invalidskih kolica u slučaju mentalnih ili fizičkih oštećenja
	Održavajte pravilan položaj tijekom vožnje
	Ostanite usredotočeni tijekom vožnje i izbjegavajte ometanja
	Krhko
	Zaštititi od vlage i vlage

4. INFORMACIJE O PROIZVODU

A. ELEMENTI INVALIDSKIH KOLICA



1. Naslon za leđa
2. Preklopni naslon za ruke
3. Gumb za podizanje naslona za ruke
4. Sjedalo sa sigurnosnim pojasom
5. Reflektirajuće naljepnice
6. Litijeva baterija
7. Amortizer
8. Oslonac za noge
9. Prednji, okretni kotač od 7”.
10. Stražnji, čvrsti kotač od 11”.
11. Podešavanje kotača protiv prevrtanja



12. Upravljački modul s joystickom
13. Džep za robu
14. Preklopna stezaljka
15. Motori i poluge načina rada
16. Kotač protiv prevrtanja

Invalidska kolica nakon



B. KARAKTERISTIKE PROIZVODA

- Aluminij, sklopivi okvir
- Čvrsti stražnji kotači od 11" i prednji okretni kotači od 7".
- Sigurne i pouzdane elektromagnetske kočnice
- Potpuno zatvorena baterija bez održavanja
- Sigurnosni pojas
- Kotači protiv prevrtanja s podešavanjem duljine
- Preklopni nasloni za ruke i noge
- Amortizeri sprijeda i straga
- Prednji, stražnji i sklopivi amortizeri
- Džep za robu smješten straga
- Reflektirajuće naljepnice uključene
- Dva načina rada: električni i ručni

C. TEHNIČKI PARAMETRI



Invalidska kolica ne mogu se koristiti u područjima sa zapaljivim plinom pomiješanim sa zrakom, kisikom ili dušikovim oksidom.

Bilješka! Neki parametri mogu varirati ovisno o težini korisnika, uvjetima na cesti i korištenju baterije.

Šifra proizvoda	Maja
Tip	za vanjsku i unutarnju upotrebu
Ukupna visina	100 cm
Ukupna širina	56 cm
Ukupna noga	103 cm
Visina sjedala od tla	55 cm
Visina naslona	52 cm
Dimenzije jastuka za sjedenje	42 x 45 x 5 cm
Maksimalni kapacitet	115 kg
Težina baterije	1,60 kg
Baterija	litij, 24 [V] x 12 [Ah]

Vrijeme punjenja baterije	6-8 sati
Težina (bez baterije)	20,00 kg
Kotači	prednja strana: okretna, puna 7” straga: čvrsti 11”
Maksimalna brzina	≤ 6 [km/h]
Put kočenja na horizontalnoj površini	≤ 1 [m]
Maksimalni domet	18 [km]
Maks. kut elevacije	≤ 6°
Min. radijus okretanja	1,2 [m]
Klasifikacija sigurnosti	tip B
Razina zaštite od prodora za motor	IP24
Razina snage motora	2x250 [W]

D. MONTAŽA I PODEŠAVANJE

- **Rasklapanje: Uklonite** električna invalidska kolica iz crtića. Držeći invalidska kolica za ručku iznad naslona, rasklopite ih dok ne sjednu na mjesto. Postavite bateriju ispod sjedala i spojite na kabel za napajanje motora (crveni). Ugradite upravljački modul i spojite ga na kabel za napajanje modula.
- **Sklapanje: Za** sklapanje invalidskih kolica povucite preklopnu stezaljku i preklopite invalidska kolica prema naprijed gurajući ručku naslona prema joysticku. Postavite invalidska kolica uspravno i uhvatite ih za okvir kako biste ih prevezli.

  Upozorenje! Prije sklapanja invalidskih kolica za prijevoz, odspojite i uklonite bateriju.
- **Podešavanje položaja upravljačkog modula: Podešavanje treba** izvršiti dok sjedite u invalidskim kolicima. Najprije otpustite pričvrsni vijak i pomaknite držač koji pričvršćuje upravljački modul prema naprijed ili prema natrag kako biste postavili ispravan položaj, zatim zategnite vijak nakon toga.
- **Naginjanje naslona za ruke:** Invalidska kolica su opremljena naslonima za ruke koji se mogu preklopiti. Za podizanje naslona za ruke pritisnite crveni

gumb na bočnom okviru invalidskih kolica i polako podignite naslon za ruku. Kako biste pričvrstili naslone za ruke natrag na mjesto, spustite okvir dok klin ne sjedne na mjesto.

- **Kotači protiv prevrtanja: Za ugradnju** kotača protiv prevrtanja, umetnite ih u montažne rupe na donjem okviru, ispod motora. Zatim izvucite klin za montiranje i gurnite ih u otvor dok klin za zaključavanje ne sjedne na mjesto.
- **Uklanjanje baterije: Kako biste** uklonili bateriju, odspojite crveni kabel za napajanje i nježno ga izvucite za ručku.

5. RAD

A. UPRAVLJAČKI MODUL ZA KORISNIKA I PRATITELJA (POMOĆNIKA)

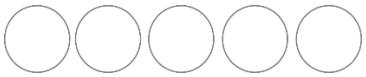
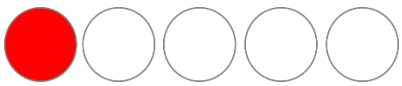




1. Razina baterije
2. Uključivanje/isključivanje
3. Truba
4. Indikator razine brzine
5. Nivo brzine prema gore/dolje
6. Isključi/Uključi zvuk
7. Gumb upozorenja S.O.S
8. Joystick

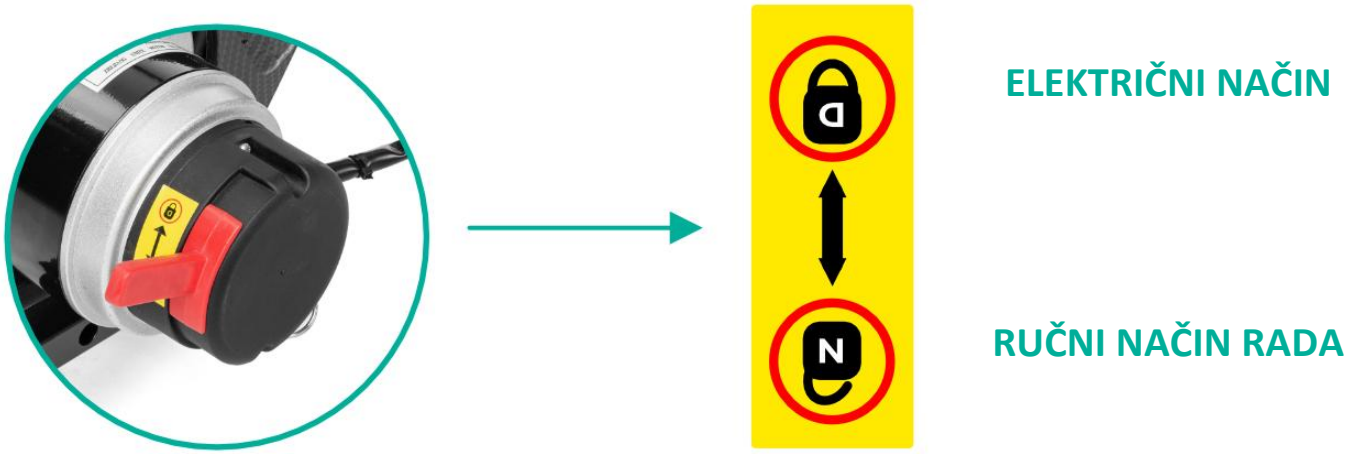
A. Joystick/truba (pritisnite)
B. Brzina – niža razina
C. Brzina – viša razina
D. Uključivanje/isključivanje

Funkcije glavnog upravljačkog modula	
Joystick	Služi za upravljanje brzinom i smjerom (naprijed, natrag i skretanje). Smjer vožnje ovisi o smjeru u kojem se joystick pomakne. Što je joystick više odmaknut od središnjeg položaja upravljačke ploče, invalidska kolica kreću se brže. Kada se joystick otpusti, kolica automatski usporavaju. Ne pomičite joystick naglo dok kolica miruju.
Indikator brzine	Ima 5 razina: 1 – najsporija, 5 – najbrža.
Gumb za isključivanje zvuka	Isključuje glas pomoćnika (dostupno samo na engleskom).
S.O.S upozorenje	Pritisnite gumb za uključivanje S.O.S signala upozorenja (svjetla/glas). Pritisnite bilo koji gumb da biste ga isključili.

LED zaslon	Status	Značenje/Opis
	Sva LED svjetla su isključena	Invalidska kolica su isključena ili u stanju mirovanja.
1.  **2.**    **3.** 	**1.** Sva svjetla su upaljena2. **Upaljeno** je nekoliko **svjetala3.** Upaljeno je samo crveno svjetlo	Kada su invalidska kolica uključena, broj svjetala pokazuje razinu napunjenosti baterije: 5 svjetla = 81-100% 4 svjetla = 61-80% 3 svjetla = 41-60% 2 svjetla = 21-40% 1 svjetlo = ≤ **20% Ako je ostalo samo jedno svjetlo (crveno), baterija je pri kraju. Napunite bateriju što je brže moguće.**

B. RUČNO I ELEKTRIČNO IZMJENA NAČINA RADA

Za korištenje invalidskih kolica u električnom načinu rada, pomaknite gore lijevo i desno poluge motora koje se nalaze na stražnjem dijelu invalidskih kolica. Za korištenje invalidskih kolica u ručnom načinu rada, pomaknite poluge prema dolje.



C. PUNJAČ

- Set uključuje punjač posvećen bateriji.
- Vrijeme punjenja baterije je cca. 6-8 sati.
- Baterija se može puniti izravno ili putem upravljačkog modula.
- **Važno:** kada punite bateriju preko priključka ispod upravljačkog modula, prvo isključite modul.
- **LED indikator baterije:**

A. **Zeleno LED** svjetlo – baterija nije spojena na punjač ili je potpuno napunjena.

B. **Crveno LED** svjetlo – baterija se puni/još nije napunjena

Bilješka! Nakon što je punjenje završeno, punjač se isključuje kako bi se izbjeglo prekomjerno punjenje.

- Provjerite je li strujni krug ispravan i nije oštećen.
- **Ne** mijenjajte spoj kruga punjenja.
- Kako biste izbjegli požar ili izgaranje, izbjegavajte odspajanje kruga punjenja dok se baterija puni.
- Kako biste provjerili trenutnu razinu baterije na upravljačkom modulu, prvo isključite napajanje.

D. UPUTE ZA UPORABU

- Odaberite željeni način vožnje.

Bilješka! Nemojte mijenjati način rada tijekom vožnje na uzvisini.

- Nagnite oslonac za noge i udobno se smjestite na sjedalo. Spustite oslonac za noge natrag u vodoravni položaj.

Bilješka! Ne koristite oslonac za noge kao oslonac kada sjedite ili ustajete iz invalidskih kolica. To može uzrokovati naginjanje i pad invalidskih kolica.

- Sjednite na invalidska kolica i uključite upravljačku ploču. LCD zaslon će zasvijetliti. Joystick bi trebao biti u neutralnom položaju.
- Budite oprezni kada koristite prvi put. Pažljivo kontrolirajte brzinu i smjer. Elektromagnetska kočnica će se otpustiti tek nakon pritiska joysticka (električni način rada). Da biste ubrzali, gurnite joystick dalje od neutralnog položaja. Da biste usporili – učinite suprotno.
- Za zaustavljanje invalidskih kolica otpustite joystick. Pritiskom na tipku za napajanje također će se zaustaviti invalidska kolica.
- Pomoću namjenskih gumba na upravljačkoj ploči prilagodite brzinu invalidskih kolica prema fizičkom stanju korisnika i uvjetima na cesti.
- Invalidska kolica treba koristiti samo na ravnim površinama. Vožnja po blatnim ili neravnim površinama može uzrokovati oštećenje sustava upravljanja.

6. INFORMACIJE O ODRŽAVANJU

1. Čišćenje i održavanje invalidskih kolica

- Preporuča se redoviti pregled konstrukcije i njezinih elemenata (kotači, okviri, sajle, upravljački modul, kočnice itd.).
- Sve rabljene ili oštećene dijelove invalidskih kolica potrebno je zamijeniti (u tom slučaju obratite se prodavaču).

2. Održavanje baterije:

1) Redovito provjeravajte prikazanu razinu baterije. Ako je razina vrlo niska, odmah je napunite kako biste izbjegli pad napona (što može utjecati na trajanje baterije).
2) Ako invalidska kolica nećete koristiti dulje vrijeme, bateriju punite barem jednom mjesečno.
3) Baterija ima određeni vijek trajanja. Zamijenite bateriju ako se istroši.
4) Bateriju treba držati čistom i van domašaja djece. Izbjegavajte izazivanje bilo kakvog udara ili oštećenja baterije.
5) Punite ga redovito kako biste mu produžili vijek trajanja.
6) Iskorištene baterije treba upotrijebiti u skladu s lokalnim propisima o zaštiti okoliša.

3. Uvjeti skladištenja i transporta

A. PRIJEVOZ

- Budite oprezni tijekom transporta. Nemojte bacati, prevrtati ili vršiti pritisak na proizvod i njegovu ambalažu.
- Za sklapanje invalidskih kolica *provjerite „Sastavljanje i podešavanje”.*

B. SKLADIŠTENJE

Invalidska kolica treba držati u suhom i dobro prozračenom prostoru. Izbjegavajte: visoke temperature i njihove brze promjene, kiseline, lužine i korozivne kemikalije.

C. UVJETI ČUVANJA

Temperatura: -40[°C] ~+55[°C]
Vlažnost: ≤80%
Tlak zraka: 86 ~ 106 KPa

4. Rješavanje problema

U slučaju kvara, upravljački modul uključit će alarm koji će biti naznačen zvukom (osim ako nije isključen) i treptanjem dijagnostičke diode. Broj zvučnih signala (bipova) i bljeskanja dioda obavještava o vrsti problema.

Kontrolor	Problem	Moguće rješenje
	Indikator razine baterije svijetli, a upravljački modul proizvodi sedam zvukova	1. Joystick nije u središnjem položaju. 2. Najprije provjerite je li joystick spojen. 3. Isključite napajanje iz upravljačkog modula. Ponovno ga uključite i provjerite radi li upravljački modul normalno. 1. Ako problem nije riješen, kontaktirajte servis prodavača.
	Indikator razine napunjenosti baterije svijetli, a upravljački modul se dva puta oglašava	1. Gubite vezu lijeve žice motora. 2. Provjerite je li lijeva žica motora u dobrom stanju, nije labava, odvojena ili odspojena. 1. Zamijenite lijeve i desne žice motora. Nakon zamjene, alarm će zazvoniti 4 puta označavajući grešku lijevog motora / 2 puta označavajući grešku regulatora. Kontaktirajte servis prodavača.

	Indikator razine baterije svijetli, a upravljački modul proizvodi tri zvuka	1. Gubite vezu lijeve kočnice. 2. Provjerite je li lijeva poluga kočnice u električnom načinu rada. 3. Provjerite je li kočnica u dobrom stanju, nije labava, odvojena ili odspojena. 4. Zamijenite lijeve i desne žice motora. Nakon zamjene, alarm će zazvoniti 5 puta označavajući kvar lijeve kočnice / 3 puta označavajući kvar kontrolera. Kontaktirajte servis prodavača.
	Indikator razine baterije i razine brzine svijetli, a upravljački modul ispušta tri zvuka	1. Pogreška konfiguracije kočnice 2. Provjerite jesu li ručice lijeve i desne kočnice u električnom načinu rada. 3. Kontaktirajte servis prodavača.
	Indikator razine baterije svijetli, a upravljački modul ispušta četiri zvuka	1. Gubite vezu desne žice motora. 2. Provjerite je li desna žica motora u dobrom stanju, nije labav, odvojen ili nepovezan. 3. Zamijenite lijeve i desne žice motora. Nakon zamjene, 1. alarm će zazvoniti 4 puta označavajući grešku lijevog motora / 2 puta označavajući grešku regulatora. Kontaktirajte servis prodavača.
	Indikator razine baterije svijetli, a upravljački modul proizvodi pet zvukova	1. Gubite vezu desne kočnice. 2. Provjerite je li desna poluga kočnice u električnom načinu rada. 3. Provjerite je li kočnica u dobrom stanju, nije labava, odvojena ili odspojena. 1. 4. Zamijenite lijeve i desne žice motora. Nakon zamjene, alarm će zazvoniti 5 puta označavajući kvar lijeve kočnice / 3 puta označavajući kvar kontrolera. Kontaktirajte servis prodavača.
	Indikator razine baterije svijetli, a upravljački modul proizvodi sedam zvukova	Kontaktirajte servis prodavača.
	Indikator razine baterije neprekidno svijetli crvenom svjetlošću	1. Problem s naponom baterije 2. Bateriju je potrebno odmah napuniti. 3. Kvar regulatora. Kontaktirajte servis prodavača.

5. Informacije o jamstvu

- Svi proizvodi koje distribuira naša tvrtka pokriveni su jamstvom, čiji su uvjeti opisani u jamstvenom listu dostupnom na našoj web stranici. Obratite se prodavaču od kojeg ste kupili proizvod. Imajte na umu da u svrhu jamstva treba sačuvati dokaz o kupnji (račun ili račun). Kao tvrtka prilagođena korisniku, nudimo samo provjerene proizvode – u pogledu materijala, kvalitete i funkcionalnosti. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi servisnih procedura, obratite nam se.
- **Jamstvo ne pokriva:**

1. **nosivi dijelovi:** presvlake, gume, nasloni za ruke, baterija
2. **štete nastale** uslijed: samostalnih popravaka, promjena u konstrukciji proizvoda, pada, transporta, neprikladne uporabe, nepoštivanja uputa, prirodnih katastrofa (požar, potres, poplava).

Zhejiang Feilechi Medical Equipment Co., Ltd.
Building 3&4, No. 4 Xinyuan Road, Xinbi Street, Jinyun County, Lishui City, Zhejiang Province, China

SUNGO Cert Gmbh
Harffstr. 47, 40591, Düsseldorf, Germany

Timago International Group
Ossowski Sp. k.
ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland