KORISNIČKI PRIRUČNIK

Pjenasti madrac protiv dekubitusa s perivim, paropropusnim navlakom

REF: MOON-TIM GOFR, Tip: GOFR, veličina: 200x90x10 cm

REF: MOON-TIM GOFR, Tip: GOFR, veličina: 200x90x12 cm



Prije uporabe proizvoda pročitajte ove upute. Upute sadrže informacije potrebne za sigurnu i pravilnu uporabu proizvoda, te o održavanju i čišćenju. Uporaba proizvoda suprotno uputama može dovesti do ozbiljnih komplikacija. Upute treba čuvati na lako dostupnom mjestu

1. Karakteristike

Madrac je izrađen od poliuretanske pjene, a njegov dizajn u obliku vafla pruža svojstva protiv dekubitusa. Madrac je opremljen perivom navlakom s patentnim zatvaračem i paropropusnom membranom.

2. Primjena

Pjenasti madrac protiv dekubitusa, zahvaljujući svom dizajnu, omogućuje stalni pristup svježem zraku koji, u kombinaciji s pravilnom raspodjelom tlaka i prilagodbom madraca tijelu korisnika, sprječava stvaranje dekubitusa, a također pomaže u liječenju već postojećih.

3. Kontraindikacije za upotrebu:

- Ne koristite proizvod koji nije kompatibilan s okvirom kreveta.
- Ne koristite proizvod za namjenu koja nije predviđena.
- Ne koristite proizvod u blizini otvorenog plamena ili na vrućoj površini. To može ozbiljno ozlijediti korisnika i dovesti do ozbiljnog oštećenja zdravlja.

4. Napomene 

Proizvođač ne snosi odgovornost za nepravilno održavanje proizvoda, nepoštivanje sigurnosnih propisa i zlouporabu.

- Koža na mjestu spajanja mora biti čista.
- Potrebno je redovito provjeravati stanje kože pacijenta.
- Poziciju korisnika treba redovito mijenjati kako bi se spriječilo stvaranje žuljeva/rana.
- Ne koristite oštre predmete i opremu koja može oštetiti navlaku.
- Madrac treba odgovarati veličini kreveta.

- Održavajte visoku higijenu navlake za madrac: čistite i/ili perite.

Ako proizvod više nije prikladan za upotrebu, treba ga zbrinuti. Prije zbrinjavanja proizvod treba očistiti kako bi se uklonio rizik od kontaminacije.
Ako se pojave neželjeni simptomi kao posljedica uporabe uređaja, o tome obavijestite proizvođača i nadležno tijelo države članice u kojoj korisnik ili pacijent boravi.

5. Raspakiravanje i postavljanje

- Kada primite pošiljku s madracem, otvorite je pažljivo kako ne biste oštetili madrac.
- Postavite madrac na ravnu površinu i pričekajte da se sve deformacije nastale tijekom transporta vrate u izvorni oblik.
- Madrac treba postaviti na krevet pacijenta kako bi u potpunosti obavljao svoje funkcije.

6. Tehnički podaci

PARAMETRI	MODEL	
	MOON-TIM GOFR 10	MOON-TIM GOFR 12
Duljina	200 cm	200 cm
Širina	90 cm	90 cm
Visina	10 cm	12 cm
Kapacitet	100 kg	120

7. Čišćenje i održavanje

- Ne perite pjenasti madrac.
- Operite navlaku nakon uklanjanja pjenastog umetka blagim deterdžentom na temperaturama do 90 °C.
- Navlaka se može sterilizirati na temperaturama do 120 °C.
- Navlaka se može dezinficirati otopinom alkohola do 60 %.
- Ne koristite izbjeljivač ili kemikalije.
- Ne kemijski čistiti.
- Ne koristite kemikalije koje sadrže klor.
- Preporučuje se sušenje u raskloplјenom stanju.
- Ne dopustite teško zaprljanje.

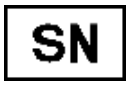
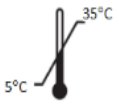
8. Uvjeti skladištenja i prijevoza.
Proizvod ne smije biti izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti, vodi ili vlazi.

9. Informacije o jamstvu
Svi proizvodi koje distribuira naša tvrtka pokriveni su jamstvom, čiji su uvjeti opisani u jamstvenoj kartici dostupnoj na našoj web stranici. Molimo kontaktirajte trgovca od kojeg ste kupili proizvod. Imajte na umu da se za potrebe jamstva mora sačuvati dokaz o kupnji (račun ili faktura).

GARANCIJA NE OBUHVATA:

- Mehanička oštećenja (abrazije, ogrebotine).
- Oštećenja nastala prirodnom uporabom.
- Kvarovi koji proizlaze iz nepravilnog dimenzioniranja madraca za krevet.
- Kvarovi nastali nepoštivanjem uvjeta uporabe ili načina čišćenja i održavanja.
- Promjena boje navlake.
- Udobnost upotrebe.

10. Oznake

	Referentni broj		Proizvođač
	Broj serije		Jedinstveni identifikatori uređaja
	Serijski broj		Medicinski uređaj
	Napomena		Molimo pročitajte upute
	Rok uporabe		Dopuštena temperatura skladištenja
	Čuvati na suhom mjestu		Zaštititi od sunčeve svjetlosti
	Ambalaža je reciklabilna		Ambalažu baciti u smeće

CE	Proizvođač je provjerio sukladnost sa zahtjevima za bitne medicinske uređaje.

Timago International Group
Ossowski Sp. k.
ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland
T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com

CE MD

05/2026(I)