# KORSNIČKE UPUTE
# Nagibna invalidska kolica
# Šifra proizvoda: NEURO-TIM


## 1. Značajke

Nagibna invalidska kolica izrađena su od aluminijskog okvira, ojačanog dvostrukom poprečnom šipkom i opremljena obručima na stražnjim kotačima. Kolica imaju: dodatnu horizontalnu ručku za veću sigurnost, produženi naslon za leđa, podizne rukonaslone, naslon za glavu s jastukom, kotače protiv prevrtanja, podizne (ELR) oslonce za noge, parkirne i pratiteljske kočnice. Kut naslona može se podešavati u rasponu od 15–70°, dok se oslonci za noge mogu podešavati u rasponu od 25–90°. Kolica dolaze sa stražnjim punim kotačima 22'' s brzim otpuštanjem i prednjim kotačima 8'' s podešavanjem težišta.

**Set uključuje:** okvir sa sjedalom, podizne oslonce za noge, naslon za glavu s jastukom, presvlaku, kotače protiv prevrtanja s bravicama (2 kom), ključeve za montažu.

### Dijelovi invalidskih kolica:

- **A.** Naslon za glavu s jastukom
- **B.** Naslon za leđa
- **C.** Funkcija nagiba naslona
- **D.** Ručka za guranje sa stabilizacijskom šipkom
- **E.** Kočnica za pratitelja
- **F.** Klin za zaključavanje rukonaslona
- **G.** Parkirna kočnica
- **H.** Stražnji kotači 22'' s brzim otpuštanjem i obručima
- **I.** Prednji kotači 8'' s podešavanjem težišta i amortizerima
- **J.** Ploča za oslonac stopala
- **K.** Poluga za oslonac stopala
- **L.** Potkoljenični oslonac
- **M.** Sjedalo*
- **N.** Rukonaslon
- **O.** Kotač protiv prevrtanja

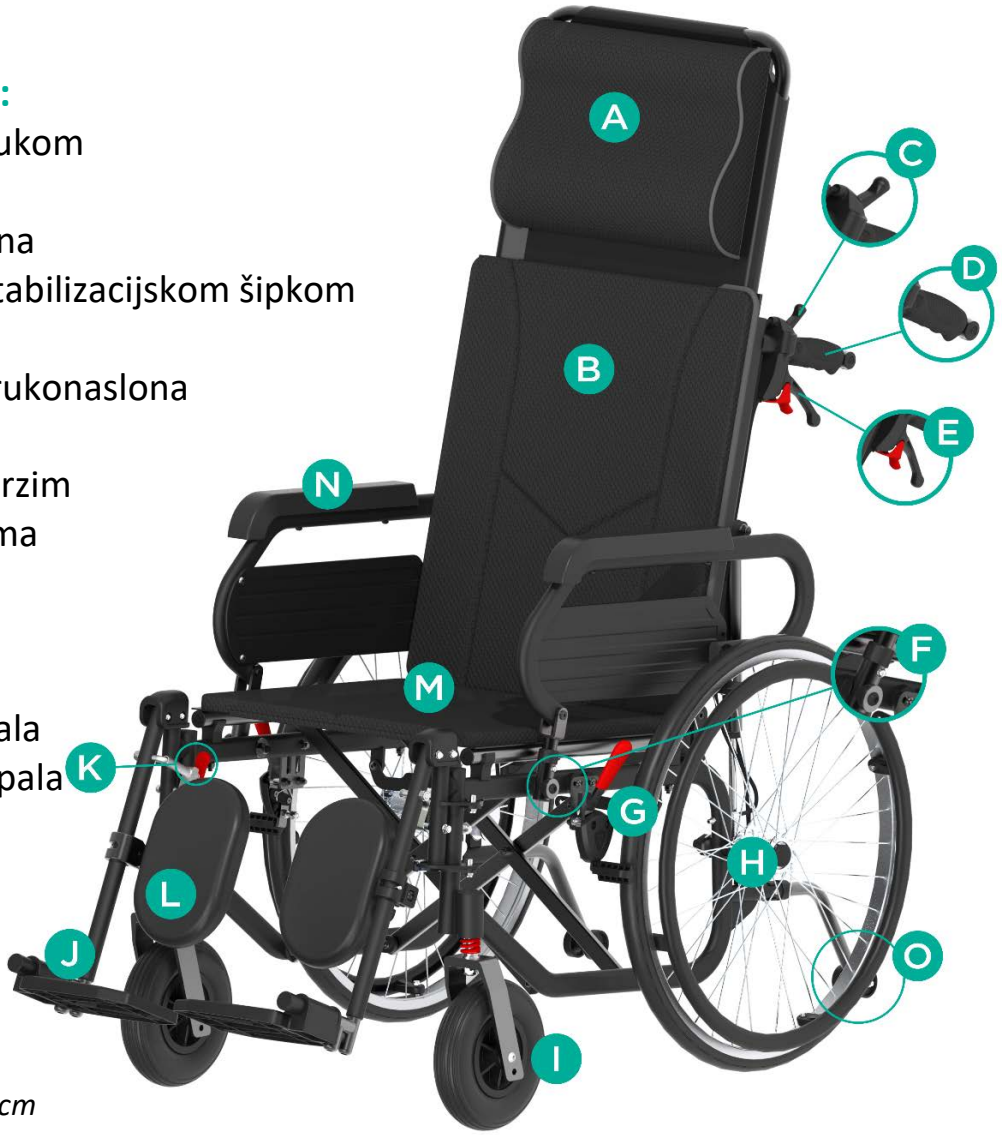


** dostupno u verziji širine 46 ili 48 cm*

## 2. Primjena

Invalidska kolica namijenjena su osobama koje imaju poteškoće s samostalnim kretanjem te pacijentima s disfunkcijama i smanjenom pokretljivošću. Samohodna kolica može gurati i pratitelj. Kolica su prikladna za korištenje u zatvorenim i otvorenim prostorima. Posebno se preporučuju osobama koje imaju poteškoće s kretanjem uzrokovane: paralizom, cerebralnom paralizom, ozljedama ili amputacijama udova, degeneracijama ili deformacijama udova, bolestima srca i krvnih žila, poremećajima cirkulacije, prekomjernom tjelesnom težinom ili patološki smanjenom tjelesnom težinom.

## 3. Sastavljanje

### OTVARANJE I MONTAŽA

### Korak 1. Otvaranje invalidskih kolica

Postavite kolica na pod. Uhvatite ih za rukonaslone i otvorite. Zatim pritisnite sredinu sjedala kako bi se svi dijelovi pravilno povezali. Pritisnite stabilizacijsku šipku koja se nalazi iza naslona za leđa (slika 1) dok ne čujete klik.



*Slika 1*

### Korak 2. Montaža oslonaca za noge

Pričvrstite oslonac za noge na vanjsku stranu okvira. Zatim okrenite oslonac prema unutra dok se ne zaključa.

### Korak 3. Podešavanje oslonaca za noge

- Podesite kut nagiba ploče za stopala rukom. Za spuštanje oslonca pritisnite polugu (K) koja se nalazi na okviru.
- Podesite ploče oslonaca pomoću vijka na cijevi. Mora ostati dovoljno prostora između ploča i tla, jer prenisko podešene ploče mogu otežati

uspon na uzbrdice i rubnjake. Podesite ploče tako da kut između trupa i bedara bude 90° (optimalan položaj sjedenja za korisnika).

**Korak 4. Podešavanje kotača protiv prevrtanja**

Za ugradnju kotača protiv prevrtanja, umetnite ih u otvore na stražnjoj strani kolica i osigurajte ih bravicama. Za podešavanje uklonite bravicu, odaberite odgovarajuću duljinu i ponovno ih osigurajte.

**Korak 5. Montaža naslona za glavu**

Pričvrstite naslon za glavu na naslon za leđa umetajući ga u otvore za montažu. Zatim pritisnite klinove za zaključavanje na unutarnjoj strani okvira i gurnite naslon prema dolje dok ne čujete klik.

**Korak 7. Montaža presvlake**

Postavite presvlaku na sjedalo i pričvrstite čičak trakama.

**Kolica su spremna za upotrebu.**

**SKLAPANJE**

Kolica se mogu ponovno sklopiti radi lakšeg transporta i skladištenja.

- Pomaknite ploče za stopala u uspravan položaj ili ih potpuno uklonite.
- Uklonite presvlaku i naslon za glavu.
- Pritisnite crveni prekidač koji se nalazi na ručki za guranje iza naslona za leđa (slika 1) kako biste preklopili šipku.
- Povucite sjedalo prema gore sprijeda i straga kako biste sklopili kolica.

**PARKIRNA KOČNICA**

- Za blokiranje kotača, gurnite ručicu parkirne kočnice prema naprijed dok se kotač potpuno ne zaključa (posebno za lijevi i desni kotač). Imajte na umu da parkirna kočnica služi samo za blokiranje kotača kada su kolica potpuno nepomična.
- Kočnice za pratitelja opremljene su parkirnim blokadama. Za njihovo korištenje povucite ručice parkirne kočnice (E). Za otključavanje pritisnite crveni prekidač koji se nalazi ispod ručica.

**PODEŠAVANJE PARKIRNIH KOČNICA**

Ispravno funkcioniranje parkirne kočnice ovisi o njenom podešavanju i položaju. Mora biti postavljena na odgovarajuću udaljenost od stražnjeg kotača kako bi ga čvrsto blokirala, a da ručica ne pruža pretjerani otpor.

- Ako je otpor prevelik, pomaknite parkirnu kočnicu prema naprijed pomoću vijaka za pričvršćivanje. Postavite je tako da kotače lako blokira bez pretjeranog otpora.
- Ako parkirna kočnica ne dodiruje ili ne blokira kotač ispravno, postupite prema gore navedenim uputama pomicanjem ručice u suprotnom smjeru.

**KOČNICE ZA PRATITELJA**

Ručice kočnica nalaze se iza naslona, ispod obje ručke. Za zaustavljanje kolica povucite ručicu kočnice. Za otpuštanje je pustite. Radite to glatko i s odgovarajućom snagom.

**PODEŠAVANJE KUTA NASLONA I OSLONACA ZA NOGE**

- Naslon se može podešavati od 15° do 70° pritiskom na ručice (C) koje se nalaze iznad ručki.
- Oslonci za noge mogu se podešavati od 25° do 90°. Podignite ili spustite oslonac pritiskom na polugu (K) pored oslonca za potkoljenicu.

**PODEŠAVANJE ZA PACIJENTE NAKON AMPUTACIJE DONJIH EKSTREMITETA**

**Napomena!** Za profesionalno podešavanje obratite se svom prodavaču ili osobi s odgovarajućim znanjem i kvalifikacijama. Nemojte sami podešavati kut nagiba sjedala.

- Za podešavanje težišta (naprijed), odvrnite vijak za pričvršćivanje na desnom i lijevom kotaču. Zatim podesite nagib sjedala pomicanjem osi pričvršćenja kotača prema gore ili dolje, jednako na oba kotača.
- Nagib sjedala treba podesiti tako da korisnik ne klizi s kolica i da može slobodno koristiti obruče kotača.

## 4. Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Ukupna širina | 67 cm |
| Dimenzije sjedala | 46/48 x 42 cm |
| Visina rukonaslona od sjedala | 24 cm |
| Ukupna dubina | 113 cm |
| Visina sjedala od poda | 50 cm |
| Ukupna visina | 130 cm |
| Težina | 17,50 kg |

| | |
|---|---|
| Maksimalna nosivost korisnika | 120 kg |
| Dimenzije sklopljenih kolica | 88 x 33 x 94 cm |
| Boja okvira | crna |

## 5. Napomene

**Timago International Group ne snosi odgovornost za nepravilnu upotrebu proizvoda, nepoštivanje sigurnosnih propisa i zlouporabu.**

## 6. Čišćenje i održavanje

Održavanje dijelova invalidskih kolica potrebno je provoditi redovito:

- Presvlaku i jastuk možete očistiti vlažnom (ne mokrom) krpom i hladnom ili mlakom vodom, bez upotrebe deterdženata. Tvrdokorne mrlje možete ukloniti spužvom. Nemojte pretjerano močiti presvlaku. Sušite dalje od izvora topline.
- Plastične dijelove treba čistiti vlažnom krpom, po potrebi uz upotrebu odgovarajućih sredstava za čišćenje plastike. U tom slučaju slijedite upute proizvođača i sigurnosne mjere.

## 7. Uvjeti skladištenja i transporta

Proizvod ne smije biti izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti, vodi ili vlazi.

## 8. Warranty information

All products distributed by our company are covered by a warranty, the terms of which are described in the warranty card available on our website. Please contact the retailer from whom you purchased the product. Please, keep in mind that for warranty purposes, the proof of purchase (receipt or invoice) should be retained.

## 9. Oznake

| | | | |
|---|---|---|---|
| REF | Referentni broj |  | Proizvođač |
| LOT | LOT broj | UDI | UDI kod |
| SN | Serijski broj | MD | Medicinski uređaj |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Napomena |  | Molimo pročitajte upute |
| CE | Proizvođač je provjerio usklađenost s osnovnim zahtjevima za medicinske uređaje. | | |

Naša cjelokupna linija proizvoda dostupna je kod naših distributera. Saznajte više na: **www.timago.com**. Hvala što ste odabrali Timago!

**Timago International Group**
Ossowski Sp. k.
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com

CE MD

**08/2025 (I)**