
PRIRUČNIK ZA UPOTREBU
Stol za hodanje s potporom za podlaktice
Šifra proizvoda: PAULA

1. Karakteristike

Stol za hodanje s osloncem za podlaktice izrađen je od lakiranog čeličnog okvira. Opremljena je gumenim rukohvatima, tapeciranim osloncem za podlaktice s glatkim podešavanjem visine i okretnim kotačićima s bravicama.

Set uključuje: okvir, oslonac za podlakticu.

Elementi rolatora:
A. Rukohvat
B. Oslonac za podlakticu
C. Kopča za zaključavanje
D. brava

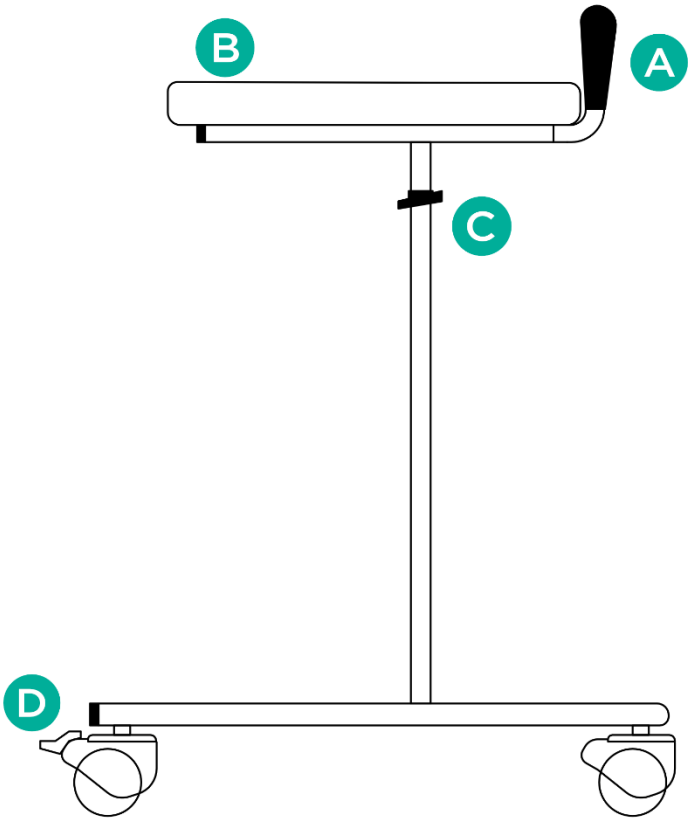

2. Primjena

Stol za hodanje je pomoćna oprema i namijenjen je pacijentima smanjene pokretljivosti kojima je potrebna stabilna potpora i pomoć pri naginjanju u uspravnom položaju i hodu. Posebno je namijenjen pacijentima koji pate od različitih vrsta motoričkih poremećaja zajedno s ograničenom pokretljivošću, disfunkcijom ili slabljenjem donjih udova.

Stol za hodanje preporučuje se i starijim osobama kao pomoć u održavanju ravnoteže, poboljšanju udobnosti hodanja i sigurnosti od pada. Korištenje stola za hodanje pozitivno utječe na povratak aktivnosti osoba s problemima kretanja i naginjanja do uspravnog položaja. Jamči bolju stabilizaciju, potporu i sigurnost tijekom hodanja.


3. Montaža

Rasklapanje


- Postavite gornji stabilizirajući okvir u montažne otvore na prednjem dijelu okvira.
- Za pričvršćivanje visine zategnite kopču pomoću ručke, istovremeno držeći maticu s druge strane odgovarajućim alatom (preporučeno: podesivi ključ). Nakon toga zaključajte kopču guranjem ručke prema okviru.

Funkcija zaključavanja

- Pritisnite papučicu za zaključavanje kako biste zaključali oslonac za podlakticu na mjestu (slika 1).
- Za otključavanje potpore pritisnite zaključanu papučicu (slika 2).

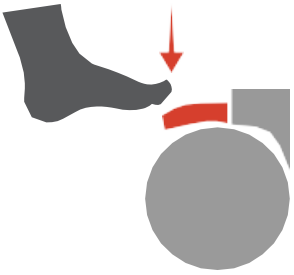

Slika 1

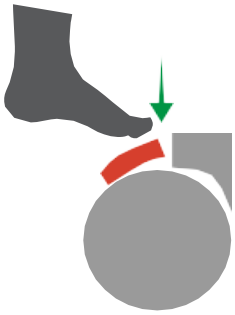

Slika 2

Podešavanje visine oslonca za podlakticu

Visina oslonca za podlakticu treba biti postavljena tako da korisnik može stajati uspravno, koliko god može, s ramenima u položaju mirovanja i laktovima oslonjenim na oslonac. Nije preporučljivo cijelom tjelesnom težinom visi na stolu za hodanje.

- Za podešavanje visine oslonaca za podlaktice, izvucite kopču za zaključavanje. Nakon odabira odgovarajuće visine, zategnite bravu pomoću ručke, istovremeno držeći maticu s druge strane

odgovarajućim alatom. Nakon toga zaključajte kopču guranjem ručke na okvir.

- Ponovite istu radnju na drugoj strani.

4. Tehnički podaci

Ukupna širina	55 cm
Ukupna duljina	66,5 cm
Dimenzije potpore za podlakticu	51 cm x 31 cm
Podešavanje visine potpore za podlakticu	78-129 cm
Težina	16 kg
Maksimalni kapacitet	180 kg

5. Napomene i preporuke

Timago International Group ne snosi odgovornost za nepravilno korištenje rolatora, nepoštivanje sigurnosnih pravila kao i za neprikladnu, protivnu namjeni uporabu.

6. Održavanje

Noseći okvir očistiti vlažnom krpom i zatim temeljito osušiti. Ne koristiti jaka sredstva za poliranje jer to može oštetiti zaštitne premaze. Onečišćenja treba redovito uklanjati s pokretnih elemenata nosača (šarki, steznih vijaka, brava).

7. Uvjeti skladištenja i transporta

Proizvod ne smije biti izložen izravnom djelovanju sunčeve svjetlosti, vode ili vlage.

8. Podaci o jamstvu

Proizvod je pokriven jamstvom čiji su uvjeti opisani u jamstvenom listu.

Za potrebe jamstva, čuvajte svoj dokaz o kupnji (račun ili fakturu).

9. Oznake

REF	Referentni broj		Proizvođač
LOT	Broj serije		Datum proizvodnje
SN	Serijski broj	MD	Medicinski proizvod
	Pažnja		Proučite upute
CE	Ocijena proizvođača u pogledu sukladnosti s bitnim zahtjevima za medicinske proizvode.		

Kompletna ponuda dostupna je kod naših distributera.
Saznajte više na **www.timago.com.**
Hvala Vam što ste odabrali Timago!

Timago International Group
Ossowski Sp. k.
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com

CE MD

03/2025(I)