PRIRUČNIK ZA UPOTREBU
Aluminijski rolator s 4 kotača
Šifra proizvoda: RANGER

1. Karakteristike

Rolator na četiri kotača izrađen je od aluminijskog okvira. Opremljen parkirnim kočnicama, sjedalom s naslonom, držačem za štake/štap, držačem za čašu/bocu i praktičnom torbom. Ima pneumatske kotače promjera 12'' i ručke podesive po visini s anatomskim rukohvatima. Konstrukcija se temelji na poprečnom okviru i ovalnom presjeku cijevi, zahvaljujući čemu je značajno povećana otpornost na aksijalni pritisak.

Set uključuje: okvir sa sjedalom, prednje kotače, noge sa stražnjim kotačima, naslon za leđa, torbu za kupovinu, pumpu, držač za čaše, držač za štake/štap.

Elementi rolatora:

- **A.** Rukohvat
- **B.** Podešavanje visine
- **C.** Parkirna kočnica
- **D.** Stezaljka za podešavanje
- **E.** Naslon za leđa
- **F.** Sjedalo s ručkom
- **G.** torba
- **H.** Prednji kotač od 12”.
- **I.** Podešavanje kočnica
- **J.** Stražnji kotač od 12”.
- **K.** Sigurnosna stezaljka
- **L.** Penjačica za rubnjake
- **M.** Držač za štake/štap
- **N.** Igle za zaključavanje
- **O.** Držač za čaše



2. Primjena

Rolator je namijenjen osobama smanjene pokretljivosti kojima je potrebna stabilna potpora i pomoć pri hodu. Preporučuje se i starijim osobama kao pomoć pri održavanju ravnoteže, poboljšanju udobnosti hodanja i sigurnosti od pada. Korištenje rolatora pozitivno utječe na povratak aktivnosti osoba s problemima lokomocije i naginjanja u uspravni položaj. Jamči bolju stabilizaciju, potporu i sigurnost tijekom hodanja.

3. Sastavljanje, rasklapanje, preklapanje i podešavanje

Sastavljanje

- Raspakirajte sve komponente iz kutije i položite na ravnu površinu (okvir s 2 stražnje noge povezane kočionim vodovima, 2 prednja kotača, naslon za leđa, vrećica za kupovinu).
- Pritiskom na klinove za zaključavanje umetnite obje stražnje noge s kotačima u rupe na okviru rotora.
  (desna i lijeva noga su sajlama za kočnice spojene na pravu stranu okvira rolatora).
- Pritiskom na klinove za zaključavanje umetnite oba prednja kotača u rupe na prednjim vilicama okvira rolatora.
- Ugradite naslon u stezaljke s unutarnje strane ručki.
- Objesite torbu na kuke.



Rasklapanje

- Kako biste rasklopili rolator, uhvatite obje ručke i povucite ih prema van.
- Pritisnite vodilice sjedala dok se potpuno ne rasklope (klik mehanizma za zaključavanje).

Preklapanje

- Kako biste sklopili rolator, podignite sjedalo za ručku i povucite ga prema gore.
- Uhvatite obje ručke rolatora i pritisnite ih prema unutra.

Podešavanje visine rukohvata

Za podešavanje visine ručke:

- Pritisnite kočnicu kako biste postavili način parkiranja i imobilizirali rolator.
- Povucite i držite stezaljku za podešavanje.
- Podesite visinu ručki
- Otpustite stezaljku za podešavanje kako biste zaključali podešenu visinu ručki. Povucite ručku gore-dolje nekoliko puta kako biste provjerili ispravno zaključavanje visine.
- Podesite visinu druge ručke na sličan način.
- Oba rukohvata trebaju biti postavljena na istoj visini.

Funkcija kočnica

- Kako biste zaustavili rolator, povucite ručicu kočnice gore prema ručici, a zatim držite.
- Kada stojite ili koristite sjedalo, zaključajte kočnicu povlačenjem ručke kočnice prema dolje.
- Za otpuštanje kočnice, povucite ručicu kočnice prema gore **.**





Podešavanje kočnica

Odvijte držač kabela, povucite ga do željene udaljenosti i zatim ga zaključajte pritezanjem steznog vijka.

4. Tehnički podaci

Ukupna širina	67 cm
Ukupna dubina	75,5 cm
Širina sjedala	21 cm
Ukupna visina	89,5-102,5 cm
Visina sjedala od tla	59 cm
Težina	10,8 kg
Maksimalni kapacitet	136 kg
Maksimalni kapacitet vrećice za kupovinu	5 kg
Boja okvira	bijela, crna

5. Napomene i preporuke

Timago International Group ne snosi odgovornost za nepravilno korištenje rolatora, nepoštivanje sigurnosnih pravila kao i za neprikladnu, protivnu namjeni uporabu.

6. Održavanje

Noseći okvir očistiti vlažnom krpom i zatim temeljito osušiti. Ne koristiti jaka sredstva za poliranje jer to može oštetiti zaštitne premaze. Onečišćenja treba redovito uklanjati s pokretnih elemenata nosača (šarki, steznih vijaka, brava).

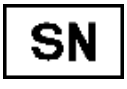
7. Uvjeti skladištenja i transporta

Proizvod ne smije biti izložen izravnom djelovanju sunčeve svjetlosti, vode ili vlage.

8. Podaci o jamstvu

Proizvod je pokriven jamstvom čiji su uvjeti opisani u jamstvenom listu. Za potrebe jamstva, čuvajte svoj dokaz o kupnji (račun ili fakturu).

9. Oznake

	Referentni broj		Proizvođač
	Broj serije		Datum proizvodnje
	Serijski broj		Medicinski proizvod
	Pažnja		Proučite upute
	Ocijena proizvođača u pogledu sukladnosti s bitnim zahtjevima za medicinske proizvode.		

Kompletna ponuda dostupna je kod naših distributera.
Saznajte više na **www.timago.com.**
Hvala Vam što ste odabrali Timago!

Timago International Group
Ossowski Sp. k.
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com

CE MD

03/2025(I)