KORISNIČKI PRIRUČNIK
Hidraulični prijenos sa WC-stolice
Šifra proizvoda: SAFE-TRANSFER

1. Karakteristike
Hidraulična stolica za prijenos s WC-a ima konstrukciju od čeličnog okvira. Odlikuju je mekan naslon, sjedalo i nasloni za ruke te mali stol s profiliranim držačem za čaše. Opremljena je sanitarnim spremnikom, četiri okretna kotačića promjera 5 inča s kočnicama i naslonima za noge. Dizajn stolice omogućuje da se postavi preko sjedala WC-šolje.

Set uključuje: gornji okvir, donji okvir, okvir sjedala s naslonom, hidrauličnu pumpu, poklopac pumpe, polugu, kapu za polugu pumpe, stol, naslone za ruke, cijevi (2 kom.), sigurnosni pojas, metalni okvir za posudu, alate za montažu (vijci, ključevi za montažu, ručice, ručke za montažu itd.).

Elementi prijenosa:

- **A.** Naslon za leđa
- **B.** Naslon za ruke
- **C.** Jastučasti sjedal
- **D.** Stol
- **E.** Gurajući ručak
- **F.** hidraulična pumpa
- **G.** Nogarnjak
- **H.** Kotač od 5" s kočnicom
- **I.** Poluga za podešavanje visine
- **J.** Gornji okvir
- **K.** Donja konstrukcija
- **L.** Sanitarni spremnik




2. Primjena
Hidraulični prijenosi za WC stolicu namijenjeni su osobama s poteškoćama u samostalnom kretanju i pacijentima s disfunkcijama ili smanjenom pokretljivošću. Prijenos je namijenjen isključivo za uporabu u zatvorenom prostoru. Može se koristiti samo uz pomoć pratitelja. Funkcionira kao

WC stolica i prijevozno sjedalo zahvaljujući sanitarnom spremniku smještenom ispod sjedala i četiri okretna kotačića s kočnicama. Olakšava svakodnevne higijenske aktivnosti. Prijenos se posebno preporučuje osobama koje imaju problema s pokretljivošću uzrokovane: paralizom, pretilosti ili nenormalnim mršavljenjem, degeneracijama ili deformitetima udova, degeneracijama ili ozljedama zglobova, ozljedama ili amputacijama udova, poremećajima srca i krvnih žila te poremećajima cirkulacije ( ).

3. Sklapanje

Alati za montažu:

1. Imbus ključ 3 mm
2. Imbus ključ 4 mm
3. Imbus ključ 6 mm
4. Ključ
5. Ključni alat
6. Prirubnica (4 komada)
7. Prugasta opruga (4 kom)
8. Šesterokutni kapak
9. M8*30 vijci (4 kom)
10. M8*50 vijci (4 kom)
11. M5*35 vijke (4 kom)
12. Šesterokutni vijak (crni)
13. M6*40 vijak
14. Kratki šesterokutni vijak

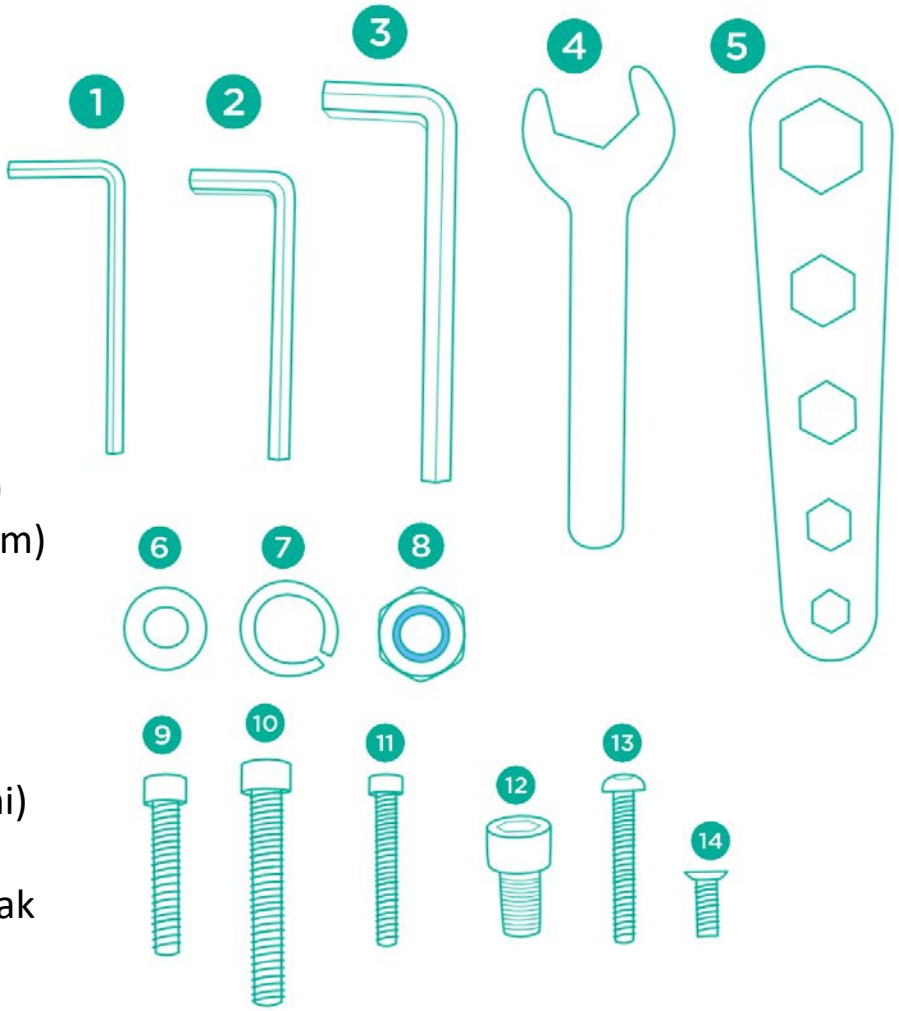

Prije sastavljanja: Preporučuje se da tijekom montaže prijenosa imate pomoćnu osobu zbog njegove velike težine i raznih elemenata koje je potrebno držati tijekom instalacije. Slijedite sve korake sastavljanja i provjerite prijenos nakon montaže prije uporabe. Nemojte pokušavati koristiti prijenos ako j i koji god korak izostavljen ili ako set prijenosa ne uključuje dijelove navedene u uputama.


Korak 1. Izvadite sve elemente prijenosne plošte iz kutije. Uzmite hidrauličnu pumpu (F) i stavite na nju plastični poklopac. Pričvrstite ga kratkim šesterokutnim vijkom (14) i zategnite imbus ključem (2).


Korak 2. Postavite polugu za podešavanje visine (I) sa strane i pričvrstite je maticom (12). Nakon što se uvjerite da je poluga pravilno postavljena, stavite plastičnu srebrnu kapicu na vrh.

Korak 3. Izvadite 4 kotačića s kočnicama (H) i postavite ih na vrh u otvore donjeg okvira (K) pomoću opružnih podloški (7). Držite ih jednom rukom i drugom rukom okrećite plastični poklopac prema sebi (slika 1). Nakon toga ga zategnite ključem (4) kako biste osigurali pravilno sklapanje.

Korak 4. Zaključajte kotače prije nastavka. Montirajte pumpu (F) na donju konstrukciju i pričvrstite je podložnim pločicama (6) i vijcima M8*30 (9) kroz otvore na dnu okvira (slika 2).

Napomena! Nemojte pokušavati montirati pumpu s donjom okvirom na boku zbog njezine težine (osim ako vam ne pomaže druga osoba). Preporučuje se montirati pumpu dok donja okvir leži na tlu.

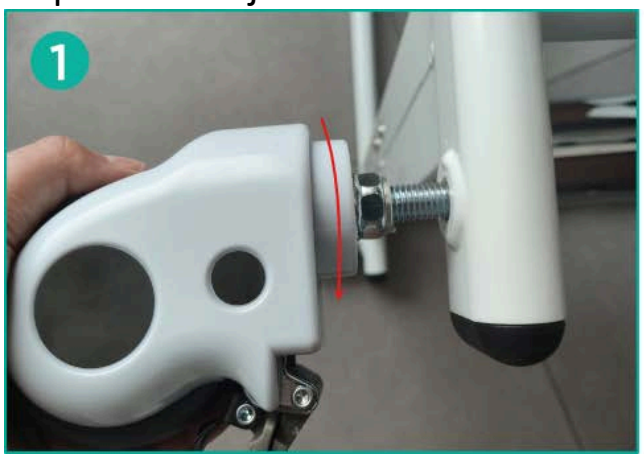


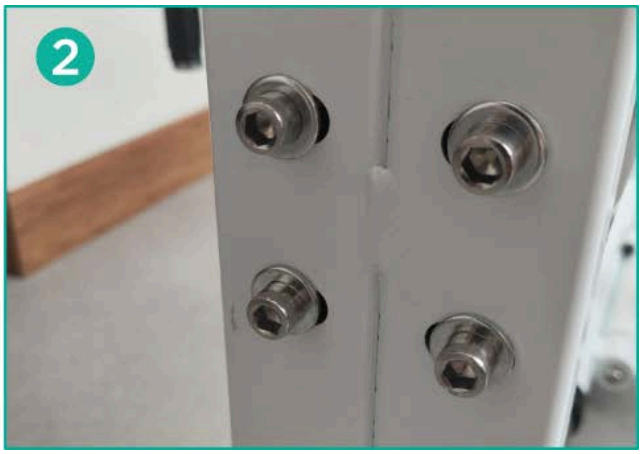

Korak 5. Umetnite dvije srebrne metalne cijevi u dva otvora na donjoj okviru (K) koji će povezati gornji i donji okvir. Pričvrstite ih pomoću dvaju priloženih montažnih ručkica (slika 3).

Korak 6. Provjerite je li otvor metalne cijevi na pumpi (F) u sredini. Ako nije, umetnite metalnu šipku ili imbus ključ u otvor, pritisnite polugu (I) prema dolje i promijenite položaj cijevi rotiranjem tako da otvor bude u sredini (slika 4).



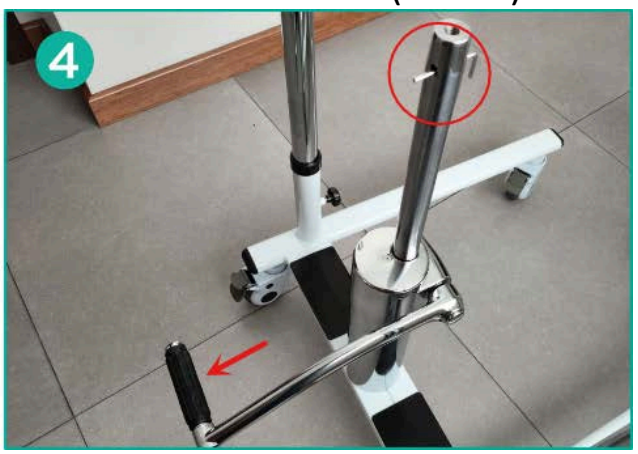

Korak 7. Stavite gornji okvir prijenosa na metalne cijevi donjeg okvira i pumpe. Prođite vijak M6*40 (13) kroz otvor koji povezuje cijev pumpe i srednju cijev gornjeg okvira. Nakon toga zategnite vijak.

Korak 8. Uzmite jedan od dva okvira sjedala i umetnite ga između dvije potporne šipke na okviru. Umetnite vijak M8*50 (10) u otvor, a zatim ga zategnite pomoću imbus ključa (3) (slika 5). Umetnite drugi vijak u otvor ispod donje potporne šipke. Ponovite postupak s drugim okvirom sjedala.

Napomena! Preporučuje se da vam netko pomogne držati okvir sjedala na mjestu tijekom montaže.


Korak 9. Spojite oba dijela okvira sjedala i osigurajte ih pomoću poluge za zaključavanje i pojasa iza naslona (slika 6).






Korak 10. Montirajte naslon za ruku na okvir i pričvrstite ga vijcima M5*35 (11). Provjerite da istaknuti dio naslona za ruku (žuta linija na slici) bude okrenut prema van (slika 7).

Korak 11. Pričvrstite bijeli metalni okvir za kantu ispod sjedala, postavljajući ga na posebne elemente iza sjedala i ubacujući metalne kuke u otvore na prednjem okviru (slika 8).

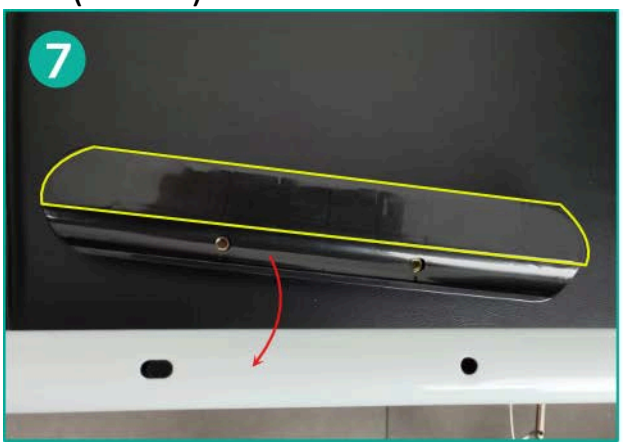

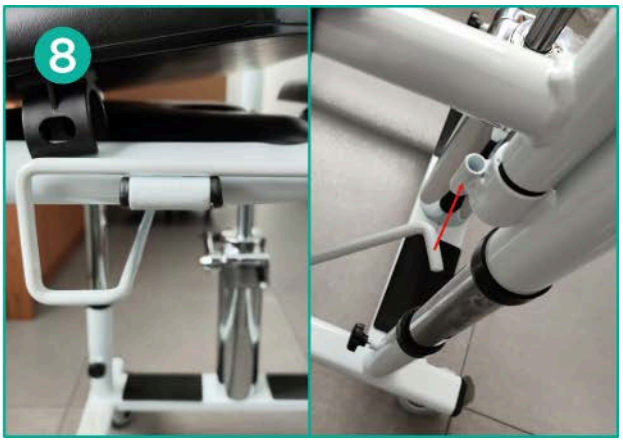

Korak 12. Umetnite kantu sanitarne posude s stražnje strane na metalni okvir.

Korak 13. Pričvrstite crne ručke u otvore na stolu. Stavite ručke u otvore na prednjem okviru prijenosnog dijela tako da profilirani dio stola
je okrenut prema sjedalu (slika 9).

Korak 14. Pričvrstite sjedalo pomoću posebnih čepova sa strane (slika 10). Obavezno izvadite čepove prilikom uklanjanja jastučića sjedala.





Korak 15. Ugradite sigurnosni pojas.

Korak 16. Provjerite jesu li svi vijci i elementi pravilno postavljeni te ih po potrebi zategnite.

Proizvod je spreman za upotrebu.

HIDRAULIČNA PUMPA

Prijenosno sjedalo ima hidrauličnu pumpu koja pomaže osobi koja pomaže prilagoditi visinu sjedala, omogućujući prijenos pacijenata bez pretjeranog napora.

- Za podizanje, lagano pritisnite polugu (I) stopalom nekoliko puta dok ne dostignete željenu visinu.
- Za spuštanje pritisnite i držite polugu (I) stopalom dok se prijenos ne počne spuštati.

RUKOVANJE PRI PREBAČAJU

- Za sjedenje na stolicu otvorite sjedalo tako da ga razdvojite na dva dijela. Postavite donju konstrukciju ispod kreveta i približite je što je moguće bliže pacijentu te zaključajte kočnice na kotačima. Polako provucite jednu stranu prijenosnog sjedala ispod pacijenta, zatim drugu i spojite oba dijela. Ponovno ih učvrstite ručkom i remenom. Provjerite je li pacijent pravilno sjedio i imaju li noge na naslonu za noge.
- Ako se prijenosna stolica koristi kao WC-stolica, montirajte metalni okvir za kantu i sanitarni spremnik ispod sjedala. Uklonite jastučić na sjedalu kako biste stolicu pretvorili u WC-sjedalo s klinom.
- Tijekom premještanja pacijenta, stopala pacijenta trebaju biti postavljena na naslone za noge.
- Provjerite stanje kočnica, podizača, konstrukcije i kotača. Provjerite ispravno sastavljanje komponenti i njihovo podešavanje.

- Prije uporabe provjerite odgovara li širina prijenosnog sjedala korisniku, budući da nije opremljeno podešavanjem širine.
- Prijenosna stolica je namijenjena za korištenje na kratkim udaljenostima i isključivo u zatvorenom prostoru. Prijenosna stolica nema amortizer, stoga se dugotrajna uporaba ne preporučuje.
- **Ne pokušavajte** samostalno ući u prijenosno sjedalo. Pacijente uvijek treba premještati uz pomoć druge osobe.
- **Ne** sjedite na otvorenom sjedištu prijenosnog stolca niti pokušavajte ući u prijenosni stolac kada sjedište nije postavljeno na krevet ili drugu podlogu za sjedenje, jer bi to moglo uzrokovati prevrtanje prijenosnog stolca.
- Ključno je zaključati kočnice pri premještanju pacijenta, promjeni položaja korisnika ili izlasku iz stolice.
- Tijekom prijenosa, sjedalo treba postaviti što je moguće bliže osobi. Sjedalo treba dodirivati krevet ili drugu podlogu za sjedenje. Ako se korisnik ne može samostalno prebaciti, pomozite mu da se smjesti u stolicu.
- Korisnik bi trebao sjediti što je moguće dalje unatrag u središtu sjedala kako bi se osigurala stabilnost stolice.

Napomena! Ne koristiti ako se primijete bilo kakvi nedostaci ili oštećenja.

KOČNICE

- Za zaključavanje kotača pritisnite donje papuče stopalom. Za otključavanje kotača pritisnite gornje papuče kočnice.

UPOTREBA WC-A

- Uklonite jastučić na sjedalu i postavite kantu. Nakon upotrebe uklonite kantu i ponovno postavite sjedalo.
- U slučaju korištenja stolice kao stalka za WC dasku, koristite jednokratnu sanitarnu navlaku koja omogućuje održavanje daske u higijenskom stanju.

Napomena! Ne zaboravite isprazniti posudu nakon svake upotrebe.

4. Tehnički podaci

Ukupna širina	54 cm
Unutarnja širina	47 cm
Ukupna dubina	85 cm
Visina sjedišta od tla	48-68 cm

Ukupna visina	86-106 cm
Dimenzije sjedišta	47 x 39 cm
Težina	31,00 kg
Maksimalni kapacitet	150 kg
Boja okvira	bijela

5. Napomene

Timago International Group ne snosi odgovornost za nepravilnu upotrebu proizvoda i nepoštivanje sigurnosnih propisa.

6. Čišćenje i održavanje

Redovito održavajte komponente stolice:

- Sjedalo se može čistiti vlažnom krpom i hladnom ili toplom vodom, bez upotrebe deterdženata. Uporne mrlje mogu se očistiti spužvom.
- Plastične elemente čistite vlažnom krpom koristeći odgovarajuća sredstva za čišćenje plastike. U tom slučaju slijedite upute proizvođača i sigurnosne mjere.
- Ispraznite i dezinficirajte posudu za WC i sjedalo WC školjke nakon svake upotrebe. Koristite sredstva za čišćenje u skladu s preporukama proizvođača.
- Redovito provjeravajte stanje vijaka, matica, ručica i drugih montažnih elemenata prijenosnog stolca.

5. Uvjeti skladištenja i transporta

Proizvod ne smije biti izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti, vodi ili vlazi.

6. Jamstvene informacije

Svi proizvodi koje distribuira naša tvrtka pokriveni su jamstvom, čiji su uvjeti opisani u jamstvenom listu dostupnom na našoj web stranici. Molimo kontaktirajte trgovca od kojeg ste kupili proizvod. Imajte na umu da za potrebe jamstva trebate zadržati dokaz o kupnji (račun ili faktura).

9. Incidenti povezani s medicinskim proizvodima

Svaki ozbiljan incident povezan s medicinskim proizvodom mora se prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države članice Europske unije u kojoj korisnik ili pacijent ima prebivalište.

10. Oznake

REF	Referentni broj		Proizvođač
LOT	LOT broj	UDI	UDI kod
SN	Serijski broj	MD	Medicinski uređaj
	Napomena		Molimo pročitajte upute
CE	Proizvod ispunjava zakonske zahtjeve Europske unije za medicinske proizvode (MDR 2017/745).		

Naša cjelokupna linija proizvoda dostupna je kod naših distributera. Saznajte više na: **www.timago.com**. Hvala što ste odabrali Timago!

Timago International Group
Ossowski Sp. k.
ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland
T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com

CE MD

05/2026(I)