# KORSNIČKE UPUTE

**3-u-1 stolac za tuširanje i WC s transportnom funkcijom**
**Šifra proizvoda: SANI-TIM**


## 1. Značajke

Stolac za tuširanje i WC izrađen je od aluminijskog okvira s praškastim premazom. Ima preklopne naslone za ruke koji omogućuju lakši ulazak i izlazak osobama sa smanjenom pokretljivošću. Opremljen je PU sjedalom s umetkom u obliku klina, prednjim okretljivim kotačima od 5" s kočnicama, stražnjim punim kotačima od 24” s funkcijom brzog otpuštanja i uklonjivim osloncima za noge. Stolac ima i ručku za osobu u pratnji te sanitarnu posudu. Konstrukcija omogućuje postavljanje stolca iznad WC školjke.

**Set uključuje:** Stolac – desni i lijevi okvir s kotačima, naslon za leđa s naslonima za ruke, sjedalo s umetkom, desni i lijevi oslonac za noge, sanitarna posuda s poklopcem, stražnji kotači 24” (2 kom), gornja i donja prednja spojna cijev, stražnji spojni blok, vijci s poklopcima (6 kom), sigurnosni gumbi (2 kom) i imbus ključ.

**Dijelovi stolca:**

- **A.** Ručka
- **B.** Naslon za leđa
- **C.** Naslon za ruku
- **D.** Sjedalo
- **E.** Sanitary container
- **F.** Oslonac za noge
- **G.** Sigurnosna brava preklopnih naslona za ruke
- **H.** Parkirna kočnica
- **I.** Prednji kotač 5" s kočnicom
- **J.** Stražnji kotač 24” s pogonskim obručima
- **K.** Mehanizam brzog otpuštanja

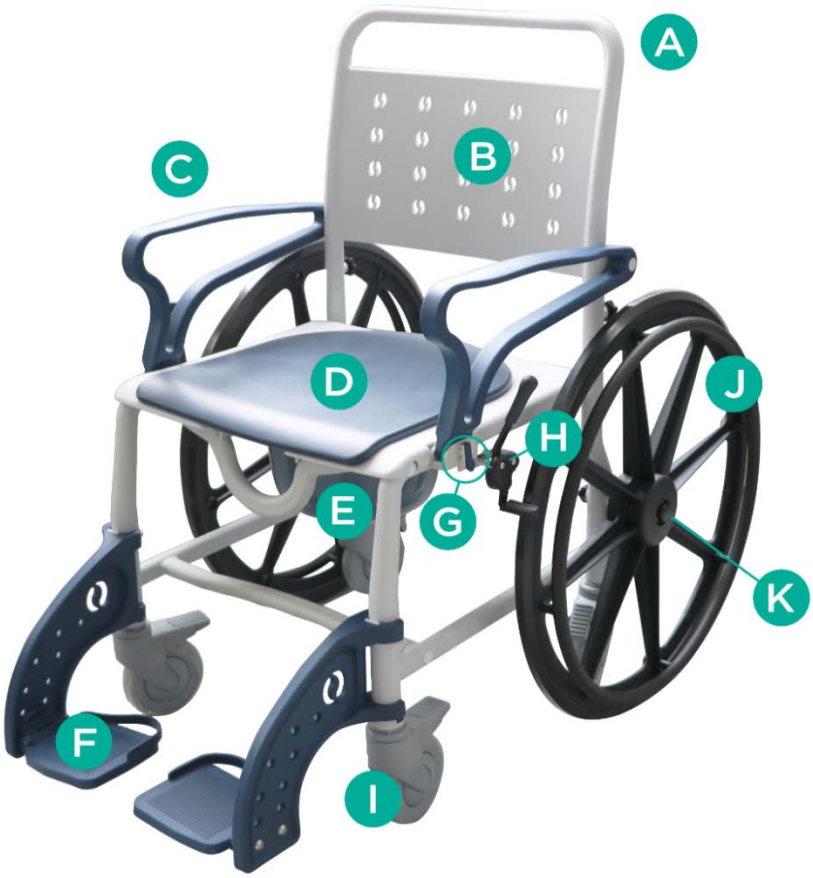

## 2. Namjena

Stolci za tuširanje i WC namijenjeni su osobama koje imaju poteškoće s kretanjem te pacijentima s disfunkcijama ili smanjenom pokretljivošću. Stolac je predviđen isključivo za uporabu u zatvorenom prostoru. Zahvaljujući aluminijskom okviru otpornom na vlagu i sanitarnoj posudi ispod sjedala, stolac se može koristiti i kao stolac za tuširanje i kao WC stolac. Omogućuje lakše obavljanje svakodnevne higijene. Stolac je posebno preporučljiv osobama s ograničenom pokretljivošću uzrokovanom paralizom, pretilošću ili izrazitom mršavošću, deformacijama udova, degenerativnim bolestima, oštećenjem zglobova, ozljedama ili amputacijama te srčano-žilnim i cirkulacijskim poremećajima.


## 3. Sastavljanje

1. Kako bi se spriječilo pomicanje okvira tijekom sastavljanja, zaključajte kočnice pritiskom na ručice kočnica prema dolje.
2. Spojite desni i lijevi okvir pomoću cijevi, vijaka i imbus ključa (slika 1). Nakon toga postavite poklopce na montažne otvore (slika 2).






3. Postavite sjedalo na gornji dio okvira. Gurnite sanitarnu posudu ispod sjedala straga.
4. **Montirajte stražnje kotače:** Umetnite mehanizam brzog otpuštanja (K) u otvor za stražnji kotač. Provjerite da je središnji prsten unutar otvora u sredini i da ne prekriva otvor (slike 3 i 4). Umetnite mehanizam u otvor dok istovremeno pritišćete crni poklopac (slika 5). Kada je mehanizam postavljen na kotač, umetnite kotač u otvor stražnjeg okvira stolca i ponovno pritisnite crni poklopac. Ispravno postavljen mehanizam trebao bi proći kroz otvor na drugoj strani cijevi (slika 6). Ponovite postupak s druge strane.

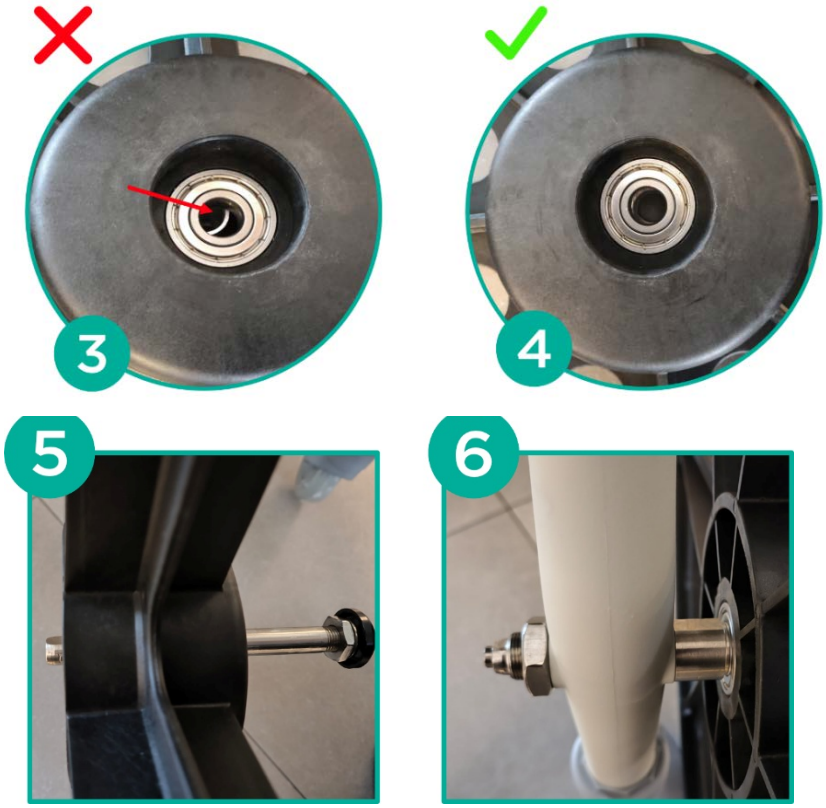


5. Postavite cijevi naslona za leđa na okvir stolca i osigurajte ih sigurnosnim gumbima. Pritisnite bravu naslona za ruke i spustite naslone dok se ne učvrste u položaju.
6. Pričvrstite oslonce za noge na prednje dijelove okvira (slika 2).



**RUKOVANJE STOLICOM**

- Provjerite stanje parkirnih kočnica, konstrukcije i kotača. Provjerite jesu li svi dijelovi pravilno sastavljeni i podešeni.
- Prije uporabe provjerite odgovara li širina stolca korisniku, jer stolac nema mogućnost podešavanja širine.
- Stolac je namijenjen za kraće udaljenosti i isključivo za uporabu u zatvorenom prostoru. Nema amortizere, stoga se dugotrajna uporaba ne preporučuje.

**NAPOMENA!** Nemojte koristiti stolac ako primijetite bilo kakve kvarove ili oštećenja.

**PREKLOPNI NASLONI ZA RUKE**

- Pritisnite bravu (G) ispod naslona za ruku i lagano podignite naslon prema gore.
- Ne koristite naslon za ruku kao oslonac prilikom ustajanja. Ako je potrebna pomoć – zatražite asistenciju.

**FUNKCIJA BRZOG OTPUŠTANJA STRAŽNJIH KOTAČA**

- Stražnji kotači od 24” mogu se lako ukloniti zahvaljujući funkciji brzog otpuštanja, što omogućuje uporabu stolca kao stolca za tuširanje ili WC. Za uklanjanje stražnjih kotača pritisnite crni poklopac mehanizma brzog otpuštanja (K) na kotaču i izvucite kotač.
- Za ponovno postavljanje kotača pritisnite crni poklopac mehanizma i umetnite ga natrag u otvor na stražnjem okviru.

**KOČNICE**

- Za zaključavanje prednjih kotača pritisnite pedale nogom prema dolje. Za otključavanje kotača podignite pedalu prema gore.
- Za zaključavanje stražnjih kotača povucite ručicu parkirne kočnice prema naprijed. Za otključavanje povucite ručicu u suprotnom smjeru.

**SJEDANJE NA STOLAC**

- Prilikom sjedanja, ustajanja, promjene položaja ili izlaska sa stolca obavezno zaključajte kočnice.
- Tijekom premještanja stolac treba postaviti što bliže mjestu prijenosa. Stolac treba dodirivati krevet ili sjedalo na koje se korisnik premješta. Ako se korisnik ne može samostalno premjestiti, potrebno ga je prebaciti uz pomoć druge osobe.
- Korisnik treba sjediti što dublje u sredini sjedala kako bi se izbjegla nestabilnost stolca.
- Ne stajati na oslonac za noge prilikom sjedanja ili ustajanja – može doći do oštećenja.

## 4. Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Ukupna širina | 68,5 cm |
| Unutarnja širina | 50 cm |
| Ukupna dubina | 104 cm |
| Visina sjedala | 52 cm |

| | |
|---|---|
| Ukupna visina | 100 cm* |
| Dimenzije sjedala | 50 x 45 cm |
| Težina | 22 kg |
| Maksimalna nosivost | 120 kg |
| Boja okvira | bijela |

** visina izmjerena s postavljenim stražnjim kotačima od 24”*

## 5. Napomene

**Timago International Group ne snosi odgovornost za nepravilno korištenje proizvoda ili nepoštivanje sigurnosnih propisa.**

## 6. Čišćenje i održavanje

Redovito provodite održavanje dijelova stolca:

- Sjedalo se može očistiti vlažnom krpom i hladnom ili toplom vodom bez upotrebe deterdženata. Tvrdokorne mrlje mogu se ukloniti spužvom.
- Plastični dijelovi trebaju se čistiti vlažnom krpom uz upotrebu odgovarajućih sredstava za čišćenje plastike. U tom slučaju pridržavajte se uputa proizvođača i sigurnosnih mjera.
- Nakon svake uporabe ispraznite i dezinficirajte sanitarnu posudu i sjedalo. Koristite sredstva za čišćenje prema preporukama proizvođača.

## 7. Uvjeti skladištenja i transporta

Proizvod ne smije biti izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti, vodi ili vlazi.

## 8. Jamstvene informacije

Svi proizvodi koje distribuira naša tvrtka pokriveni su jamstvom, čiji su uvjeti opisani u jamstvenom listu dostupnom na našoj web stranici. Molimo kontaktirajte trgovca od kojeg ste kupili proizvod. Imajte na umu da za potrebe jamstva trebate zadržati dokaz o kupnji (račun ili faktura).

## 9. Oznake

| | | | |
|---|---|---|---|
| REF | Referentni broj |  | Proizvođač |
| LOT | LOT broj | UDI | UDI kod |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SN | Serijski broj | MD | Medicinski uređaj |
|  | Napomena |  | Molimo pročitajte upute |
| CE | Proizvođač je provjerio usklađenost s osnovnim zahtjevima za medicinske uređaje. | | |

Naša cjelokupna linija proizvoda dostupna je kod naših distributera. Saznajte više na: **www.timago.com**. Hvala što ste odabrali Timago!

**Timago International Group**
Ossowski Sp. k.
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com

CE MD

**10/2025 (I)**