UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Jastuk za invalidska kolica
Šifra proizvoda: SitWELL
Jastuk za invalidska kolica
Šifra proizvoda: ErgoTIM



Prije upotrebe proizvoda pročitajte ove upute. Upute sadrže informacije potrebne za sigurnu i pravilnu upotrebu proizvoda te o održavanju i čišćenju. Upotreba proizvoda suprotno uputama može dovesti do ozbiljnih komplikacija. Upute treba čuvati na lako dostupnom mjestu.

1. Karakteristike

Jastuk je izrađen od poliuretanske pjene i dolazi s vodootpornim, paropropusnim navlakom na patentni zatvarač.

2. Primjena

Jastuk se preporučuje za upotrebu u invalidskim kolicima, fotelji, stolici ili automobilu. Pruža udobnost, ravnomjernu raspodjelu težine i slobodan protok zraka, pomažući u prevenciji dekubitusa, hemoroida i varikoznih vena. Idealan je za svakodnevnu upotrebu i putovanja.

3. Kontraindikacije za upotrebu:

- Ne koristite uređaj ako nije kompatibilan s invalidskim kolicima.
- Ne koristite proizvod za namjenu koja nije predviđena.
- Ne koristite proizvod u blizini otvorenog plamena ili na vrućoj površini. To može ozbiljno ozlijediti korisnika i dovesti do ozbiljnog oštećenja zdravlja.

4. Napomene 

Proizvođač ne snosi odgovornost za nepravilno održavanje proizvoda, nepoštivanje sigurnosnih propisa i zlouporabu.

- Koža na mjestu spajanja mora biti čista.
- Potrebno je redovito provjeravati stanje kože pacijenta.

- Poziciju korisnika treba redovito mijenjati kako bi se spriječilo stvaranje žuljeva/rana.
- Ne koristite oštre predmete i opremu koja može oštetiti navlaku.
- Jastuk treba odgovarati veličini sjedala. Održavajte visoku higijenu navlake jastuka: čistite i/ili perite.

Ako proizvod više nije prikladan za uporabu, treba ga zbrinuti. Prije zbrinjavanja proizvod treba očistiti kako bi se uklonio rizik od kontaminacije.

Ako se pojave neželjeni simptomi kao posljedica uporabe uređaja, o tome obavijestite proizvođača i nadležno tijelo države članice u kojoj korisnik ili pacijent boravi.

5. Otpakiranje i postavljanje

- Kada primite pošiljku s jastukom, otvorite je pažljivo kako ne biste oštetili jastuk.
- Postavite jastuk na ravnu površinu i pričekajte da se sve deformacije nastale tijekom transporta vrate u izvorni oblik.
- Jastuk treba biti postavljen na pacijentovo sjedište kako bi u potpunosti obavljao svoje funkcije.

6. Tehnički podaci

PARAMETRI	MODEL	
	SitWELL	**ErgoTIM**
Duljina	40 cm	40 cm
Širina	43/46 cm	46 cm
Visina	5 cm	7 cm
Maksimalni nosivost	120 kg	120 kg
Konstrukcija	perforirana površina	"ježasta" površina

7. Čišćenje i održavanje

- Ne perite pjenasti umetak.

- Operite navlaku nakon uklanjanja pjenastog umetka blagim deterdžentom na temperaturama do 90 ° C.
- Navlaka se može sterilizirati na temperaturama do 120 °C.
- Navlaka se može dezinficirati otopinom alkohola do 60%.
- Ne koristite izbjeljivač ili kemikalije.
- Ne kemijski čistiti.
- Ne koristite kemikalije koje sadrže klor.
- Preporučuje se sušenje u rasklopljenom stanju.
- Ne dopustite teško zaprljanje.

8. Uvjeti skladištenja i prijevoza.

Proizvod ne smije biti izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti, vodi ili vlazi.

9. Informacije o jamstvu

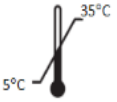
Svi proizvodi koje distribuira naša tvrtka pokriveni su jamstvom, čiji su uvjeti opisani u jamstvenoj kartici dostupnoj na našoj internetskoj stranici. Molimo kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Imajte na umu da se za potrebe jamstva mora sačuvati dokaz o kupnji (račun ili faktura).

ŽALBE SE NE ODNOSE NA:

- Mehanička oštećenja (abrazije, ogrebotine).
- Oštećenja nastala prirodnom uporabom.
- Kvarovi koji proizlaze iz nepravilnog odabira veličine jastuka za sjedalo
- Kvarovi nastali nepoštivanjem uvjeta uporabe ili načina čišćenja i održavanja.
- Promjena boje navlake.
- Udobnost upotrebe.

10. Oznake

REF	Referentni broj		Proizvođač
LOT	Broj serije	UDI	Jedinstveni identifikatori uređaja
SN	Serijski broj	MD	Medicinski uređaj

	Napomena		Molimo pročitajte upute
	Rok uporabe		Dopuštena temperatura skladištenja
	Čuvati na suhom mjestu		Zaštititi od sunčeve svjetlosti
	Ambalaža je reciklabilna		Ambalažu baciti u smeće
	Proizvođač je provjerio sukladnost sa zahtjevima za bitne medicinske uređaje.		



Timago International Group
Ossowski Sp. k.
ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland
T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com



05/2026(I)