UPUTE ZA UPORABU
Stepenica za kupaonicu
Šifra proizvoda: StepTim


1. Značajke

Stepenica za kupaonicu izrađena je od izdržljivog aluminija i PE materijala otpornog na vlagu. Ima podesive noge po visini i posebne gumene završetke koji osiguravaju bolju stabilnost.

Set sadrži: dijelove okvira (2 kom), montažne cijevi (2 kom), noge s protukliznim završecima (4 kom), stepenicu (osnovu), montažne vijke (2 kom).

Dijelovi stepenice:

- **A.** Stepenica (osnova)
- **B.** Noge s podešavanjem visine
- **C.** Protuklizni završeci
- **D.** Montažni vijak
- **E.** Okvir

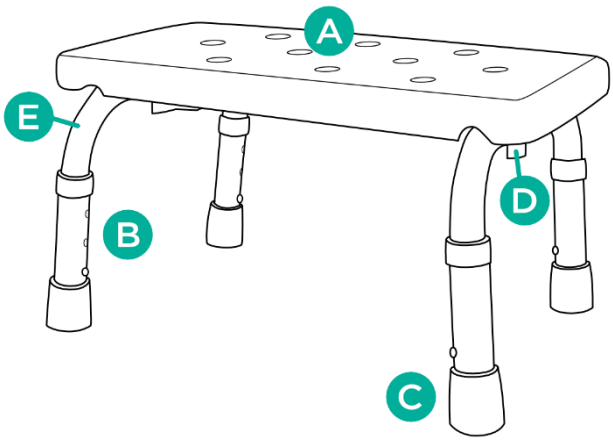

2. Namjena

Stepenica za kupaonicu pomoćna je oprema koja pomaže korisniku pri obavljanju higijenskih aktivnosti. Preporučuje se osobama sa smanjenom pokretljivošću kojima je otežano samostalno obavljanje svakodnevnih aktivnosti. Namijenjena je za uporabu u kupaonicama i drugim vlažnim prostorijama, kod kuće i u bolnicama.

3. Sastavljanje

Korak 1. Spojite montažne cijevi s dijelovima okvira pomoću sigurnosnih klinova.
Korak 2. Pričvrstite dijelove okvira pomoću montažnih vijaka na donji dio stepenice.
Korak 3. Spojite noge s okvirom i osigurajte ih sigurnosnim klinovima na željenoj visini. Provjerite jesu li sve noge na istoj visini.

PODEŠAVANJE VISINE

Za podešavanje pritisnite sigurnosni klin, odaberite željenu visinu i ponovno ga zaključajte. Sve noge moraju biti postavljene na istoj visini.

4. Tehnički podaci

Podešavanje visine	23-28 cm
Ukupna širina	27 cm
Ukupna duljina	41 cm
Maksimalna nosivost	150 kg

5. Napomene

Timago International Group ne snosi odgovornost za nepravilnu uporabu proizvoda, nepoštivanje sigurnosnih propisa i zlouporabu.

6. Održavanje

Stepenicu redovito čistite koristeći samo vodu, spužvu i blage deterdžente za plastične materijale, poput sapuna. Dobro osušite.


7. Uvjeti skladištenja i transporta

Proizvod ne smije biti izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti, vodi ili vlazi.

8. Jamstvene informacije

Svi proizvodi koje distribuira naša tvrtka pokriveni su jamstvom, čiji su uvjeti opisani u jamstvenom listu dostupnom na našoj web stranici. Molimo kontaktirajte trgovca od kojeg ste kupili proizvod. Imajte na umu da za potrebe jamstva trebate zadržati dokaz o kupnji (račun ili faktura).

9. Oznake

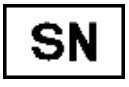	Referentni broj		Proizvođač
	LOT broj		UDI kod
	Serijski broj		Medicinski uređaj
	Napomena		Molimo pročitajte upute

CE	Proizvođač je provjerio usklađenost s osnovnim zahtjevima za medicinske uređaje.

Naša cjelokupna linija proizvoda dostupna je kod naših distributera. Saznajte više na: **www.timago.com**. Hvala što ste odabrali Timago!

Timago International Group
Ossowski Sp. k.
ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland
T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com

CE MD

10/2025(I)