KORSNIČKE UPUTE
Antidekubitalni pjenasti jastuk s rupom
Šifra proizvoda: SUPPORT TIM
Ortopedski jastuk za sjedenje s rashladnim gelom
Šifra proizvoda: COOLING TIM

1. Dizajn

SUPPORT TIM

Specijalni jastuk od memorijske pjene poboljšava udobnost sjedenja, pruža potporu i rasterećuje kralježnicu i zdjelicu, smanjujući rizik od dekubitusa. Jastuk je opremljen navlakom s patentnim zatvaračem.

COOLING TIM

Zahvaljujući svojoj profiliranoj strukturi i upotrebi memorijske pjene, jastuk pruža udobnost pri sjedenju kao i fiziološku potporu kralježnici. Rashladni gel umetak omogućuje učinkovit odvod topline i izjednačavanje tjelesne temperature korisnika dok sjedi. Jastuk je opremljen navlakom s patentnim zatvaračem

2. Namjena i preporuke

SUPPORT TIM

Antidekubitalni pjenasti jastuk je preventivni proizvod namijenjen osobama kod kojih postoji rizik od razvoja dekubitusa. Primjenjuje se kod osoba koje dugo borave u sjedećem položaju i imaju poremećaje krvotoka u perifernom krvožilnom sustavu. Koristi se u prevenciji protiv dekubitusa. Prije uporabe posavjetujte se s liječnikom, rehabilitatorom ili fizioterapeutom.

COOLING TIM

Ortopedski jastuk za sjedenje s rashladnim gelom medicinski je proizvod namijenjen osobama koje imaju problema s mišićno-koštanim sustavom. Koristi se kod osoba koje dugo borave u sjedećem položaju i pate od poremećaja krvotoka i lumbalno-sakralne boli. Gel umetak pomaže u odvođenju topline s tijela i reguliranju temperature korisnika. Nije preporučljivo koristiti *izravno na golom tijelu*.

3. Kontraindikacije

Korisnici s težim bolestima ili trajnim promjenama u lumbalno-sakralnoj kralježnici trebaju se prije prve uporabe posavjetovati s liječnikom ili fizioterapeutom.

4. Napomene

Timago International Group ne snosi odgovornost za nepravilno održavanje proizvoda, nepoštivanje sigurnosnih pravila ili za korištenje koje nije u skladu s njegovom namjenom.

5. Tehnička specifikacija

Model	SUPPORT TIM	COOLING TIM
Dimenzije	39 x 39 x 8 cm	47 x 37 x 8 cm
Sastav	Navlaka Poliester 95% Elastan 5% Punjenje: Termoelastična pjena	Navlaka Poliester 100% Punjenje: Termoelastična pjena Gel umetak
Navlaka	Patentni zatvarač	Paropropustiva, patentni zatvarač
Boja	siva	crno-plava

6. Održavanje

- Navlaku perite ručno u mlakoj vodi, ne centrifugirajte, ne klorirajte, ne glačajte, ne izbjeljivajte, ne sušite u sušilici, ne čistite.
- Sušite na sobnoj temperaturi podalje od intenzivnih izvora topline**.**

Pažnja! Informacije o održavanju možete pronaći na obilježju tkanine**.**

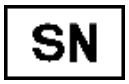
7. Uvjeti skladištenja i transporta

Proizvod ne smije biti izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti, vodi ili vlazi.

8. Jamstvene informacije

Svi proizvodi koje distribuira naša tvrtka pokriveni su jamstvom, čiji su uvjeti opisani u jamstvenom listu dostupnom na našoj web stranici. Molimo kontaktirajte trgovca od kojeg ste kupili proizvod. Imajte na umu da za potrebe jamstva trebate zadržati dokaz o kupnji (račun ili faktura).

9. Oznake

	Referentni broj		Proizvođač
	LOT broj		UDI kod
	Serijski broj		Medicinski uređaj
	Napomena		Molimo pročitajte upute
	Proizvođač je provjerio usklađenost s osnovnim zahtjevima za medicinske uređaje.		

Naša cjelokupna linija proizvoda dostupna je kod naših distributera. Saznajte više na: **www.timago.com**. Hvala što ste odabrali Timago!

Timago International Group
Ossowski Sp. k.
ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland
T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com

CE MD

10/2025(I)