# UPUTE ZA UPORABU
# Zavoj za ruku
# Šifra proizvoda: TGO-C OB 304

## 1. Značajke

Zavoj za ruku izrađen je od prozračnog materijala i sastoji se od prsnog remena koji se podešava pomoću čičak trake i kopče. Mekani jastučić na remenu štiti vrat od trenja i prekomjernog pritiska.

## 2. Primjena

Zavoj za ruku koristi se za potporu i rasterećenje gornjeg ekstremiteta tijekom nošenja gipsa nakon ozljeda ramenog zgloba.

**Indikacije za uporabu:**

- Potpora gornjem ekstremitetu u slučajevima ozljeda kostiju podlaktice, lakta i ramenog zgloba
- Tijekom procesa rehabilitacije

## 3. Kontraindikacije

**Ne koristiti u sljedećim slučajevima:**

- Ogrebotine kože
- Ekcem
- Rane i druge ozljede kože
- Nakon nanošenja zagrijavajućih gelova ili masti
- Individualne kontraindikacije koje je utvrdio liječnik tijekom razgovora i fizikalnog pregleda

## 4. Napomene

**Timago International Group ne snosi odgovornost za nepravilno održavanje proizvoda, nepoštivanje sigurnosnih propisa i nepravilnu uporabu.**

## 5. Upute za postavljanje

**Napomena!** Ne koristite zavoj ako primijetite bilo kakvo vidljivo ili opipljivo oštećenje.

**Napomena!** Pridržavajte se informacija sadržanih u ovim uputama prilikom postavljanja i podešavanja. Korisnici s jakom boli u gornjem ekstremitetu i

smanjenom pokretljivošću mogu trebati pomoć druge osobe koja ima odgovarajuće vještine.

- Zavoj stavite u sjedećem ili stojećem položaju.
- Stavite ruku u zavoj tako da lakat bude na stražnjem dijelu zavoja.
- Omotajte suprotno rame remenom odostraga prema naprijed. Podesite duljinu remena pomoću čičak trake i kopče tako da je ekstremitet postavljen pod odgovarajućim kutom, a jastučić za vrat smješten u području ramena.

**Napomena!** Imajte na umu da samo pravilno odabrana veličina imobilizatora jamči ispravnu stabilizaciju i rasterećenje gornjeg ekstremiteta.

## 6. Tehnički podaci

| Veličina | Opseg prsnog koša s rukom (cm) |
|---|---|
| XS | 45-59 |
| S | 60-75 |
| M | 76-91 |
| L | 92-107 |
| XL | >107 |

## 7. Održavanje

- Ručno pranje u mlakoj vodi. Ne centrifugirati, ne klorirati, ne glačati, ne izbjeljivati, ne čistiti kemijski, ne sušiti u sušilici.
- Pazite da je čičak traka pričvršćena kako ne bi oštetila materijal.
- Sušiti na sobnoj temperaturi, dalje od izvora topline.

**Napomena!** Održavanje information can be found on the material label.

**Napomena!** Nedostatak osobne higijene te uporaba neprikladnih sredstava za čišćenje mogu uzrokovati ogrebotine i druga oštećenja te pojačano znojenje i razvoj bakterijske flore.

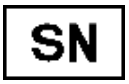
## 8. Uvjeti skladištenja i transporta

Proizvod ne smije biti izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti, vodi ili vlazi.

## 9. Jamstvene informacije

Svi proizvodi koje distribuira naša tvrtka pokriveni su jamstvom, čiji su uvjeti opisani u jamstvenom listu dostupnom na našoj web stranici. Molimo kontaktirajte trgovca od kojeg ste kupili proizvod. Imajte na umu da za potrebe jamstva trebate zadržati dokaz o kupnji (račun ili faktura).

## 10. Oznake

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Referentni broj |  | Proizvođač |
|  | LOT broj |  | UDI kod |
|  | Serijski broj |  | Medicinski uređaj |
|  | Napomena |  | Molimo pročitajte upute |
|  | Proizvođač je provjerio usklađenost s osnovnim zahtjevima za medicinske uređaje. | | |

Naša cjelokupna linija proizvoda dostupna je kod naših distributera. Saznajte više na: **www.timago.com**. Hvala što ste odabrali Timago!

**Timago International Group**
Ossowski Sp. k.
ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland
T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com

CE MD

10/2025(I)