UPUTE ZA UPORABU
Elastični steznik za gležanj
Šifra proizvoda: TGO-C OSS 612

1. Značajke

Elastični steznik za gležanj izrađen je od bešavnog ortopedskog kompresijskog materijala. Anatomski oblik je pravilno prilagođen zglobu gležnja, utječe na smjer kompresije i osigurava preciznu stabilizaciju. Moderan, prozračan materijal omogućuje slobodan protok zraka te uklanja višak topline i vlage, ograničavajući razvoj bakterijske flore.

2. Primjena

Steznik za gležanj koristi se za stabilizaciju zgloba i ublažavanje boli koja se javlja kod fizičkih naprezanja, osobito tijekom sportskih aktivnosti.

Indikacije za uporabu:

- Bolni sindrom zglobova uzrokovan istegnućima i mikroozljedama
- Manja uganuća i istegnuća ligamenata
- Kronična nestabilnost

Kontraindikacije:

Ne koristiti u sljedećim slučajevima:

- Ogrebotine kože
- Ekcem
- Rane i druge ozljede kože
- Nakon nanošenja zagrijavajućih gelova ili masti
- Individualne kontraindikacije koje je utvrdio liječnik tijekom razgovora i fizikalnog pregleda

3. Napomene

Timago International Group ne snosi odgovornost za nepravilno održavanje proizvoda, nepoštivanje sigurnosnih propisa i nepravilnu uporabu.

4. Upute za postavljanje

- Navucite elastični steznik odozdo do zgloba gležnja.

Napomena! Samo pravilno odabrana veličina jamči smanjenje boli.

Napomena! Dugotrajna uporaba može uzrokovati smanjenje mišićnog tonusa i disfunkciju uda.

5. Tehnički podaci

VELIČINA	OPSEG POTKOLJENICE (CM)
S	21-23
M	23-25
L	25-27
XL	27-29

6. Održavanje

- Ručno pranje u mlakoj vodi. Ne centrifugirati, ne klorirati, ne glačati, ne izbjeljivati, ne čistiti kemijski, ne sušiti u sušilici.
- Sušiti na sobnoj temperaturi, dalje od izvora topline.

Napomena! Održavanje information can be found on the material label.

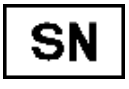
7. Uvjeti skladištenja i transporta

Proizvod ne smije biti izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti, vodi ili vlazi.

8. Jamstvene informacije

Svi proizvodi koje distribuira naša tvrtka pokriveni su jamstvom, čiji su uvjeti opisani u jamstvenom listu dostupnom na našoj web stranici. Molimo kontaktirajte trgovca od kojeg ste kupili proizvod. Imajte na umu da za potrebe jamstva trebate zadržati dokaz o kupnji (račun ili faktura).

9. Oznake

	Referentni broj		Proizvođač
	LOT broj		UDI kod
	Serijski broj		Medicinski uređaj

	Napomena		Molimo pročitajte upute
CE	Proizvođač je provjerio usklađenost s osnovnim zahtjevima za medicinske uređaje.		

Naša cjelokupna linija proizvoda dostupna je kod naših distributera. Saznajte više na: **www.timago.com**. Hvala što ste odabrali Timago!

Timago International Group
Ossowski Sp. k.
ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland
T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com

CE MD

10/2025(I)