KORSNIČKE UPUTE
Tuš stolica s naslonom i bočnim rukohvatima – TF sustav
Šifra proizvoda: TGR-R KP 355L

1. Izvedba
Stolica za tuširanje sastoji se od aluminijskog okvira, naslona i širokog sjedala izrađenih od izdržljivog PVC-a. Ima noge podesive visine, s protukliznim, gumenim navlakama i bočne rukohvate obložene pjenastim materijalom, što olakšava korištenje proizvoda. Posebno dizajnirani gumeni nastavci nogu učinkovito sprječavaju klizanje na mokrim površinama. Stolica je dodatno opremljena TF sustavom za jednostavno postavljanje.

Set sadrži: sjedalo s bazom stolice, noge podesive visine - 4 komada**,** bočne rukohvate - 2 komada**,** naslon za leđa**,** cijevi za montažu naslona - 2 komada**,** cijevi baze stolice – 2 komada**,** kratke montažne vijke (leptir vijci) - 5 komada**,** duge montažne vijke (leptir vijci) - 4 komada.

Sastavni dijelovi:

- **A.** naslon
- **B.** cijev za montažu naslona
- **C.** sjedalo
- **D.** cijev baze stolice
- **E.** bočni rukohvat
- **F.** osigurač- zatik za fiksiranje rukohvata
- **G.** noga podesiva po visini - TF sustav
- **H.** protuklizna navlaka



2. Primjena
Stolica za tuširanje je pomoćna oprema koja korisniku olakšava obavljanje higijenskih radnji. Preporučuje se osobama smanjene pokretljivosti, kod kojih je obavljanje svakodnevnih aktivnosti onemogućeno ili otežano. Stolica se preporučuje za korištenje pod tušem, u kadi, kupaonici i drugim vlažnim prostorijama, kod kuće i u bolnicama.

3. Montaža
Korak 1. Sastavite naslon s cijevima naslona pomoću četiri pričvrsna vijka (krilasti vijci).

Korak 2. Sastavite cijevi naslona u montažne otvore koji se nalaze ispod sjedala dok klinovi za zaključavanje ne kliknu.
Korak 3. Stavite sastavljenu stolicu na noge.
Korak 4. Sastavite bočne rukohvate u otvore za montažu koji se nalaze na vanjskoj strani sjedala.

PODEŠAVANJE VISINE
Kako biste podesili visinu stolice pritisnite osigurač-zatik za fiksiranje, odaberite odgovarajuću visinu noge, a zatim fiksirajte položaj pomoću osigurača-zatika za fiksiranje. Noge su podesive u koracima, svakih 2,5 cm. Pozor! Sve noge moraju biti postavljene na istoj razini.

4. Tehničke specifikacije

Širina	48 cm
Dubina	40 cm
Visina sjedala	37-49 cm
Ukupna visina	66-79 cm
Dimenzije sjedala	40 x 33 cm
Težina	3,1 kg
Maksimalno opterećenje	136 kg

5. Opaske i preporuke
Timago International Group ne snosi odgovornost za nepravilno korištenje stolice, nepridržavanje sigurnosnih pravila ili za korištenje suprotno namjeni.

6. Održavanje
- Stolicu treba redovito čistiti vodom, spužvom i blagim sredstvima za čišćenje plastike, npr. sapunom ili nježnim deterdžentima koji imaju certifikat Nacionalnog zavoda za higijenu i obrisati nakon svake uporabe.
- **Ne koristite** za čišćenje**:** jake deterdžente, abrazivna sredstva, izbjeljivače, benzin ili bilo koja otapala za čišćenje (to može dovesti do oštećenja okvira, materijala i, posljedično, gubitka prava na jamstvo).
- **Treba redovito provjeravati:** zategnutost leptir vijaka, stanje osigurača - zatika za fiksiranje i stanje cijevi. Preporučuje se redovito provjeravati gumene nastavake. U slučaju istrošenosti, zamijenite nastavak novim.

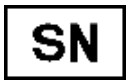
7. Uvjeti skladištenja i prijevoza

Proizvod ne smije biti izložen izravnom djelovanju sunčevih zraka, vode ili vlage.

8. Informacije o jamstvu

Proizvod je pokriven jamstvom čiji su uvjeti opisani u jamstvenom listu koji ste primili. Za potrebe jamstva, čuvajte svoj dokaz o kupnji (račun ili fakturu).

9. Oznake

	Referentni broj		Proizvođač
	Broj lota		Datum proizvodnje
	Serijski broj		Medicinski proizvod
	Pozor		Pročitaj upute
	Proizvođač je izvršio ocjenu sukladnosti s bitnim zahtjevima za medicinske proizvode.		

Cjelokupna ponuda je dostupna kod naših distributera. Saznajte više na **www.timago.com.** Hvala što ste odabrali Timago!

Timago International Group
Ossowski Sp. k.
ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland
T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com

CE MD

03/2026(I)