PRIRUČNIK ZA UPOTREBU
Čelični rolator s 4 kotača
Šifra proizvoda: TGR-R RS 880

1. Karakteristike

Sklopivi rolator na 4 kotača izrađen je od čeličnog okvira premazanog prahom. Proizvod je opremljen ručkama podesivim po visini s anatomskim rukohvatima, tapeciranim sjedalom, mekim naslonom za leđa, uklonjivom košarom i kočnicama s mehanizmom za zaključavanje. Ima kotače uskog presjeka promjera 8''.

Set uključuje: dvije ručke s kočnicama, okvir sa sjedalom, naslon za leđa, košaru, ručke za zaključavanje – 2 kom.

Elementi rolatora:

- **A.** Rukohvat
- **B.** Parkirna kočnica
- **C.** Gumb za zaključavanje
- **D.** Sajle za kočnice
- **E.** Naslon za leđa
- **F.** Zatik za zaključavanje
- **G.** Bočna prečka
- **H.** Zglob bočne prečke
- **I.** Traka za sklopivi rolator
- **J.** Košara
- **K.** Gornje podešavanje kočnice
- **L.** Donje podešavanje kočnice



2. Primjena

Rolator je namijenjen osobama smanjene pokretljivosti kojima je potrebna stabilna potpora i pomoć pri hodu. Preporučuje se i starijim osobama kao pomoć pri održavanju ravnoteže, poboljšanju udobnosti hodanja i sigurnosti od pada. Korištenje rolatora pozitivno utječe na povratak aktivnosti osoba s problemima lokomocije i naginjanja u

uspravni položaj. Jamči bolju stabilizaciju, potporu i sigurnost tijekom hodanja.

3. Skupština

Rasklapanje i sklapanje rolatora

- Za rasklapanje rolatora, pritisnite bočnu prečku koja se nalazi ispod sjedala dok se šarke potpuno ne rasklope. Zatim pričvrstite ručke u otvore za montažu i odaberite odgovarajuću visinu pritezanjem gumba za zaključavanje. Sajle kočnice treba postaviti naprijed. Naslonite sjedalo na rasklopljeni okvir.
- Pričvrstite naslon za leđa u otvore za montažu na prednjoj strani rolatora dok se klinovi ne zaključaju.
- Košara se može objesiti na okvir.
- Skinite plastično kućište s kotača.
- Kako biste sklopili rolator za transport, uklonite košaru, spustite sjedalo i povucite prema gore remen koji spaja bočnu poprečnu šipku s okvirom dok se okvir potpuno ne sklopi.

Funkcija kočnica

Bilješka! Prilikom prve uporabe može biti potrebna pomoć treće osobe bez obzira na zdravstveno stanje korisnika.

- Kako biste zaustavili rolator, povucite ručicu kočnice prema gore i držite.
- Dok se zaustavljate ili koristite sjedalo, zaključajte kočnicu pritiskom ručke kočnice prema dolje.
- Za otpuštanje kočnice povucite ručicu kočnice prema gore.

Podešavanje visine ručki

Visina ručki mora biti podešena tako da korisnik može stajati uspravno, koliko god može, s ramenima u mirovanju i blago savijenim laktovima. Nije preporučljivo visi na rolatoru cijelom težinom tijela.

- Za podešavanje visine ručki, odvrnite gumbe za zaključavanje koji se nalaze na vanjskoj strani okvira, odaberite odgovarajuću visinu i zategnite gumbe za zaključavanje.

Bilješka! Ručke moraju biti postavljene na istoj razini.

Podešavanje kočnica

Bilješka! Prije prve uporabe provjerite stanje kočnica. Kada ručke kočnice ne koče jednako, treba ih podesiti.

Podešavanje gornje kočnice

Odvijte maticu kabela, povucite ga do odgovarajuće duljine i pričvrstite zatezanjem sigurnosnog vijka.

Podešavanje donje kočnice

Olabavite montažni vijak pomoću viljuškastog ključa, povucite crni kabel kočnice kako biste prilagodili napetost kabela, a zatim zategnite montažni vijak.

4. Tehnički podaci

Ukupna širina	60 cm
Ukupna dubina	73 cm
Dimenzije sjedala	30 cm x 30 cm
Visina sjedala od tla	53 cm
Ručke za podešavanje visine	81-93 cm
Težina	9,2 kg
Maksimalni kapacitet	135 kg
Maksimalni kapacitet košare	5 kg
Boja okvira	tamnoplava

5. Bilješke

Timago International Group ne snosi odgovornost za nepravilnu uporabu rolatora, nepoštivanje sigurnosnih propisa i zlouporabu.

6. Održavanje

Čišćenje

- Očistite okvir vlažnom krpom i temeljito osušite.
- Nemojte koristiti jaka sredstva za poliranje zbog oštećenja zaštitnih premaza.
- Redovito čistite od prljavštine pokretne dijelove rolatora (šarke, stezne vijke, brave).

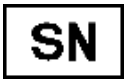
7. Uvjeti skladištenja i transporta

Proizvod ne smije biti izložen izravnom djelovanju sunčeve svjetlosti, vode ili vlage.

8. Podaci o jamstvu

Proizvod je pokriven jamstvom čiji su uvjeti opisani u jamstvenom listu. Za potrebe jamstva, čuvajte svoj dokaz o kupnji (račun ili fakturu).

9. Oznake

	Referentni broj		Proizvođač
	Broj serije		Datum proizvodnje
	Serijski broj		Medicinski proizvod
	Pažnja		Proučite upute
	Ocijena proizvođača u pogledu sukladnosti s bitnim zahtjevima za medicinske proizvode.		

Kompletna ponuda dostupna je kod naših distributera.
Saznajte više na **www.timago.com.**
Hvala Vam što ste odabrali Timago!



Timago International Group
Ossowski Sp. k.
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com

CE MD

03/2025(I)