
KORSNIČKE UPUTE

Hodalica s potpornjem za podlaktice
Šifra proizvoda: TGR-R RS 8812

1. Karakteristike

Hodalica s potpornjem za podlaktice izrađena je od kromiranog čeličnog okvira. Opremljena je držačem za infuzijski stalak te podstavljenim osloncima za podlaktice s glatkim podešavanjem visine. Hodalica ima ručke od pjene, okretne kotače s kočnicama i uklonjivo sjedalo.

Set sadrži: okvir s kotačima, gornji stabilizacijski okvir, donji stabilizacijski okvir, oslonce za podlaktice, sjedalo, sigurnosne kopče (4 kom), montažne vijke (2 kom).

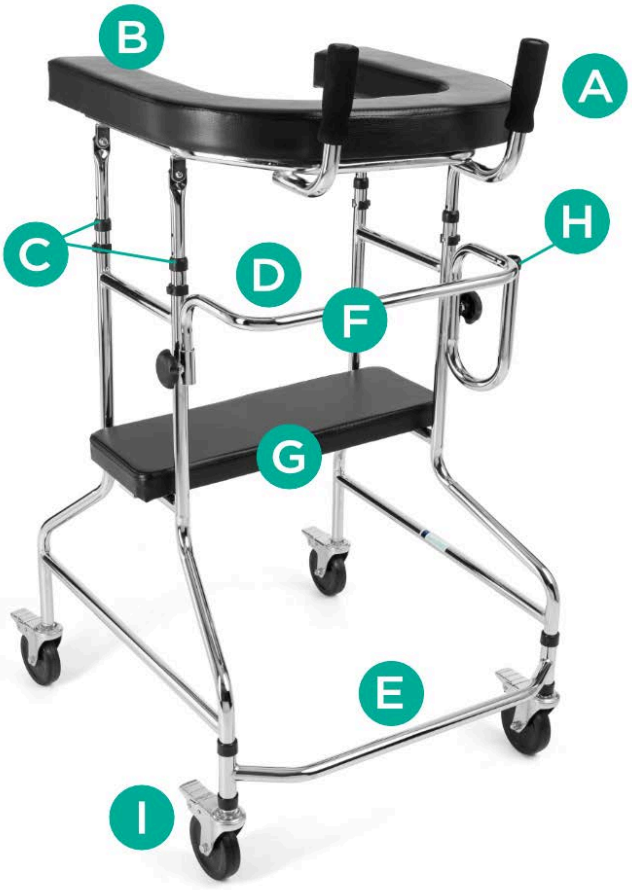

Dijelovi hodalice:

- **A.** Ručka
- **B.** Oslonac za podlakticu
- **C.** Sigurnosna kopča
- **D.** Gornji stabilizacijski okvir
- **E.** Donji stabilizacijski okvir
- **F.** Montažni vijak
- **G.** Sjedalo
- **H.** Držač za infuzijski stalak
- **I.** Kočnica (blokada)

2. Namjena

Hodalica je pomoćna oprema namijenjena pacijentima sa smanjenom pokretljivošću koji trebaju stabilnu potporu pri prijelazu u uspravan položaj i tijekom hoda. Posebno je namijenjena osobama s različitim motoričkim poremećajima, ograničenom pokretljivošću ili disfunkcijom i slabošću donjih ekstremiteta. Također se preporučuje starijim osobama kao pomoć u održavanju ravnoteže, poboljšanju udobnosti hoda i sprječavanju padova. Njezina upotreba pozitivno utječe na povratak aktivnosti kod osoba s poteškoćama u kretanju i promjeni položaja. Osigurava bolju stabilnost, potporu i sigurnost tijekom hoda.

3. Sastavljanje

RAZVLAČENJE / OTVARANJE

- Postavite hodalicu na pod. Učvrstite gornji stabilizacijski okvir u montažne otvore na prednjem dijelu okvira i zategnite montažne vijke.
- Postavite oslonce za podlaktice u montažne otvore na okviru i osigurajte ih sigurnosnim kopčama na željenoj visini.
- Postavite sjedalo na donji dio okvira. Sjedalo je namijenjeno za kratki odmor.

Napomena! Tijekom korištenja sjedala sve kočnice moraju biti zaključane.

- Tijekom hodanja sjedalo treba biti okačeno na vanjskoj strani okvira.
- Ako se koristi infuzijski stalak, postavite ga u držač na prednjem dijelu okvira.

PODEŠAVANJE VISINE OSLONACA ZA PODLAKTICE

Visina oslonaca treba biti podešena tako da korisnik može stajati što uspravnije, s opuštenim ramenima i udobno oslonjenim laktovima. Ne preporučuje se oslanjanje cijele tjelesne težine na hodalicu.

- Za podešavanje visine izvucite sigurnosnu kopču na vanjskoj strani okvira, odaberite odgovarajuću visinu i ponovno je učvrstite.

4. Tehnički podaci

Ukupna širina	63 cm
Ukupna dubina	76 cm
Dimenzije sjedala	56 x 20 cm
Visina sjedala od poda	54 cm
Podešavanje visine oslonaca	101-124 cm
Težina	10,8 kg
Maksimalna nosivost	100 kg

5. Napomene

Timago International Group ne preuzima odgovornost za nepravilno korištenje proizvoda, nepoštivanje sigurnosnih propisa ili zlouporabu.

6. Održavanje

Čišćenje

- Čistite okvir vlažnom krpom i temeljito osušite.
- Ne koristite jaka sredstva za poliranje, jer mogu oštetiti zaštitne premaze.
- Redovito čistite nečistoće s pokretnih dijelova hodalice (šarke, vijci za zaključavanje, kočnice).


7. Uvjeti skladištenja i transporta

Proizvod ne smije biti izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti, vodi ili vlazi.

8. Jamstvene informacije

Svi proizvodi koje distribuira naša tvrtka pokriveni su jamstvom, čiji su uvjeti opisani u jamstvenom listu dostupnom na našoj web stranici. Molimo kontaktirajte trgovca od kojeg ste kupili proizvod. Imajte na umu da za potrebe jamstva trebate zadržati dokaz o kupnji (račun ili faktura).

9. Oznake

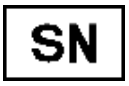	Referentni broj		Proizvođač
	LOT broj		UDI kod
	Serijski broj		Medicinski uređaj
	Napomena		Molimo pročitajte upute
	Proizvođač je provjerio usklađenost s osnovnim zahtjevima za medicinske uređaje.		

Naša cjelokupna linija proizvoda dostupna je kod naših distributera. Saznajte više na: **www.timago.com**. Hvala što ste odabrali Timago!

Timago International Group
Ossowski Sp. k.
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com

CE MD

12/2025 (II)