
UPUTE ZA UPORABU
Klupa za prijenos u kadi
Šifra proizvoda: TGR-R TW 330

1. Značajke

Klupa za prijenos izrađena je od PVC-a visoke čvrstoće otpornog na vlagu. Sastoji se od sjedala, ergonomske ručke i podesivih protukliznih nogu.

Dijelovi klupe:

- **A.** Sjedalo
- **B.** Ručka
- **C.** Podesive protuklizne noge

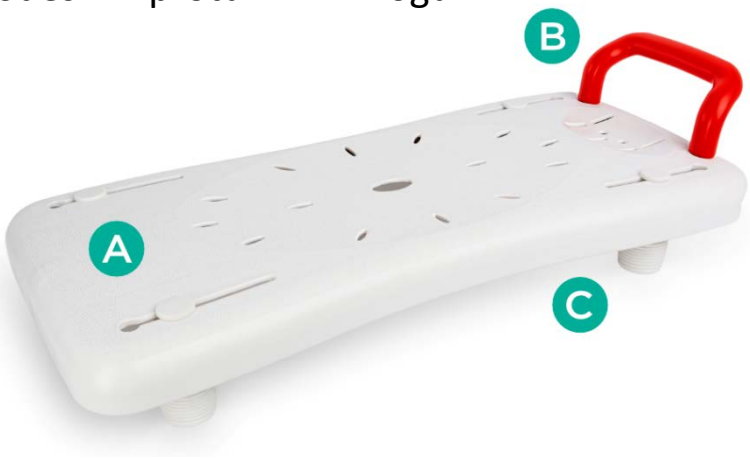

2. Namjena

Klupa za prijenos pomoćna je oprema koja pomaže korisniku pri obavljanju fizioloških aktivnosti. Stolica se preporučuje osobama sa smanjenom pokretljivošću kojima je otežano samostalno obavljanje svakodnevnih aktivnosti.

3. Sastavljanje

Korak 1. Spojite ručku i noge na sjedalo.
Korak 2. Podesite noge tako da odgovaraju širini kade.
Korak 3. Nakon toga učvrstite noge.
Napomena: Prije prve uporabe provjerite je li klupa za prijenos pravilno sastavljena.

4. Tehnički podaci

Ukupna širina	70 cm
Ukupna dubina	41 cm
Dimenzije sjedala	42 cm x 29 cm
Težina klupe	2,8 kg
Maksimalna nosivost	160 kg

5. Napomene

Timago International Group ne snosi odgovornost za nepravilnu uporabu proizvoda, nepoštivanje sigurnosnih propisa i zlouporabu.

6. Održavanje

- Klupu za prijenos redovito čistite koristeći samo vodu i blage deterdžente za plastične materijale. Dobro osušite.
- Nemojte koristiti jake deterdžente, abrazivna sredstva, izbjeljivač, benzin ili otapala (mogu uzrokovati oštećenje okvira, vidljive nedostatke i gubitak prava na jamstvo).
- Redovito vizualno pregledavajte sve dijelove proizvoda, uključujući: učvršćenost nogu, stanje sjedala i ručke.

7. Uvjeti skladištenja i transporta

Proizvod ne smije biti izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti, vodi ili vlazi.

8. Jamstvene informacije

Svi proizvodi koje distribuira naša tvrtka pokriveni su jamstvom, čiji su uvjeti opisani u jamstvenom listu dostupnom na našoj web stranici. Molimo kontaktirajte trgovca od kojeg ste kupili proizvod. Imajte na umu da za potrebe jamstva trebate zadržati dokaz o kupnji (račun ili faktura).

9. Oznake

REF	Referentni broj		Proizvođač
LOT	LOT broj	UDI	UDI kod
SN	Serijski broj	MD	Medicinski uređaj
	Napomena		Molimo pročitajte upute
CE	Proizvođač je provjerio usklađenost s osnovnim zahtjevima za medicinske uređaje.		

Naša cjelokupna linija proizvoda dostupna je kod naših distributera. Saznajte više na: **www.timago.com**. Hvala što ste odabrali Timago!

Timago International Group
Ossowski Sp. k.
ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland
T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com

CE MD

10/2025(I)