
UPUTE ZA UPORABU
Aluminijska invalidska kolica
Šifra proizvoda: TGR-R WA C2600

1. Karakteristike

Invalidska kolica izrađena su od laganog aluminijskog okvira ojačanog dvostrukom poprečnom šipkom. Dodatno tapecirani naslon i sjedalo izrađeni su od materijala koji propušta zrak. Preklopni nasloni za ruke izrađeni su u profiliranoj varijanti s odrezanim rubom. Invalidska kolica opremljena su funkcijom brzog otpuštanja koja omogućuje brzo rastavljanje kotača, pratećim kočnicama i sklopivim naslonom. Oslonci za noge dostupni su u standardnoj (okretni) ili podiznoj verziji naslona za noge. Invalidska kolica se isporučuju sa pneumatskim ili čvrstim stražnjim kotačima (22'') i čvrstim gumenim prednjim kotačima promjera 6''.

Set uključuje:

- Okvir sa sjedalom
- Oslonac za desnu nogu s podlogom
- Oslonac za lijevu nogu s podlogom
- Zaštitna traka
- Pumpa
- Set ključeva za invalidska kolica montaža/demontaža

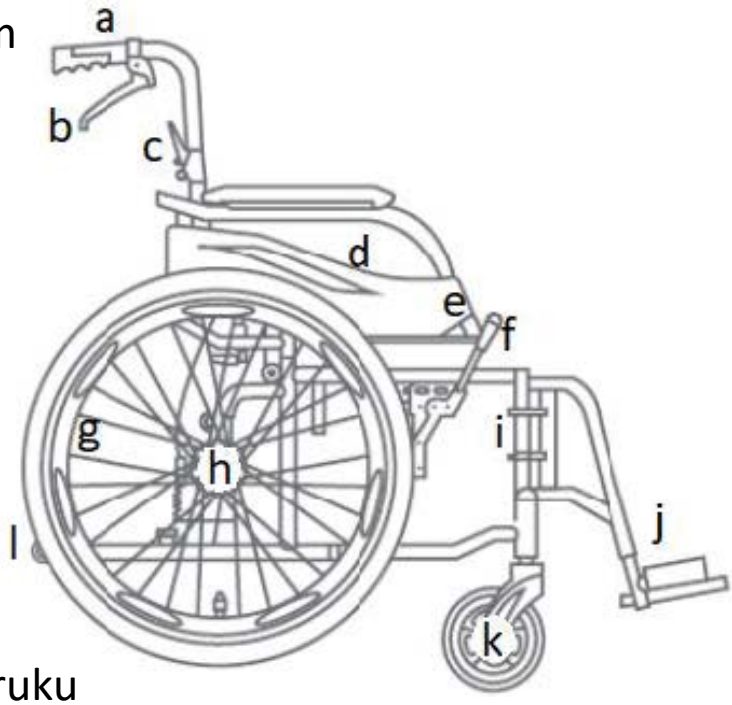

Elementi invalidskih kolica:

a. Stisak ruke
b. Prateća kočnica
c. Zaključavanje naslona
d. Naslon za ruke
e. Zatik za zaključavanje naslona za ruku
f. Blokada kotača
g. Handrim
h. Brzo otpuštanje

i. Montažni klin oslonca za noge
j. Oslonac za noge
k. Podešavanje težišta na prednjim kotačima
l. Kotači protiv prevrtanja

2. Primjena

Invalidska kolica namijenjena su osobama koje imaju problema s kretanjem bez pomoći te osobama s disfunkcijama i smanjenom pokretljivošću. Ova samohodna invalidska kolica može gurati i osoba u pratnji. Invalidska kolica su prikladna za unutarnju i vanjsku upotrebu.

3. Skupština

RASKLAPANJE I SASTAVLJANJE

Korak 1. Rasklapanje invalidskih kolica

Postavite invalidska kolica na tlo. Otklopite naslon invalidskih kolica pomoću rukohvata koji se nalaze na stražnjoj strani naslona. Zatim pritisnite prednji i stražnji rub sjedala tako da svi elementi pristaju.

Korak 2. Montaža oslonaca za noge

Sastavite desni i lijevi oslonac za noge u prednjem dijelu okvira tako da ih postavite na dva klina i okrenete ih prema unutra dok se ne zabrave.
NAPOMENA: Za prijevoz, ploče oslonca za noge su okrenute prema vanjskoj strani invalidskih kolica. Kako biste ih postavili u pravilan položaj, nakon postavljanja desnog i lijevog oslonca za noge, okrenite obje ploče oslonca za noge prema sredini invalidskih kolica.

Korak 3. Podešavanje nožnih ploča

Podesite desnu i lijevu ploču za stopala pritezanjem vijka koji se nalazi na dnu oslonaca za noge s uključenim ključem. Treba ostaviti odgovarajući prostor između podnožja i tla jer prenisko postavljeni podnožci mogu uzrokovati poteškoće u svladavanju takvih prepreka kao što je rubnjak. Namjestite podnožja tako da kut između trupa i bedara bude 90^{0} (korisniku je tada osiguran optimalan sjedeći položaj).

Korak 4. Sastavljanje zaštitne trake
Stavite zaštitnu traku na oslonac za noge jer sprječava da korisnikove noge skliznu ispod invalidskih kolica s ploča za noge.
Bilješka! Nemojte koristiti invalidska kolica bez zaštitnog remena.

Korak 5. Podešavanje kotača protiv prevrtanja
Kako biste podesili kotače protiv prevrtanja, koji se nalaze na stražnjoj strani invalidskih kolica, povucite bravu, pomaknite kotače prema gore ili dolje i odaberite odgovarajuću visinu.

Korak 6. Provjera sklopa kotača
Lagano podignite invalidska kolica i okrenite desni kotač, a zatim lijevi povlačenjem rukohvata i provjerite vrte li se kotači pravilno.

Korak 7. Sastavljanje jastuka i presvlake
Pričvrstite jastuk i presvlake za naslon pomoću čičak trake.
Po završetku gore navedenih aktivnosti, invalidska kolica su spremna za korištenje.

PREKLOPNI
Invalidska kolica se mogu sklopiti kako bi se lakše transportirala i spremala.

- Odmaknite ploče za noge i postavite ih u okomiti položaj (okomito na tlo).
- Uhvatite jastuk i presvlaku i odvojite je od čička.
- Za sklapanje okvira povucite sjedalo prema gore držeći prednji i stražnji rub u sredini, tako da okvir iskoči iz spojnih elemenata.
- Ako je potrebno, podignite kotače protiv prevrtanja na maksimalnu visinu.

FUNKCIJA PREKLOPANJA NASLONCA ZA RUKE

- Pritisnite gumb za zaključavanje koji se nalazi u prednjem dijelu naslona za ruku i gurnite naslon za ruku unatrag.

- Kako biste zatvorili naslon za ruku, gurnite ga prema dolje tako da gumb za zaključavanje klikne.

PUMPANJE KOTAČA

- Invalidska kolica bila su opremljena pneumatskim stražnjim kotačima promjera 22'' i okretnim, prednjim PU kotačima promjera 6'' (guma bez zračnice). Ne zaboravite kontrolirati tlak zraka u oba kotača i provjerite stanje guma u potrazi za ogrebotinama, posjekotinama ili oštećenjem površine.
- Kako biste uravnotežili tlak zraka u kotačima, odvrnite čep ventila, umetnite pumpu (uključenu u set) u ventil i pumpajte zrak.

BRAVE KOTAČA

- Za zaključavanje kotača, gurnite polugu za zaključavanje kotača prema naprijed dok se kotač potpuno ne blokira (odvojeno za lijevi i desni kotač). Imajte na umu da blokada kotača služi samo za zaključavanje kotača kada su invalidska kolica potpuno zaustavljena.

PODEŠAVANJE BRAVA KOTAČA

Ispravno zaključavanje blokade kotača ovisi o njegovoj prilagodbi i položaju. Ručka blokade kotača treba biti postavljena tako da papučica blokade kotača čvrsto blokira kotač i da se poluga ne suočava s pretjeranim otporom.

- U slučaju prevelikog otpora, lagano povucite ručicu prema naprijed tako da odvrnete vijak za zaključavanje koji se nalazi s druge strane blokade kotača (s unutarnje strane kolica). Postavite papučicu za blokadu kotača u takav položaj da blokada kotača blokira kotač lako i bez otpora.
- Ako papučica za zaključavanje kotača ne dodiruje ili ne zaključava dovoljno kotač, slijedite gornje upute pomicanjem ručke u suprotnom smjeru.

PRATEĆE KOČNICE

Poluge kočnica nalaze se iza naslona, ispod rukohvata s desne i lijeve strane, a sajlom su povezane s blokadom kotača.

- Kako biste aktivirali blokadu kočenja ili zaustavljanja u nuždi, stisnite polugu kočnice, a kako biste otpustili kočnicu, spustite poluge. Ovu aktivnost izvodite glatko i s odgovarajućom snagom.

Bilješka! Ove kočnice ne smiju se koristiti za usporavanje invalidskih kolica. Ako se često koriste u tu svrhu, mogu uzrokovati habanje gume što neće biti pokriveno uvjetima jamstva.

PREKLOPIV NASLON

- Za preklapanje naslona, istovremeno povucite prema dolje elemente za zaključavanje koji se nalaze ispod rukohvata na stražnjoj strani naslona.

SIGURNOSNI POJAS

- Pojas, koji je uključen u standardnu opremu, štiti trup u slučajevima kada korisnik sklizne s kolica ili nije u mogućnosti samostalno zadržati pravilan položaj. Pojas se kopča pomoću kopče.

4. Tehnički podaci

Ukupna širina	61-66 cm
Unutarnja širina	43, 46, 48 cm
Ukupna dubina	110 cm
Visina sjedala od tla	46 cm
Ukupna visina	88 cm
Dimenzije sjedala	42, 45, 47 cm x 41 cm
Težina	13,5-15,5 kg
Maksimalni kapacitet	115 kg
Sklopljena širina	36 cm
Boja okvira	srebro

Boja presvlake	CRNO-PLAVI (puni kotači) , CRNO-CRVENI (pneumatski kotači)

5. Bilješke

Timago International Group ne snosi odgovornost za nepravilno kretanje u invalidskim kolicima, nepridržavanje sigurnosnih propisa i zlouporabu.

6. Čišćenje i održavanje

Redovito održavajte komponente invalidskih kolica:

- Presvlake i jastuk se mogu čistiti vlažnom (ne mokrom) krpom i hladnom ili toplom vodom, bez upotrebe deterdženata. Teške mrlje možete očistiti spužvom. Ne natapajte presvlake previše. Sušiti dalje od izvora topline.
- Plastične elemente treba čistiti vlažnom krpom uz eventualno korištenje odgovarajućih deterdženata za plastične elemente. U tom slučaju slijedite upute proizvođača i sigurnosne mjere.

7. Uvjeti skladištenja i transporta

Uređaj ne smije biti izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti, vodi ili vlazi.

8. Informacije o jamstvu

Svi proizvodi koje distribuira naša tvrtka pokriveni su jamstvom, čiji su uvjeti opisani u jamstvenom listu dostupnom na našoj web stranici. Obratite se prodavaču od kojeg ste kupili proizvod. Imajte na umu da u svrhu jamstva treba sačuvati dokaz o kupnji (račun ili račun).

9. Oznake

	Referentni broj		Proizvođač
	Broj serije		Datum proizvodnje

SN	Serijski broj	MD	Medicinski proizvod
	Pozor		Pročitajte korisničke upute
CE	Proizvođač je izvršio ocjenu usklađenosti s glavnim zahtjevima vezanim za medicinske proizvode.		

Cijela ponuda je dostupna za Vas kod naših distributera.
Saznajte više na **www.timago.com**
Hvala što ste odabrali Timago!



Timago International Group Ossowski Sp.k.
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Poland

Tlf.: +48 33 499 50 00
Telefax: +48 33 499 50 11
E-mail: info@timago.com

CE MD

03/2025(I)