
USER MANUAL
Stair assist quad cane
Product code: DuoStep

1. Characteristics

The stair assist cane is made of durable, powder-coated aluminum. It has height-adjustable legs and foam handles. The construction of the cane allows it to be used either as a support for walking on stairs or for getting up from bed.

The set includes: top frame with handles, lower frame, legs with tips (2 pcs).

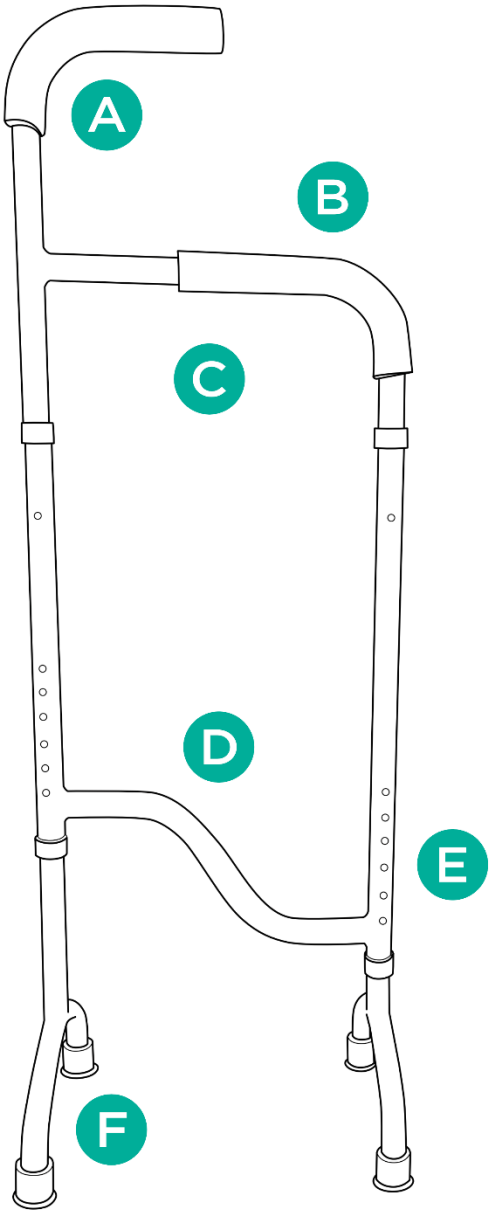

Elements of the cane:

- **A.** Handle
- **B.** Support handle
- **C.** Upper frame
- **D.** Lower frame
- **E.** Height adjustment
- **F.** Legs with anti-slip tips

2. Application

The stair assist cane is designed to provide support while walking on stairs or getting up from bed. The cane is recommended for people with reduced mobility that hinders the unassisted performance of daily living activities. The product is intended for use both during care in medical facilities and at home.

3. Assembly

Step 1. Connect the top frame (C) with the lower frame (D) using the locking pins.
Step 2. Insert the legs (F) into the openings on the lower frame (D). Select the desired height and lock them with pins.

HEIGHT ADJUSTMENT FOR LEGS

- To adjust the legs, press the locking pins located on the legs and select the appropriate height.
- If the cane is used on the stairs, choose the height according to the height of the steps (one of the legs should be placed one step higher than the other).
- If the cane is used as support for standing up from the bed, adjust the legs so that both are at the same height.

4. Technical data

Overall height for left leg	88-102 cm
Overall height for right leg	102-116 cm
Support handle height from the ground*	83,5 cm
Weight	1,00 kg
Max. weight capacity	136 kg

**measured when both legs are at the same height*

5. Notes

Timago International Group does not bear responsibility of improper use of the product, failure to comply safety regulations and misuse.

6. Maintenance

Clean the frame regularly using damp cloth, without use of ingredients. Dry thoroughly. Difficult stains can be cleaned with sponge.

7. Storage and transport conditions

Device should not be exposed to direct sunlight, water or moisture.

8. Warranty information

All products distributed by our company are covered by a warranty, the terms of which are described in the warranty card available on our website. Please contact the retailer from whom you purchased the product. Please, keep in mind that for warranty purposes, the proof of purchase (receipt or invoice) should be retained.

9. Labels

REF	Reference number		Manufacturer
LOT	LOT number	UDI	UDI code
SN	Serial number	MD	Medical device
	Note		Please read the instruction
CE	The manufacturer checked for compliance with essential medical devices requirements.		


Our complete line of products is available from our distributors. Learn more at: **www.timago.com**. Thank you for choosing Timago!

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Czwórnóg do pokonywania stopni
Kod produktu: DuoStep

1. Wykonanie

Czwórnóg wykonany jest z wytrzymałego aluminium malowanego proszkowo. Posiada regulację wysokości nóżek oraz piankowe uchwyty. Konstrukcja czwórnogu pozwala na wykorzystanie go jako pomocy wchodzenia po schodach lub do wstawania z łóżka.

Zestaw zawiera: górna rama z uchwytami, dolna rama, nóżki z nasadkami (2 sztuki).

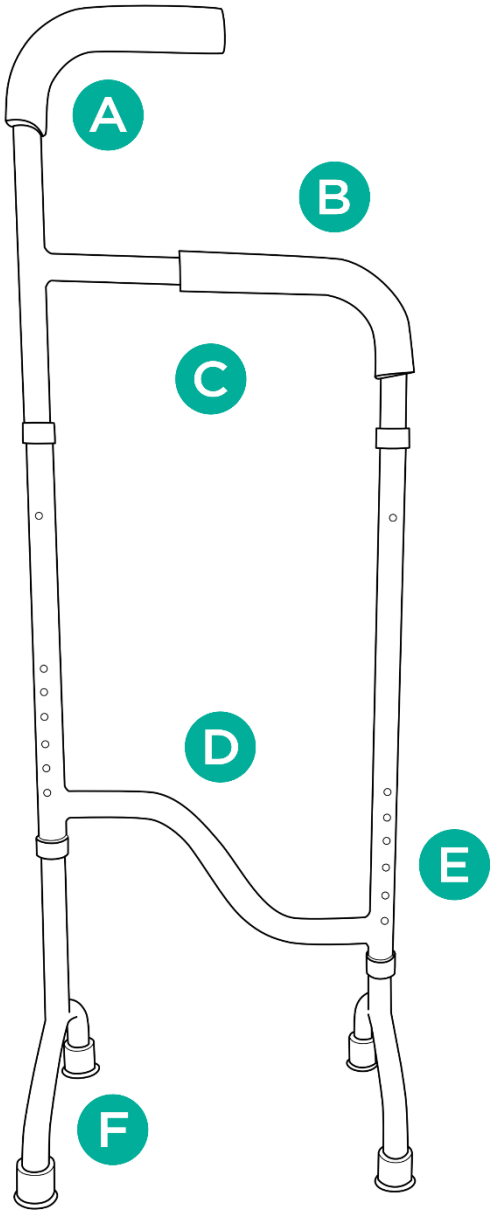

Elementy czwórnogu:

- **A.** Uchwyt
- **B.** Uchwyt pomocniczy
- **C.** Górna rama
- **D.** Dolna rama
- **E.** Regulacja wysokości
- **F.** Nóżki z nasadkami antypoślizgowymi

2. Zastosowanie

Czwórnóg do pokonywania stopni jest przeznaczony do używania podczas wchodzenia na schody lub przy łóżku pacjenta, jako wsparcie podczas wstawania. Polecany jest osobom o obniżonej sprawności ruchowej, którym stan zdrowia uniemożliwia bądź utrudnia samodzielne wykonywanie czynności życia codziennego. Czwórnóg przeznaczony jest do stosowania zarówno podczas opieki w placówkach medycznych jak i w warunkach domowych.

3. Montaż

Krok 1. Połączyć górną ramę (C) z dolną ramą (D) za pomocą pinów blokujących.
Krok 2. Zamocować nóżki z nasadkami (F) w otworach na dolnej ramie (D) i zabezpieczyć pinami blokującymi na wybranej wysokości.

REGULACJA WYSOKOŚCI NÓŻEK

- Aby wyregulować wysokość nóżek należy wcisnąć pin blokujący, wybrać odpowiednią wysokość nóżek, a następnie zablokować położenie pinem.
- Jeśli czwórnóg używany jest do wchodzenia po schodach, wybrać wysokość nóżek w zależności od wysokości stopnia (jedna z nóżek powinna znajdować się stopień wyżej od drugiej).
- Jeśli czwórnóg używany jest jako pomoc do wstawania z łóżka, wyregulować wysokość obu nóżek tak, aby znajdowały się na tej samej wysokości.

4. Specyfikacja techniczna

Regulacja wysokości lewej nóżki	88-102 cm
Regulacja wysokości prawej nóżki	102-116 cm
Wysokość uchwytu pomocniczego od ziemi*	83,5 cm
Waga	1,00 kg
Maks. obciążenie	136 kg

**liczone, gdy obie nóżki są na tej samej wysokości*

5. Uwagi i zalecenia

Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z wyrobu, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

6. Konserwacja

Ramę należy czyścić regularnie używając zmoczonej szmatki, bez środków czyszczących. Dokładnie wysuszyć przed użyciem. Trudne plamy można wyczyścić za pomocą gąbki.

7. Warunki przechowywania i transportu

Nie należy narażać wyrobu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wody i wilgoci. Pozostaw do wyschnięcia.

8. Dane dotyczące gwarancji

Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę są objęte gwarancją, której warunki zostały opisane w karcie gwarancyjnej dostępnej na naszej stronie internetowej. Prosimy o kontakt ze sprzedawcą, od którego zakupiono produkt.

Należy pamiętać, że do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

9. Oznaczenia

REF	Numer referencyjny		Producent
LOT	Numer serii	UDI	Kod UDI
SN	Numer seryjny	MD	Wyrób medyczny
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
CE	Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów. Dowiedz się więcej na **www.timago.com.** Dziękujemy za wybór Timago!

Timago International Group
Ossowski Sp. k.
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com

CE MD

07/2025 (I)