

ELITE-TIM

ALUMINIJSKA INVALIDSKA KOLICA

KORSNIČKE UPUTE

DIJELOVI INVALIDSKIH KOLICA



1. Ručka za guranje
2. Kočnica za pratitelja
3. Mehanizam preklapanja naslona
4. Naslon za ruku
5. Stezaljka za podešavanje naslona za ruku
6. Gumb za preklapanje naslona za ruku prema gore
7. Zakretni prednji kotač od 8 inča
8. Puni stražnji kotači od 24 inča s obručima za pokretanje
9. Zaštitna traka za listove
10. Ploča za stopalo
11. Poluga oslonca za noge
12. Sjedalo sa sigurnosnim pojasom
13. Naslon za leđa
14. Kotačići protiv prevrtanja
15. Podešavanje težišta
16. Mehanizam brzog skidanja
17. Džep za predmete
18. Magnetski držač štapa
19. Parkirna kočnica

1. Značajke

Invalidska kolica imaju lagani aluminijski okvir te sjedalo i naslon od izdržljive tkanine. Opremljena su preklopnim i podesivim naslonima za ruke, kočnicama za pratitelja i sklopivim naslonom. Imaju funkciju brzog skidanja i podešavanje težišta na prednjim i stražnjim kotačima. Sveobuhvatno podešavanje težišta na prednjim i stražnjim kotačima omogućuje uravnoteženu vožnju, veću stabilnost i bolju prilagodbu korisniku. Kolica imaju zaštitnu traku za listove, sigurnosni pojas i kotačiće protiv prevrtanja podesive po duljini. Kolica su dostupna s punim stražnjim kotačima od 24 inča i zakretnim prednjim kotačima od 8 inča te u trima širinama sjedala: 44, 46 i 49 cm. Prozračna mrežasta presvlaka omogućuje sklapanje kolica bez uklanjanja presvlake s okvira.

Komplet sadrži: okvir kolica s kotačima, presvlaku s džepom za predmete, oslonce za noge sa zaštitnim trakama, kotačiće protiv prevrtanja, držač štapa i komplet ključeva za montažu/demontažu.

2. Namjena

Invalidska kolica namijenjena su osobama koje se teško samostalno kreću te pacijentima s poremećajima kretanja i smanjenom pokretljivošću. Ova kolica na ručni pogon može gurati i pratitelj. Mogućnost prilagodbe postavki individualnim potrebama korisnika omogućuje bolju kontrolu, veću stabilnost te dinamičniju i aktivniju svakodnevnu vožnju. Kolica su prikladna za uporabu u zatvorenom i na otvorenom.

3. Montaža

Korak 1. Rasklapanje kolica

Postavite kolica na tlo. Uhvatite naslone za ruke i rasklopite kolica. Zatim pritisnite bočne rubove sjedala prema dolje kako bi svi dijelovi pravilno sjeli na svoje mjesto.

Korak 2. Naslon i sjedalo

Podignite naslon i zaključajte ga zasunima (3) ispod ručki. Postavite presvlaku s džepom na sjedalo i naslon kolica.

Korak 3. Oslonci za noge

Postavite oslonac za noge s vanjske strane okvira. Zatim ga, istodobno pritišćući polugu oslonca, okrenite prema unutra dok se ne zaključa.

Korak 4. Nasloni za ruke

Nasloni za ruke mogu se preklopiti prema gore. Za podizanje naslona pritisnite gumb na okviru kolica (5).

Korak 5. Podešavanje visine oslonaca za noge i naslona za ruke

- Podesite oslonce za noge priloženim ključevima za montažu. Odvijte vijak na okviru oslonca. Između ploča za stopala i tla mora ostati dovoljno prostora jer prenisko postavljene ploče mogu otežati svladavanje uzbrdica i rubnjaka.

Podesite ploče tako da kut između trupa i bedara bude 90^0 (optimalan sjedeći položaj korisnika).

- Za podešavanje naslona za ruke povucite stezaljku za podešavanje i odaberite željenu visinu. Oba naslona moraju biti na istoj visini.

Korak 6. Postavljanje zaštitnih traka

Pričvrstite zaštitne trake na oslonce za noge kako biste spriječili klizanje korisnikovih nogu s ploča za stopala.


Korak 7. Montaža držača štapa

Držač štapa može se postaviti na posebnu kopču pričvršćenu na okvir kolica (slika 1). Za potpunu montažu:

1. Raspakirajte držač štapa i alat za montažu (slika 2).
2. Pričvrstite zaštitnu pjenu na unutarnje strane obaju dijelova držača (slika 3).
3. Postavite držač oko štapa i pričvrstite ga vijcima (slika 4).

Pažnja! Preporučuje se najprije postaviti držač na štap.

4. Postavite držač sa štapom na posebnu pričvrsnu kopču (slika 1).

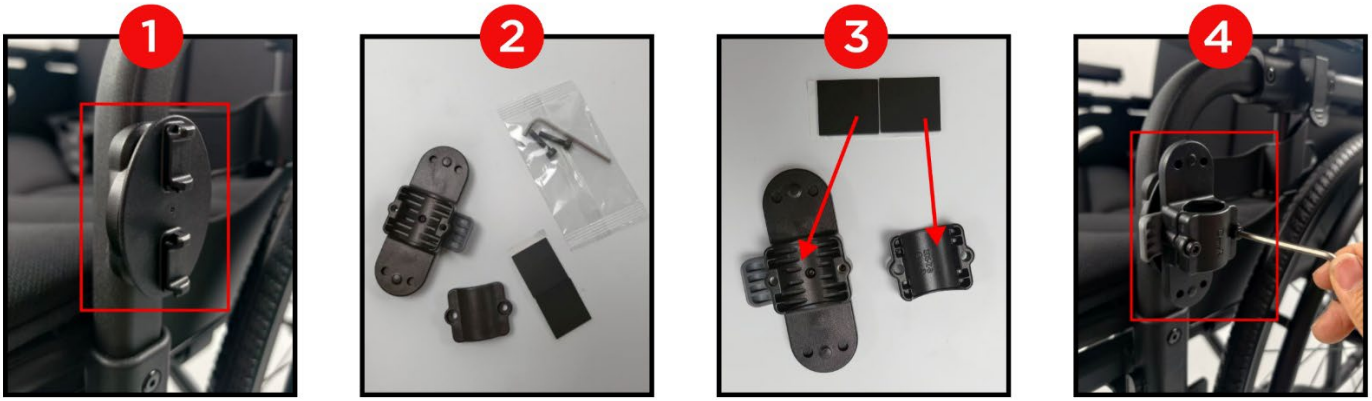

SKLAPANJE

Kolica se mogu sklopiti radi lakšeg prijevoza i pohrane: Zakrenite ploče za stopala u okomiti položaj ili ih uklonite. Uklonite presvlaku sjedala i naslona s džepom. Uhvatite sjedalo sprijeda i straga te ga podignite dok se okvir kolica ne sklopi.

FUNKCIJA PREKLAPANJA NASLONA

- Za preklapanje naslona istodobno pritisnite elemente za zaključavanje ispod ručki na stražnjoj strani naslona i spustite naslon prema dolje.

PARKIRNA KOČNICA

Za blokiranje kotača gurnite polugu prema naprijed dok kotač ne bude potpuno blokiran (zasebno za lijevi i desni kotač). Parkirna kočnica služi isključivo za blokiranje kotača kada su kolica potpuno zaustavljena.

KOČNICE ZA PRATITELJA

Poluge kočnica nalaze se iza naslona, ispod obiju ručki.

- Za zaustavljanje kolica stisnite poluge kočnica. Za otpuštanje kočnica pustite poluge. Kočite postupno i primjerenom silom.
- Kočnice imaju parkirne blokade. Stisnite gornju polugu dok ne čujete klik. Za otpuštanje parkirnih kočnica stisnite donju polugu.

PODEŠAVANJE PARKIRNE KOČNICE

Pravilno blokiranje ovisi o podešenosti i položaju kočnice. Poluga mora biti postavljena tako da kočna papuča čvrsto blokira kotač, a pomicanje poluge ne zahtijeva prekomjernu silu.

- Ako je otpor prevelik, otpustite pričvrsne vijke parkirne kočnice i pomaknite polugu malo prema naprijed. Podesite kočnu papuču tako da lako blokira kotač bez prekomjernog otpora.
- Ako kočna papuča ne dodiruje kotač ili ga ne blokira dovoljno, slijedite isti postupak, ali pomaknite polugu u suprotnom smjeru.

4. Prije uporabe

Korak 1. Provjera stanja kolica

Provjerite kočnice, konstrukciju i gume te jesu li svi dijelovi pravilno montirani i podešeni.

Pažnja! Nemojte koristiti kolica ako su neispravna.

Korak 2. Uporaba parkirnih kočnica

Blokirajte kotače prije sjedanja u kolica i ustajanja iz njih.

Korak 3. Ploče za stopala

Pri sjedanju i ustajanju ploče za stopala moraju biti u okomitom položaju. Nemojte ih koristiti kao oslonac jer postoji opasnost od pada. Spustite ih nakon premještanja korisnika.

Pažnja! Nemojte stajati na pločama za stopala jer ih možete oštetiti.

Korak 4. Sjedanje u kolica

Postavite kolica blizu pacijenta tako da dodiruju krevet ili drugo sjedalo. Ako se pacijent ne može samostalno premjestiti, pomognite mu pri premještanju.

Korak 5. Položaj korisnika

Korisnik treba sjediti uspravno, s koljenima savijenima pod kutom od 90°.

Kolica su spremna za uporabu.

5. Tehnički podatci

Dimenzije sjedala: 44/46/49 x 43 cm	**Visina sjedala od tla:** 49 cm
Ukupna širina: 61/63/66 cm	**Visina naslona za ruke od sjedala:** 23-29 cm
Ukupna dubina: 110cm	**Dimenzije sklopljenih kolica:** 83 x 26 x 77 cm

Ukupna visina: 95 cm	**Masa:** 11,60-12,00 kg
Najveća nosivost: 125 kg	

6. Napomene

Timago International Group ne odgovara za nepravilnu uporabu proizvoda i nepridržavanje sigurnosnih propisa.

7. Čišćenje i održavanje

Redovito održavajte dijelove kolica:

- Presvlaku i jastuk čistite vlažnom (ne mokrom) krpom te hladnom ili toplom vodom bez deterdženata. Tvrdokorne mrlje uklonite spužvom. Nemojte previše natapati presvlaku i sušite je podalje od izvora topline.
- Plastične dijelove čistite vlažnom krpom, po potrebi uz uporabu sredstava prikladnih za plastiku. U tom slučaju pridržavajte se sigurnosnih mjera i uputa proizvođača.

8. Uvjeti skladištenja i prijevoza

Proizvod ne izlažite izravnoj sunčevoj svjetlosti, vodi ili vlazi.


9. Informacije o jamstvu

Svi proizvodi koje distribuira naša tvrtka pokriveni su jamstvom. Uvjeti su navedeni u jamstvenom listu dostupnom na našoj mrežnoj stranici. Obratite se prodavatelju kod kojeg ste kupili proizvod. Za ostvarivanje jamstva sačuvajte dokaz o kupnji (račun ili fakturu).

10. Štetni događaji povezani s medicinskim proizvodima

Svaki ozbiljan štetni događaj povezan s medicinskim proizvodom mora se prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države članice Europske unije u kojoj korisnik ili pacijent ima prebivalište.

11. Oznake

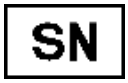	Kataloški broj		Proizvođač
	Broj serije LOT		UDI kod
	Serijski broj		Medicinski proizvod
	Pažnja		Pročitajte upute

CE	Proizvod ispunjava zakonske zahtjeve Europske unije za medicinske proizvode (MDR 2017/745)

Cijeli naš asortiman dostupan je kod naših distributera. Više na: **www.timago.com**. Hvala što ste odabrali Timago!

Timago International Group
Ossowski Sp. k.
ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland