

FLOW-TIM

ALUMINIJSKA INVALIDSKA KOLICA

KORSNIČKE UPUTE

DIJELOVI INVALIDSKIH KOLICA



1. Ručka za guranje
2. Vijak s ručkom za podešavanje visine
3. Kočnica za pratitelja
4. Zasun za preklapanje naslona
5. Naslon za leđa
6. Sjedalo sa sigurnosnim pojasom
7. Parkirna kočnica
8. Gumb za preklapanje naslona za ruku prema gore
9. Puni stražnji kotač od 22 inča s obručem za pokretanje*
10. Funkcija brzog skidanja
11. Podešavanje težišta – straga
12. Podešavanje težišta – sprijeda
13. Puni prednji kotač od 8 inča
14. Stezaljka oslonca za noge
15. Kotačić protiv prevrtanja
16. Ploča za stopalo sa zaštitnom trakom

** Dostupno i sa stražnjim kotačima od 24 inča (širina sjedala 46 cm)*

1. Značajke

Kolica imaju lagani aluminijski okvir te sjedalo i naslon od izdržljive tkanine. Opremljena su preklopnim naslonima za ruke, sklopivim naslonom, ručkama podesivima po visini i opcionalnom uklonjivom presvlakom od prozračne mreže. Imaju funkciju brzog skidanja i podešavanje težišta na prednjim i stražnjim kotačima. Sveobuhvatno podešavanje težišta na prednjim i stražnjim kotačima omogućuje uravnoteženu vožnju, veću stabilnost i bolju prilagodbu korisniku. Opremljena su kočnicama za pratitelja i parkirnim kočnicama. Dostupna su s punim stražnjim kotačima od 22 ili 24 inča i punim prednjim kotačima od 8 inča, u trima širinama sjedala: 43, 46 ili 48 cm.

Komplet sadrži: okvir s kotačima, sigurnosni pojas, ključeve za montažu, kotačiće protiv prevrtanja, oslonce za noge sa sigurnosnim trakama i mrežastu presvlaku.

2. Namjena

Invalidska kolica namijenjena su osobama koje se teško samostalno kreću te pacijentima s poremećajima kretanja i smanjenom pokretljivošću. Ova kolica na ručni pogon može gurati i pratitelj. Mogućnost prilagodbe postavki individualnim potrebama korisnika omogućuje bolju kontrolu, veću stabilnost te dinamičniju i aktivniju svakodnevnu vožnju. Kolica su prikladna za uporabu u zatvorenom i na otvorenom.

3. Montaža

Korak 1. Rasklapanje kolica

Postavite kolica na tlo. Uhvatite naslone za ruke i rasklopite kolica. Zatim pritisnite bočne rubove sjedala prema dolje kako bi svi dijelovi pravilno sjeli na svoje mjesto.

Korak 2. Naslon i podešavanje visine ručki

Podignite naslon dok ne čujete klik preklopnih zasuna (4). Postavite presvlaku na kolica i pričvrstite je čičak-trakama. Za podešavanje visine ručke odvijte vijak s ručkom (2) ispod nje i izvadite ga iz otvora. Odaberite odgovarajuću visinu, vratite vijak u otvor i zategnite ga. Ponovite s druge strane.

Pažnja! Ručke moraju biti na istoj visini.

Korak 3. Oslonci za noge

Postavite plastični prihvat oslonca za noge s vanjske strane okvira. Zatim umetnite montažni element oslonca u otvor na prednjoj strani okvira i okrenite oslonac prema unutra dok se ne zaključa.

Korak 4. Podešavanje visine oslonaca za noge

Podesite desni i lijevi oslonac zatezanjem vijka na cijevi oslonca priloženim ključem. Ostavite dovoljno prostora između ploča za stopala i tla jer prenisko postavljene ploče otežavaju svladavanje prepreka poput rubnjaka. Podesite ploče tako da kut između trupa i bedara bude 90^0 (optimalan sjedeći položaj).

SKLAPANJE

Kolica se mogu sklopiti radi lakšeg prijevoza i pohrane.


- Zakrenite ploče za stopala u okomiti položaj.
- Uklonite presvlaku sa sjedala i naslona.
- Uhvatite sjedalo sprijeda i straga te ga podignite dok se okvir kolica ne sklopi.

- Za preklapanje naslona istodobno pritisnite elemente za zaključavanje na naslonu i spustite ga prema dolje.

PODEŠAVANJE TEŽIŠTA NA PREDNJIM/STRAŽNJIM KOTAČIMA
(PODEŠAVANJE ZA PACIJENTE NAKON AMPUTACIJE DONJIH UDOVA)

Pažnja! Za stručno podešavanje obratite se prodavatelju ili osobi s odgovarajućim znanjem i kvalifikacijama. Nemojte samostalno podešavati nagib sjedala.

- **Podešavanje težišta na prednjim kotačima:** Odvijte vijke desnog i lijevog kotača priloženim ključevima. Zatim podesite nagib sjedala pomicanjem pričvrsne osovine kotača dolje ili gore, jednako na oba kotača.
- **Podešavanje težišta na stražnjim kotačima (gore/dolje):** Odvijte crne vijke (slika 1, vijci br. 1) desnog i lijevog kotača priloženim ključevima. Podesite nagib sjedala pomicanjem pričvrsne osovine gore ili dolje prema potrebama pacijenta, jednako na oba kotača.
- **Podešavanje težišta prema naprijed ili natrag:** Odvijte crne vijke (slika 1, vijci br. 1) na osovinama desnog i lijevog kotača priloženim ključevima. Okrenite modul pričvršćenja osovine kotača za 180° i montirajte ga na isto mjesto na suprotnoj strani okvira (slika 1). Zatim ga pričvrstite vijcima.

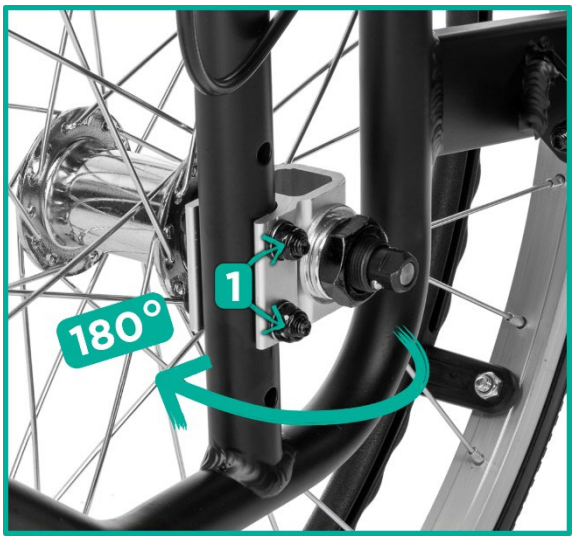

Slika 1

PARKIRNA KOČNICA

Za blokiranje kotača gurnite polugu prema naprijed dok kotač ne bude potpuno blokiran (zasebno za lijevi i desni kotač). Parkirna kočnica služi isključivo za blokiranje kotača kada su kolica potpuno zaustavljena.

PODEŠAVANJE PARKIRNE KOČNICE

Ispravan rad parkirne kočnice ovisi o njezinu podešenju i položaju. Mora biti postavljena na odgovarajućoj udaljenosti od stražnjeg kotača kako bi ga čvrsto blokirala bez prekomjernog otpora poluge.

- Ako je otpor prevelik, otpustite pričvrsne vijke parkirne kočnice i pomaknite polugu malo prema naprijed. Podesite kočnu papuču tako da lako blokira kotač bez prekomjernog otpora.

- Ako kočna papuča ne dodiruje kotač ili ga ne blokira dovoljno, slijedite isti postupak, ali pomaknite polugu u suprotnom smjeru.

KOČNICE ZA PRATITELJA

Poluge kočnica nalaze se iza naslona, ispod obiju ručki.

- Za zaustavljanje kolica stisnite poluge kočnica. Za otpuštanje kočnica pustite poluge. Kočite postupno i primjerenom silom.
- Kočnice imaju parkirne blokade. Za njihovo uključivanje stisnite polugu kočnice i izvucite element za zaključavanje.

4. Prije uporabe

Korak 1. Provjera stanja kolica

Provjerite kočnice, konstrukciju i gume te jesu li svi dijelovi pravilno montirani i podešeni.
Pažnja! Nemojte koristiti kolica ako su neispravna.

Korak 2. Uporaba parkirnih kočnica

Blokirajte kotače prije sjedanja u kolica i ustajanja iz njih.

Korak 3. Ploče za stopala

Pri sjedanju i ustajanju ploče za stopala moraju biti u okomitom položaju. Nemojte ih koristiti kao oslonac jer postoji opasnost od pada. Spustite ih nakon premještanja korisnika.
Pažnja! Nemojte stajati na pločama za stopala jer ih možete oštetiti.

Korak 4. Sjedanje u kolica

Postavite kolica blizu pacijenta tako da dodiruju krevet ili drugo sjedalo. Ako se pacijent ne može samostalno premjestiti, pomognite mu pri premještanju.

Korak 5. Položaj korisnika

Korisnik treba sjediti uspravno, s koljenima savijenima pod kutom od 90°.
Kolica su spremna za uporabu.

5. Tehnički podatci

Masa 43 (22”): 11,00 kg 46 (22”): 11,47 kg 46 (24”): 11,97 kg 48 (22”): 11,55 kg	**Ukupna širina:** 61 / 64 / 66 cm
	Dimenzije sjedala: 43 / 46 / 48 x 40 cm
	Ukupna dubina: 106 cm
	Ukupna visina: 100-106 cm
	Visina sjedala od tla: 50 cm
	Širina sklopljenih kolica: 106 x 29 x 92 cm
	Najveća nosivost: 115 kg

6. Napomene

Timago International Group ne odgovara za nepravilnu uporabu proizvoda i nepridržavanje sigurnosnih propisa.

7. Čišćenje i održavanje

Redovito održavajte dijelove kolica:

- Presvlaku i jastuk čistite vlažnom (ne mokrom) krpom i hladnom ili toplom vodom bez deterdženata. Tvrdokorne mrlje uklonite spužvom. Nemojte predugo namakati presvlaku. Ostavite je da se osuši.
- Plastične dijelove čistite vlažnom krpom, po potrebi uz uporabu sredstava prikladnih za plastiku.

8. Uvjeti skladištenja i prijevoza

Proizvod ne izlažite izravnoj sunčevoj svjetlosti, vodi ili vlazi.

9. Informacije o jamstvu

Svi proizvodi koje distribuira naša tvrtka pokriveni su jamstvom. Uvjeti su navedeni u jamstvenom listu dostupnom na našoj mrežnoj stranici. Obratite se prodavatelju kod kojeg ste kupili proizvod. Za ostvarivanje jamstva sačuvajte dokaz o kupnji (račun ili fakturu).

10. Štetni događaji povezani s medicinskim proizvodima

Svaki ozbiljan štetni događaj povezan s medicinskim proizvodom mora se prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države članice Europske unije u kojoj korisnik ili pacijent ima prebivalište.

11. Oznake

REF	Kataloški broj		Proizvođač
LOT	Broj serije LOT	UDI	UDI kod
SN	Serijski broj	MD	Medicinski proizvod
	Pažnja		Pročitajte upute
CE	Proizvod ispunjava zakonske zahtjeve Europske unije za medicinske proizvode (MDR 2017/745)		

Cijeli naš asortiman dostupan je kod naših distributera. Više na: **www.timago.com**.
Hvala što ste odabrali Timago!

Timago International Group
Ossowski Sp. k.
ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

TIMAGO.COM

+48 33 499 50 00
info@timago.com

MD CE

10/2026 (II)