INSTRUCTIONS FOR USE

Patella strap

Product code: TGO-C SR 516

1. Characteristics

Patella strap consists of a strap fastened by Velcro and a silicone pad which affects the patellar ligament with controlled pressure. The insets of the silicone pad perform a micro-massage while movements of knee joint reducing the pain. The strap relieves the patellar ligament and reduces the impact force of quadriceps femoris on tibial attachment.

2. Application

Patella strap is used in medical treatment in order to relief the ligament of the patella.

Indications for use:

- Tears and strains of tibial attachment of quadriceps femoris
- Pathological changes of the patella
- Fractures of the patella
- In non-invasive and preventive treatment of overloads and injuries

Contraindications:

Do not use in case of:

- Skin abrasion
- Eczema
- Wound and other skin injuries
- After application of warming gel or ointment
- Individual contraindications which were determined by the doctor during interview and physical examination

3. Notes

Timago International Group does not bear responsibility of improper

maintenance of the product, failure to comply safety regulations and misuse.

4. Fitting instruction

- Put the strap on with notch directed upwards. The silicone pad should be placed centrally under the knee joint and patella ligament. Wrap the knee joint around with a strap and fasten by Velcro.

Note! Only properly matched size guarantees reduction of pain.

Note! Long-term use may result in reduction of muscle tone and dysfunction of the limb.

5. Technical data

SIZE	UNIVERSAL

6. Maintenance

- Hand wash in warm water. Do not tumble, chlorinate, iron, bleach, dry clean, use tumble dryer.
- Ensure the Velcro is properly fastened in order not to damage the material.
- Dry at room temperature far from intensive heat source.

Note! Maintenance information can be found on the material label.

7. Storage and transport conditions

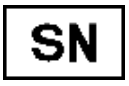
The product should not be exposed to direct sunlight.

8. Warranty information

All products distributed by our company are covered by a warranty, the terms of which are described in the warranty card available on our

website. Please contact the retailer from whom you purchased the product. Please, keep in mind that, for warranty purposes, the proof of purchase (receipt or invoice) should be retained.

9. Labels

	Reference number		Manufacturer
	LOT number		UDI code
	Serial number		Medical device
	Note		Please read the instruction
	The manufacturer checked for compliance with essential medical devices requirements.		

Our complete line of products is available from our distributors. Learn more at: **www.timago.com**. Thank you for choosing Timago!

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Opaska stabilizująca rzepkę
Kod produktu: TGO-C SR 516

1. Wykonanie

Opaska stabilizująca rzepkę składa się z taśmy zapinanej na rzep oraz silikonowej peloty oddziałującej kontrolowanym uciskiem na więzadło rzepki. Wypustki na pelocie silikonowej wykonują mikromasaż podczas ruchów w stawie kolanowym, wpływa to na zmniejszenie dolegliwości bólowych. Orteza odciąża więzadło rzepki oraz zmniejsza siłę oddziaływania mięśnia czworogłowego uda na przyczep piszczelowy.

2. Zastosowanie

Opaska stabilizująca rzepkę należy do grupy wyrobów medycznych wykorzystywanych w procesach leczniczych w celu odciążenia więzadła rzepki.

Wskazania do stosowania opaski:

- Naderwania i naciągnięcia przyczepu piszczelowego mięśnia czworogłowego uda
- Chorobowe zmiany rzepki
- Złamania rzepki
- W leczeniu zachowawczym oraz profilaktyce przeciążeń i urazów

3. Przeciwwskazania

Nie należy stosować w przypadku:

- Otarć naskórka,
- Egzem skórnych,
- Ran oraz innych uszkodzeń skóry,
- Po zastosowaniu żeli i maści rozgrzewających,
- Indywidualnych przeciwwskazań, które określone zostały przez lekarza w badaniu podmiotowym i przedmiotowym.

4. Uwagi

Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwą konserwację wyrobu, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

5. Sposób zakładania

- Opaskę należy założyć wycięciem w kierunku do góry tak aby silikonowa poduszka znajdowała się centralnie pod stawem kolanowym i więzadłem rzepki, następnie należy owinąć taśmę wokół stawu kolanowego i zapiąć opaskę na rzep.

Uwaga! Należy pamiętać że jedynie właściwie dobrany rozmiar opaski zmniejsza dolegliwości bólowe.

Uwaga! Długotrwałe stosowanie opaski może powodować obniżenie napięcia mięśniowego i upośledzenie funkcji kończyny.

6. Parametry techniczne

ROZMIAR	UNIWERSALNY

7. Konserwacja

- Opaskę należy prać ręcznie w letniej wodzie, nie wirować, nie chlorować, nie prasować, nie prać na sucho, nie wybielać, nie suszyć w suszarce bębnowej, nie czyścić chemicznie.
- Należy pamiętać, żeby w praniu rzep był dobrze dopięty, aby nie zniszczył materiału.
- Suszyć w temperaturze pokojowej z dala od intensywnych źródeł ciepła.

Uwaga! Informacje dotyczące konserwacji znajdują się na metce materiałowej.

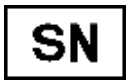
7. Warunki przechowywania i transportu

Nie należy narażać wyrobu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wody i wilgoci.

8. Dane dotyczące gwarancji

Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę są objęte gwarancją, której warunki zostały opisane w karcie gwarancyjnej dostępnej na naszej stronie internetowej. Prosimy o kontakt ze sprzedawcą, od którego zakupiono produkt. Należy pamiętać, że do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

9. Oznaczenia

	Numer referencyjny		Producent
	Numer serii		Kod UDI
	Numer seryjny		Wyrób medyczny
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
	Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów. Dowiedz się więcej na **www.timago.com.** Dziękujemy za wybór Timago!

Timago International Group
Ossowski Sp. k.
ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland
T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com

CE MD

09/2025(I)