USER MANUAL


Round shower chair, rotating seat, tool free

Product code: TGR-R KP-O 5021

1. Characteristics

The shower chair features an aluminium frame and a rotating seat made of durable PVC. Thanks to its height-adjustable legs, the chair can be adapted to the user's height, while anti-slip tips ensure greater stability and safety. Additionally, the chair is equipped with a Tool-Free (TF) system for easy assembly.

The set includes: seat**,** base tubes (2 pcs), height adjustable legs (4 pcs), mounting screws (5 pcs).

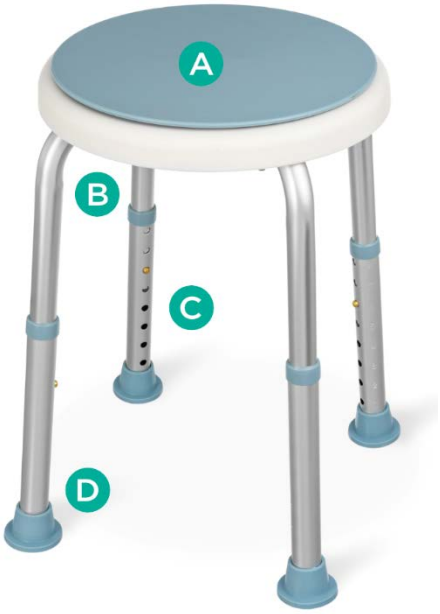

Elements of the shower chair:

- **A.** Seat
- **B.** Base tubes
- **C.** Height adjustment – locking pin
- **D.** Anti-sliding tips

2. Application

The shower chair is ancillary equipment which helps the user to perform hygienic activities. The chair is recommended to people with reduced mobility which prevents or hinders the unassisted performance of daily living activities. The chair can be used in the shower, in the bath, in bathrooms and other humid rooms at home and in hospitals.

3. Assembly

Step 1. Place seat upside down on a flat surface.

Step 2. Fix crossed base tubes with seat using four mounting screws with plastic and metal washers. Screw paler wing screw with washers in the middle.

Step 3. Join base tubes with legs.

HEIGHT ADJUSTMENT

- To adjust the height of the chair press the locking pin, select appropriate height of the leg and then lock it again, repeating steps on the other legs. The legs are adjustable in 2.5 cm increments.

Note! All legs must be set on the same height level.

4. Technical data

Height	34,5-52 cm
Seat diameter	32 cm
Weight	1,95 kg
Maximum capacity	110 kg

5. Notes

Timago International Group does not bear responsibility of improper use of the product, failure to comply safety regulations and misuse.

6. Maintenance

- Clean the shower chair regularly using only water, sponge and mild detergents for plastic materials such as soap. Dry thoroughly.
- **Do not use** for cleaning: strong detergents, abrasive agents, bleach, petrol or solvents (it may cause frame damage, visible defects and in consequence - loss of warranty rights).
- At least once every three months check condition of the tubes, locking screws and tightening of screws.
- It is recommended to check rubber tips regularly. In case of worn-out, replace the tips with the new ones.

7. Storage and transport conditions

The product should not be exposed to direct sunlight, water or moisture.

8. Warranty information

All products distributed by our company are covered by a warranty, the terms of which are described in the warranty card available on our website. Please contact the retailer from whom you purchased the product. Please, keep in mind that for warranty purposes, the proof of purchase (receipt or invoice) should be retained.

9. Labels

	Reference number		Manufacturer

LOT	LOT number	UDI	UDI code
SN	Serial number	MD	Medical device
	Note		Please read the instruction
CE	The manufacturer checked for compliance with essential medical devices requirements.		

Our complete line of products is available from our distributors. Learn more at: **www.timago.com**. Thank you for choosing Timago!


INSTRUKCJA OBSŁUGI

Taboret prysznicowy obrotowy z systemem TF
Kod produktu TGR-R KP-O 5021

1. Wykonanie

Taboret prysznicowy składa się z aluminiowej ramy oraz okrągłego obrotowego siedziska wykonanego z wytrzymałego PCV. Dzięki skokowej regulacji wysokości, posiada możliwość indywidualnego dostosowania do wzrostu pacjenta, a nasadki antypoślizgowe zapewniają większe bezpieczeństwo i stabilność. Dodatkowo taboret został wyposażony w system TF ułatwiający montaż.

Zestaw zawiera: siedzisko, rurki podstawy taboretu (2 szt.), nóżki z regulacją wysokości (4 szt.), śruby montażowe (5 szt.).

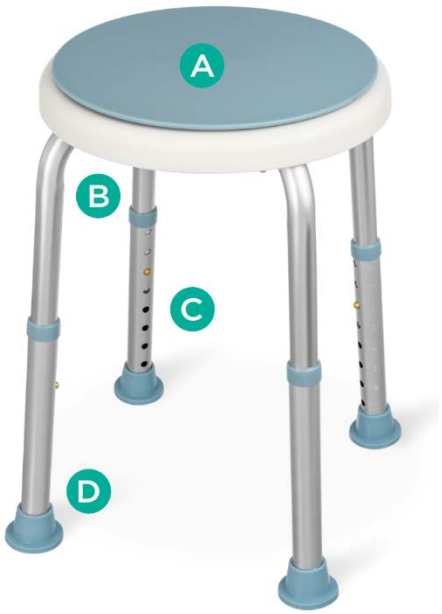

Części składowe taboretu:

- **A.** siedzisko
- **B.** rurki podstawy
- **C.** regulacja wysokości-sztyft blokujący
- **D.** nasadki antypoślizgowe

2. Zastosowanie

Taboret prysznicowy jest sprzętem pomocniczym ułatwiającym użytkownikowi wykonywanie czynności higienicznych. Zalecany jest osobom o obniżonej sprawności ruchowej, która uniemożliwia bądź utrudnia samodzielne wykonywanie czynności życia codziennego. Taboret polecany jest do stosowania pod prysznicem, w wannie, łazience i innych wilgotnych pomieszczeniach, w warunkach domowych i szpitalnych.

3. Montaż

Krok 1. Siedzisko taboretu należy położyć płasko na podłożu.
Krok 2. Następnie za pomocą śrub motylkowych z podkładkami zmontować skrzyżowane rurki podstawy do siedziska. Śrubę o jaśniejszym kolorze wraz z podkładkami należy wkręcić na środku.
Krok 3. Wsunąć nóżki na rurki podstawy i zablokować na wybranej wysokości.

REGULACJA WYSOKOŚCI

- Aby wyregulować wysokość taboretu należy wcisnąć pin blokujący, wybrać odpowiednią wysokość nóżki, a następnie zablokować. Nóżki regulowane są skokowo co 2,5 cm.

Uwaga! Piny we wszystkich nóżkach muszą być ustawione na tym samym poziomie.

4. Specyfikacja techniczna

Wysokość	34,5-52 cm
Średnica siedziska	32 cm
Waga	1,95 kg
Maksymalne obciążenie	110 kg

5. Uwagi i zalecenia

Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z produktu, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

6. Konserwacja

- Taboret należy czyścić regularnie używając wody, gąbki i łagodnych środków czyszczących do tworzyw sztucznych np. mydła lub delikatnych detergentów.
- **Nie należy używać** do czyszczenia: silnych detergentów, środków ściernych, wybielaczy, benzyny ani żadnych rozpuszczalników.
- Należy systematycznie sprawdzać: dokręcenie śrub motylkowych, stan pinów blokujących, stan rurek (pod kątem pęknięć)
- Zaleca się regularną kontrolę nasadek gumowych. W przypadku zużycia, należy wymienić nasadkę na nową.

7. Warunki przechowywania i transportu

Nie należy narażać wyrobu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wody i wilgoci.

8. Dane dotyczące gwarancji

Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę są objęte gwarancją, której warunki zostały opisane w karcie gwarancyjnej dostępnej na naszej stronie internetowej. Prosimy o kontakt ze sprzedawcą, od którego zakupiono

produkt. Należy pamiętać, że do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

9. Oznaczenia

REF	Numer referencyjny		Producent
LOT	Numer serii	UDI	Kod UDI
SN	Numer seryjny	MD	Wyrób medyczny
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
CE	Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów. Dowiedz się więcej na **www.timago.com.** Dziękujemy za wybór Timago!

Timago International Group
Ossowski Sp. k.
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com

CE MD

07/2025 (IV)